

Ridefinizione dell'accesso

Acrobat® 2

CALIBRATED TIP WIRE GUIDE

AT LEAST
**35%
GREATER**
TIP FLEXIBILITY
THAN MAJOR
COMPETITORS*

Equilibrio tra capacità di spinta e flessibilità

Gli obiettivi delle procedure sono gli stessi ogni giorno: accesso semplice e affidabile in tutte le procedure ERCP. Che si tratti di una procedura ERCP di routine o delle procedure più complesse e impegnative, la guida Acrobat 2 è la guida di riferimento che ridefinisce l'accesso garantendo la combinazione ottimale tra flessibilità della punta e migliore capacità di spinta per offrire prestazioni affidabili ogni giorno.

Design morbido della punta


Punta flessibile calibrata e a spirale specificamente progettata per garantire il rispetto del delicato tessuto pancreatico-biliare

Spirale in platino per permettere la visibilità fluoroscopica

Punta a spirale in platino da 4 cm per agevolare la visualizzazione fluoroscopica nel corso dell'intera procedura

Accesso facile

Il rivestimento idrofilo da 5,8 cm riduce l'attrito permettendo la trackability e il passaggio nelle anatomie complesse

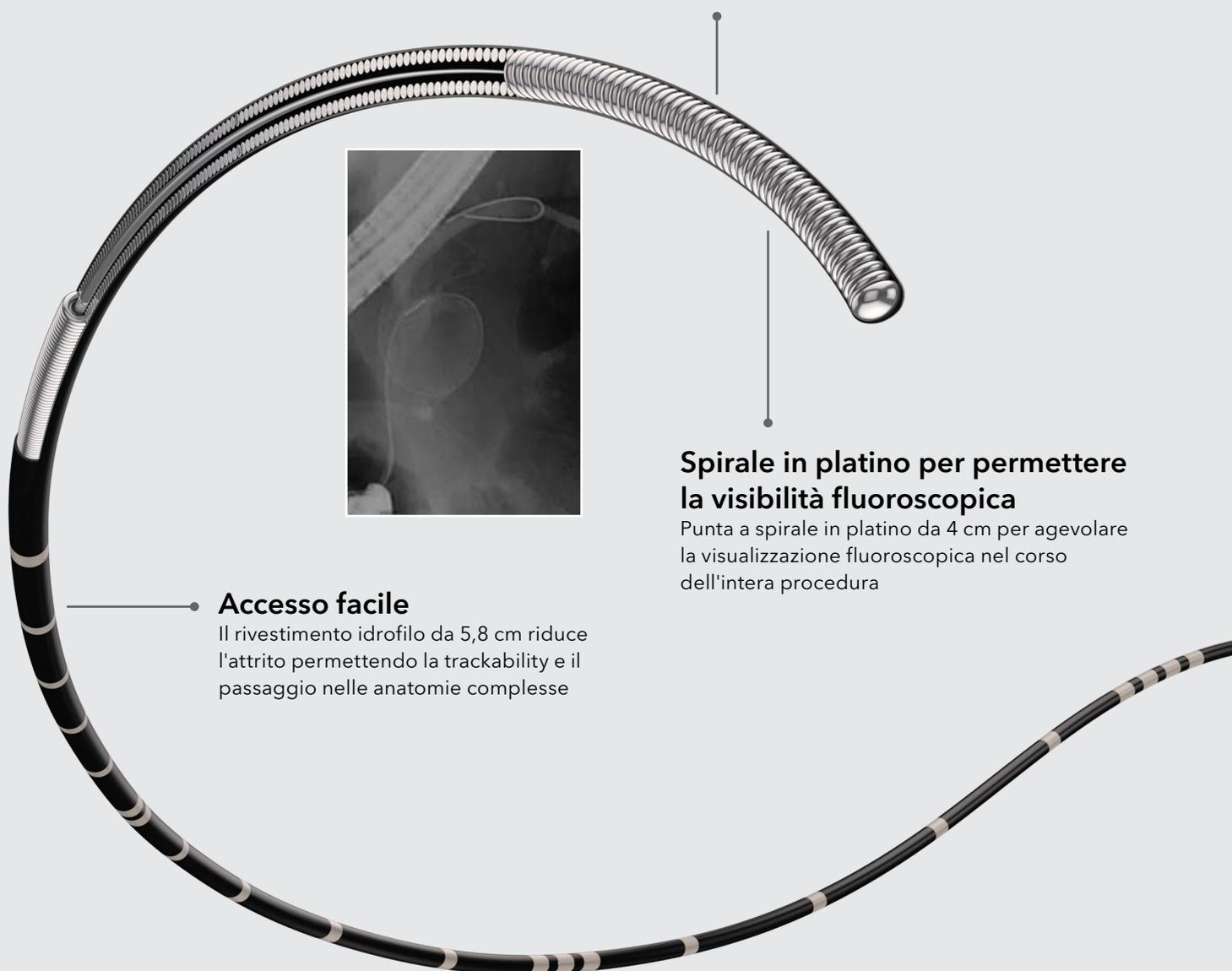


Applicazione della tecnologia di accesso IR a una guida per ERCP

La flessibilità della punta è fondamentale per ottenere l'accesso. Ecco perché abbiamo preso spunto dal ruolo pionieristico di Cook nella radiologia interventistica (IR). Adattando queste competenze in modo specifico all'ERCP (colangiopancreatografia retrograda per via endoscopica), abbiamo creato una delle guide con la punta più flessibile sul mercato. Ciò significa che è possibile ottenere le stesse prestazioni di accesso sulle quali fanno affidamento i radiologi interventisti da oltre cinquant'anni. Di fatto, Acrobat 2 ha una flessibilità della punta più elevata di almeno il 35% rispetto alle 8 principali guide testate.*



Test di grammatura della punta di Acrobat 2

Flessibilità della punta più elevata di almeno il 35%

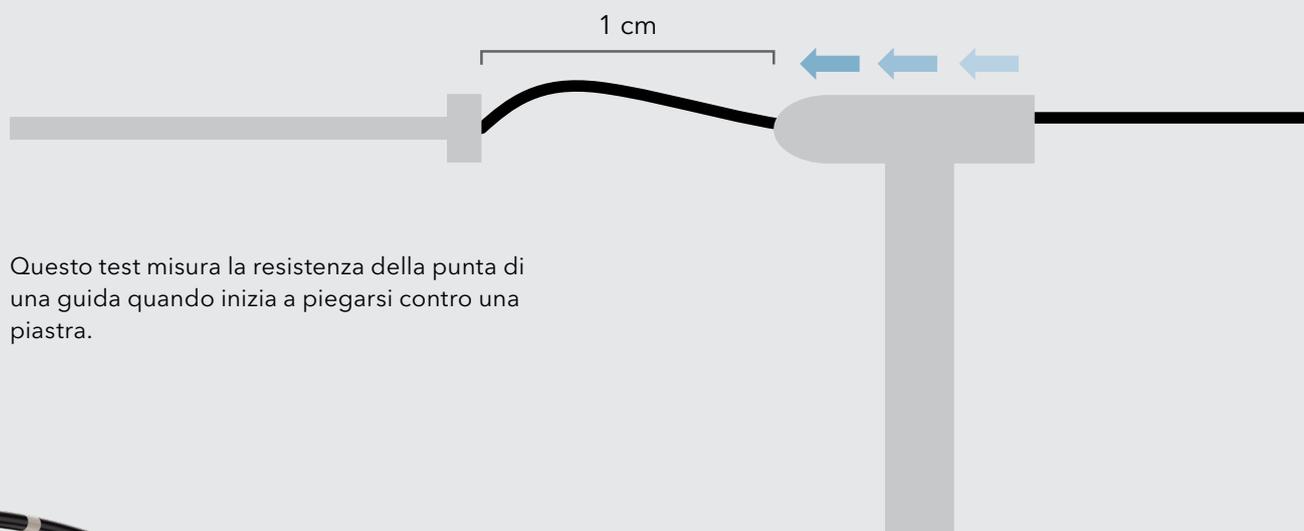

Controllo di torsione 1:1

Disponibile nelle versioni con punta diritta e angolata, Acrobat 2 garantisce il controllo di torsione 1:1 per una precisa rotazione della guida per l'incannulamento selettivo e lo spostamento nei dotti, ove necessario.

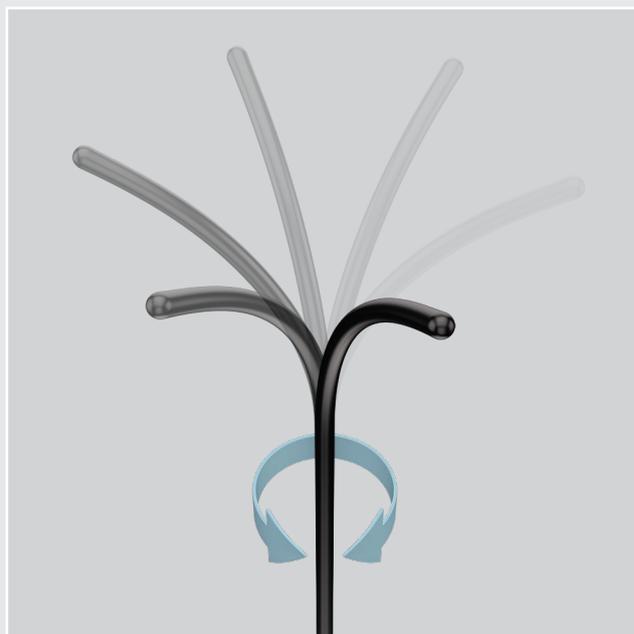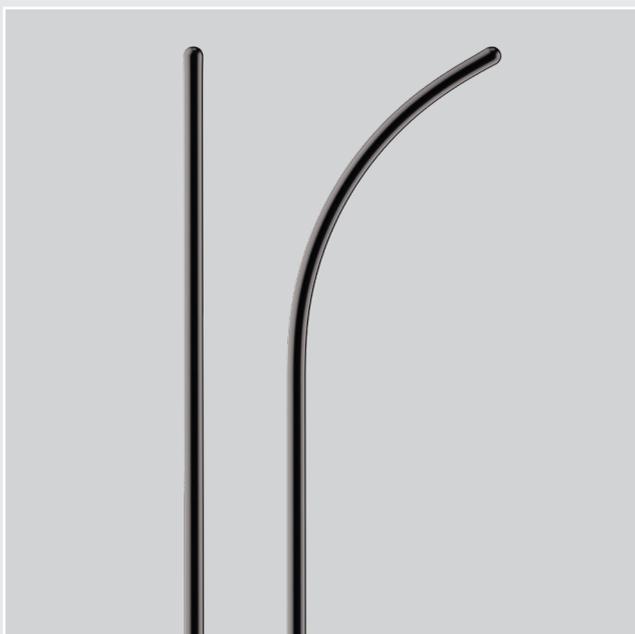

29% in più di capacità di spinta

Anima in nitinol più grande per un miglioramento del 29% nella capacità di spinta della guida rispetto alla guida Acrobat da 0,035 inch originale






Visualizzazione della posizione e del movimento

Il sistema Mark V System® offre una visualizzazione ad alto contrasto del movimento e della profondità di inserzione

Affidabilità quotidiana

La guida Acrobat 2 è interamente progettata per garantire prestazioni affidabili. La punta flessibile a spirale in platino, la capacità di spinta, il controllo di torsione 1:1 e il sistema Mark V System sono tutte caratteristiche che si uniscono per creare una guida in grado di garantire l'affidabilità in tutte le procedure ERCP.

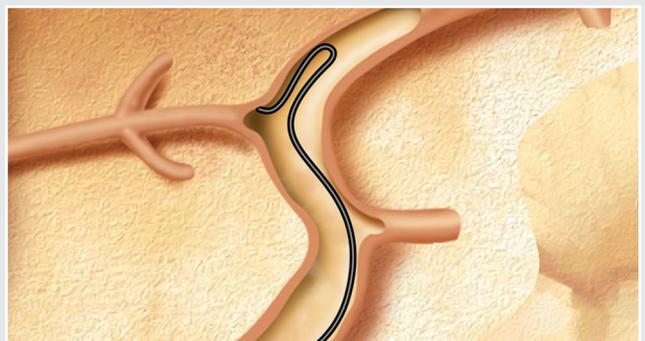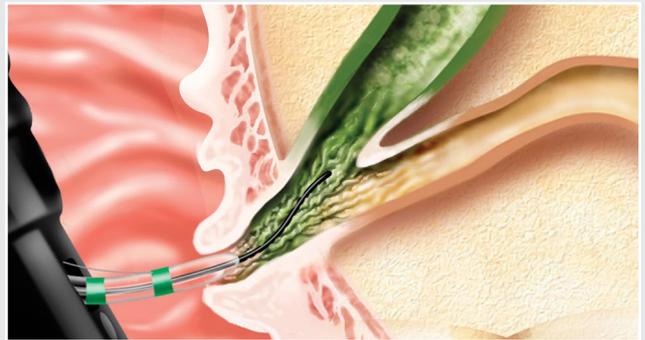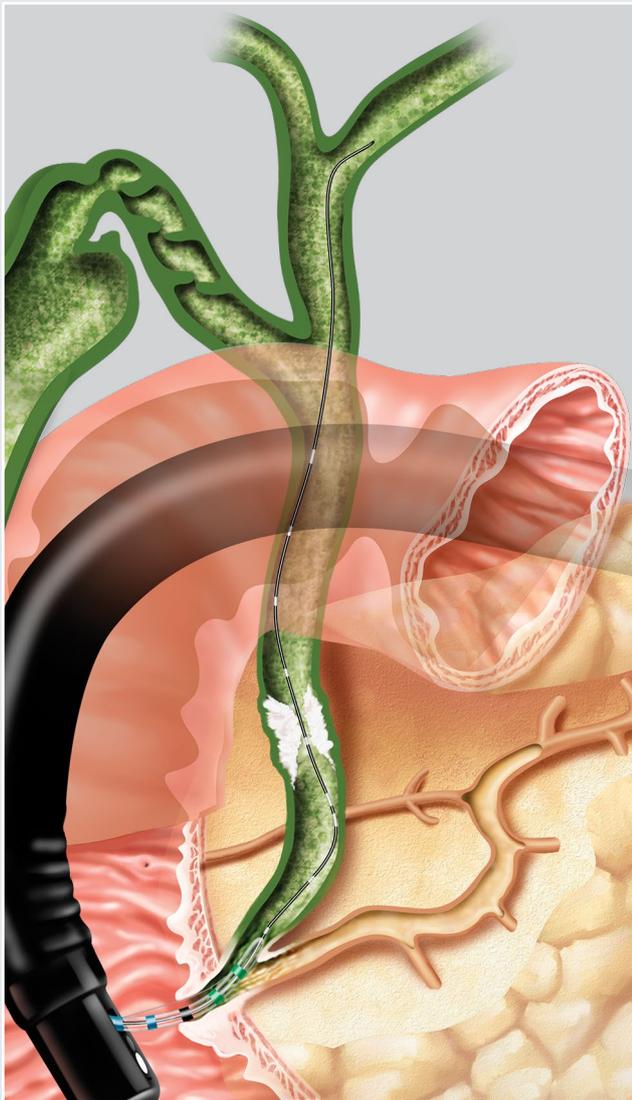

Specifiche tecniche del prodotto

Questo dispositivo viene usato per l'incannulamento dei dotti biliari e pancreatici, e come ausilio nel superamento di stenosi particolarmente difficili durante la procedura di ERCP.

Il dispositivo viene fornito sterile ed è esclusivamente monouso.

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Guida Diametro inch	Guida Lunghezza cm	Lunghezza della punta radiopaca cm	Rivestimento idrofilo Lunghezza cm	Punta Forma
G47608	AWG2-25-260	0,025	260	4	5,8	Dritta
G47609	AWG2-25-260-A	0,025	260	4	5,8	Angolata
G47610	AWG2-25-450	0,025	450	4	5,8	Dritta
G47611	AWG2-25-450-A	0,025	450	4	5,8	Angolata
G47612	AWG2-35-205	0,035	205	4	5,8	Dritta
G47613	AWG2-35-205-A	0,035	205	4	5,8	Angolata
G47614	AWG2-35-260	0,035	260	4	5,8	Dritta
G47615	AWG2-35-260-A	0,035	260	4	5,8	Angolata
G47616	AWG2-35-450	0,035	450	4	5,8	Dritta
G47617	AWG2-35-450-A	0,035	450	4	5,8	Angolata

Può essere lasciata in situ durante la sfinterotomia. **Attenzione** - Non utilizzare con dispositivi dalla punta metallica.

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al Servizio clienti.

Sfinterotomi precaricati con Acrobat® 2

Usati per l'incannulamento del sistema duttale e per la sfinterotomia.

Il dispositivo viene fornito sterile ed è esclusivamente monouso.

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Dimensione del catetere Fr	Forma della punta	Guida Diametro inch	Guida Lunghezza cm	Canale operativo minimo mm
G57298	DASH-AWG2-25-450	6,3	DomeTip	0,025	450	2,8
G57299	DASH-AWG2-35-260	6,6	DomeTip	0,035	260	2,8
G57300	DASH-AWG2-35-450	6,6	DomeTip	0,035	450	2,8
G57301	FS-OMNI-AWG2-35-205	7,5	DomeTip	0,035	205	3,2
G57302	FS-OMNI-AWG2-35-260	7,5	DomeTip	0,035	260	3,2
G57303	FS-OMNI-AWG2-35-450	7,5	DomeTip	0,035	450	3,2

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al Servizio clienti.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001633, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com-A4



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-A4