


Medir directamente la presión portal mediante ecoendoscopia.

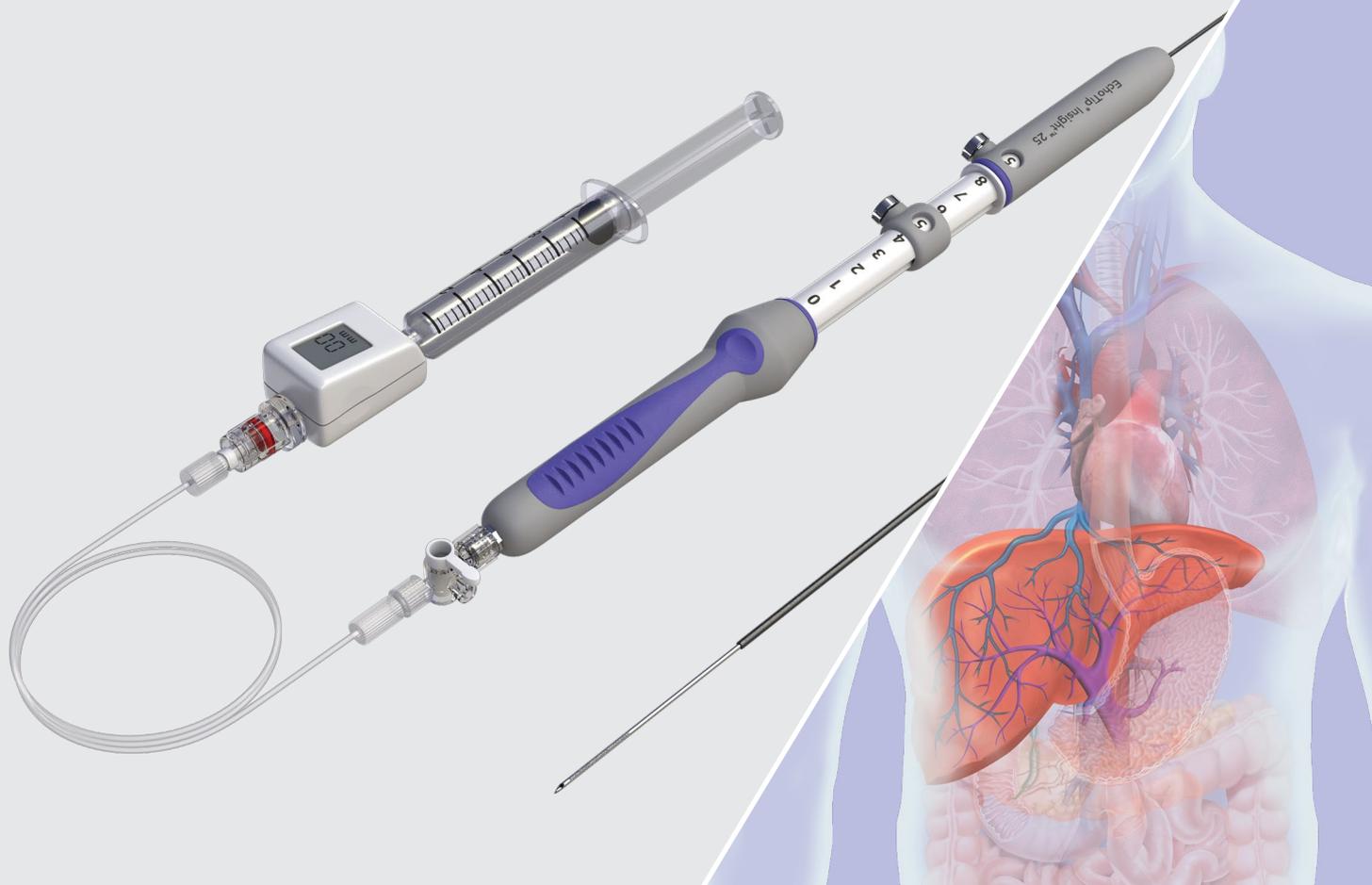

EchoTip[®] Insight[™]
PORTOSYSTEMIC PRESSURE GRADIENT

Medición de la presión portal accesible para endohepatología


El sistema EchoTip Insight permite a los endoscopistas medir directamente la presión portal mediante ecoendoscopia. Un procedimiento novedoso y mínimamente invasivo que ahora permite exámenes hepáticos más exhaustivos mediante procedimientos endoscópicos.


Medición **directa**

Con el sistema EchoTip Insight, ahora puede medir directamente la presión en las venas porta y hepática. Mediante orientación por ecoendoscopia, el promedio de tres mediciones en cada vena se utiliza para calcular el gradiente.

Medición **precisa**

El transductor le permite medir con precisión el gradiente de presión portal, para poder determinar la opción de tratamiento apropiada para su paciente.

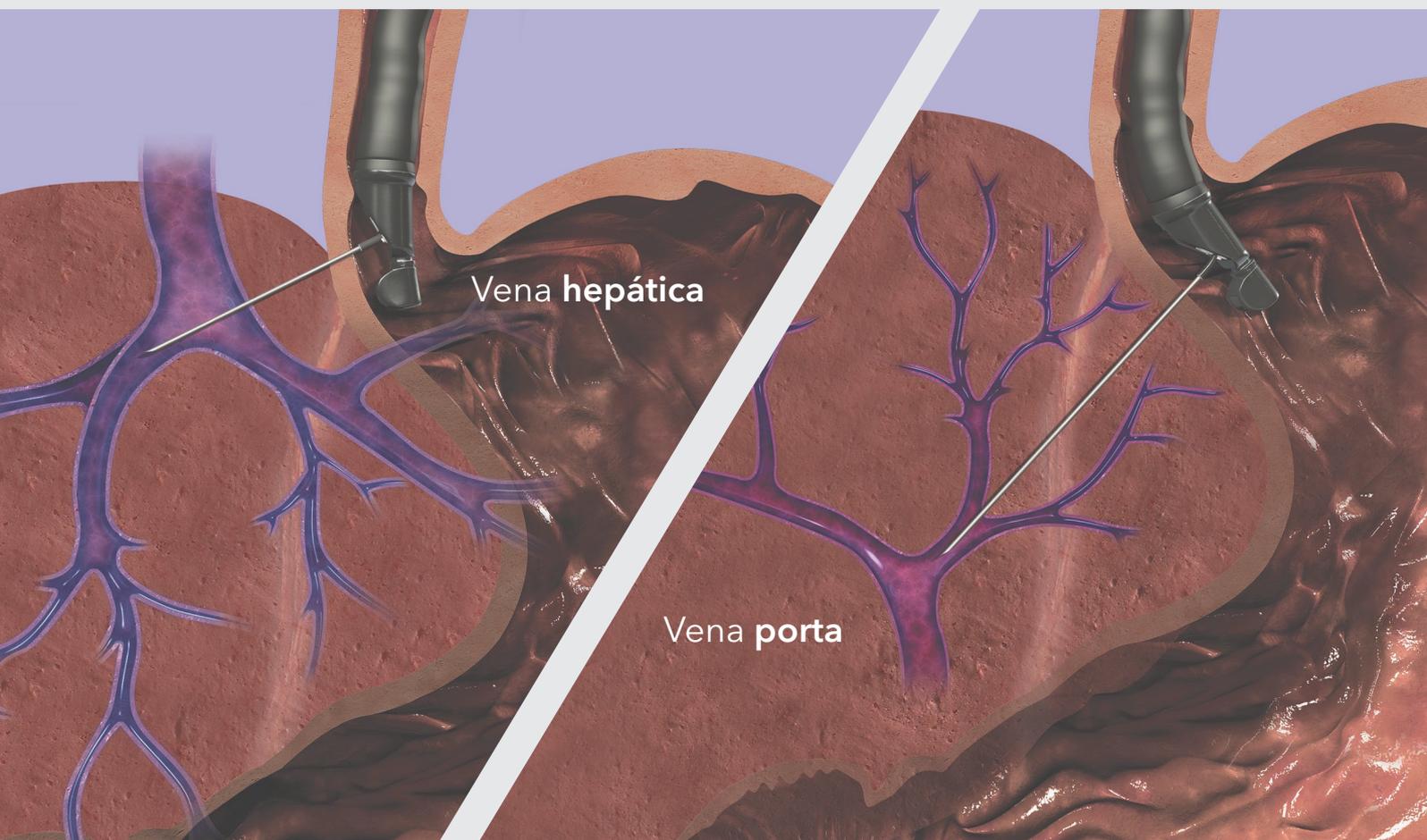

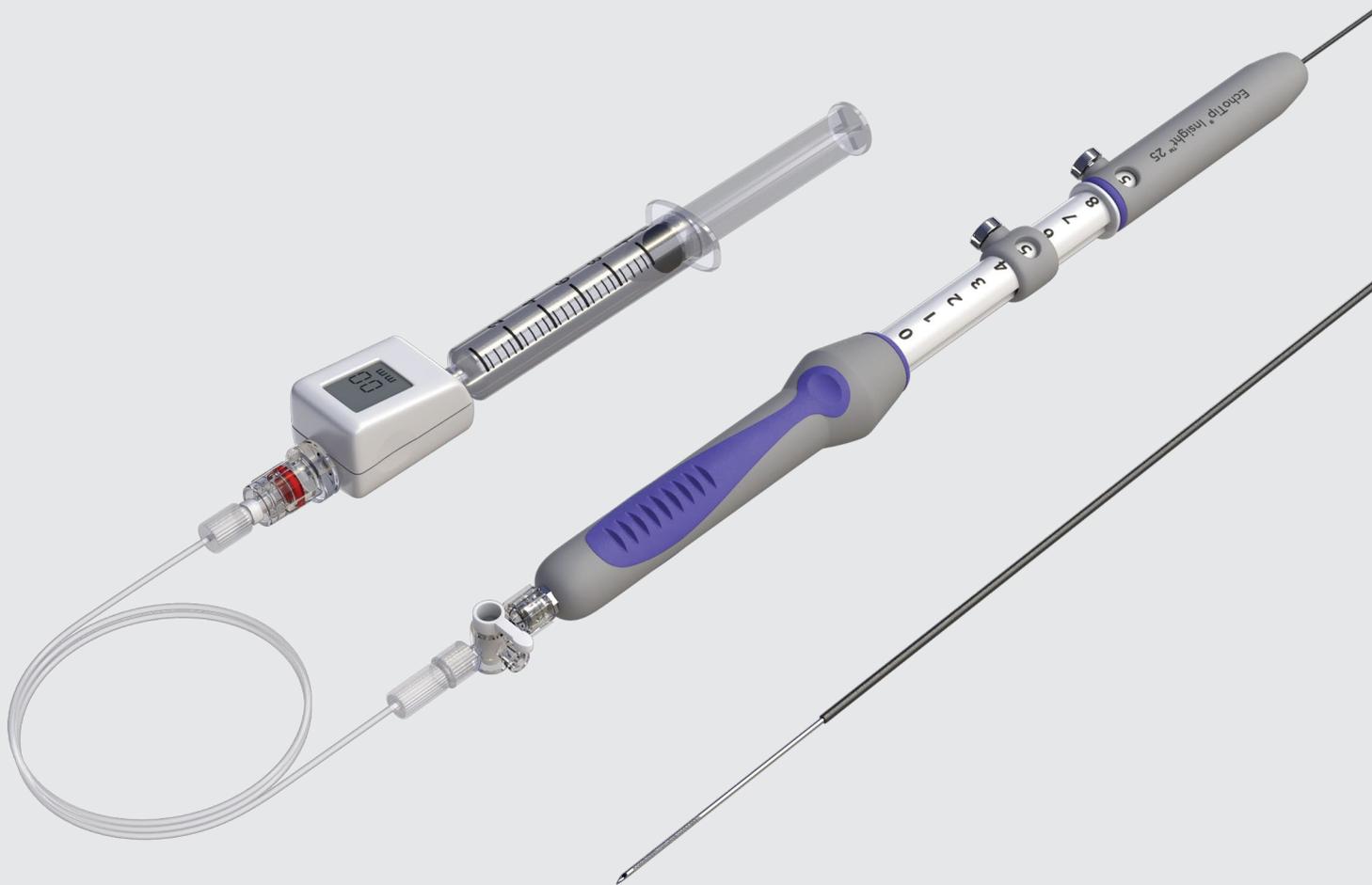

Aguja

- Punta ecogénica: para poder garantizar que la punta de la aguja se encuentre en el objetivo
- Aguja de pequeño calibre (calibre de 25 G): para facilitar el acceso de las venas porta y hepática

Transductor

- Representación digital de la lectura de la presión
- Transductor de calibración automática
- Tamaño compacto

EchoTip[®] Insight[™]
PORTOSYSTEMIC PRESSURE GRADIENT

Especificaciones del producto

Este dispositivo se utiliza para acceder a la vasculatura venosa relacionada con la circulación portal y el flujo de salida hepático a través del canal de accesorios de un ecoendoscopio para permitir la medición de la presión directa.

| Referencia | Referencia de producto | Tamaño de la aguja Calibre G | Tamaño de la vaina Fr | Extensión de la aguja ajustable cm | Longitud del tubo conector cm | Intervalo de presión mm Hg | Canal de accesorios mínimo mm |
|------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| G58000 | ECHO-PPG-I | 25 | 5,2 | 8 | 90 | -199 a +999 | 2,8 |

Algunos productos o referencias de producto pueden no estar disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante local o centro de atención al cliente de Cook.

Vista® | Formación teórica y práctica

Para obtener más detalles acerca del EchoTip Insight, póngase en contacto con su representante local de Cook o visite www.cookmedical.eu.

Si desea asistir a uno de nuestros talleres Vista Education and Training, puede encontrar información en nuestro sitio web de Vista: vista.cookmedical.com.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4