


Misurazione diretta della pressione portale sotto guida EUS

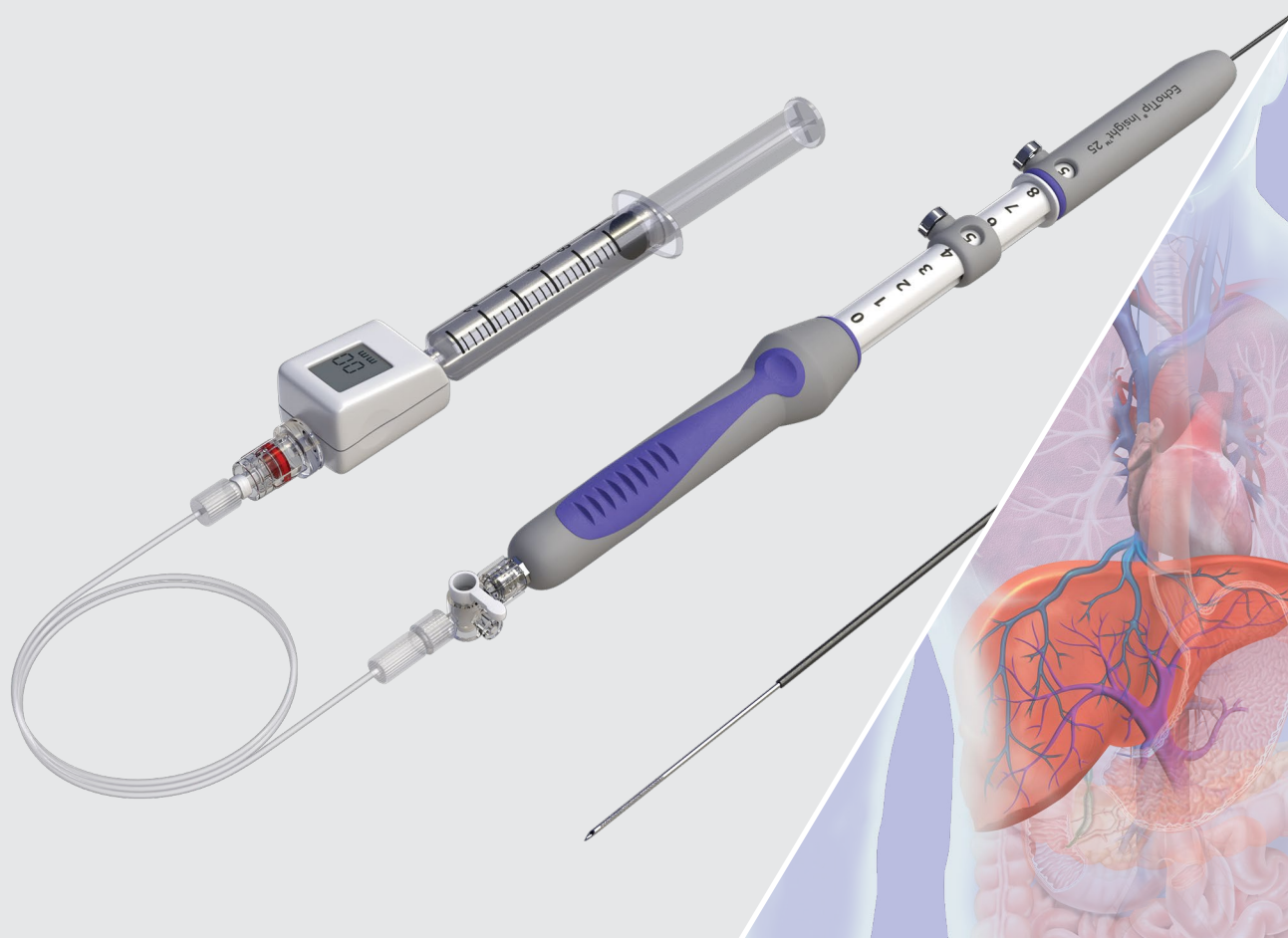

EchoTip[®] Insight[™]
PORTOSYSTEMIC PRESSURE GRADIENT

Misurazione accessibile della pressione portale per l'endo-epatologia


Il sistema EchoTip Insight permette agli specialisti di endoscopia di misurare direttamente la pressione portale sotto guida ecoendoscopica (EUS). Una nuova procedura mininvasiva che oggi consente la valutazione completa del fegato attraverso procedure endoscopiche.


Misurazione **diretta**

Con il sistema EchoTip Insight, è ora possibile misurare direttamente la pressione nelle vene epatiche e porta. Sotto guida EUS, viene calcolato il gradiente utilizzando la media di tre misurazioni a livello di ogni vena.

Misurazione **accurata**

Il trasduttore consente di misurare in modo accurato il gradiente di pressione portale per stabilire il percorso di trattamento adeguato per il paziente.

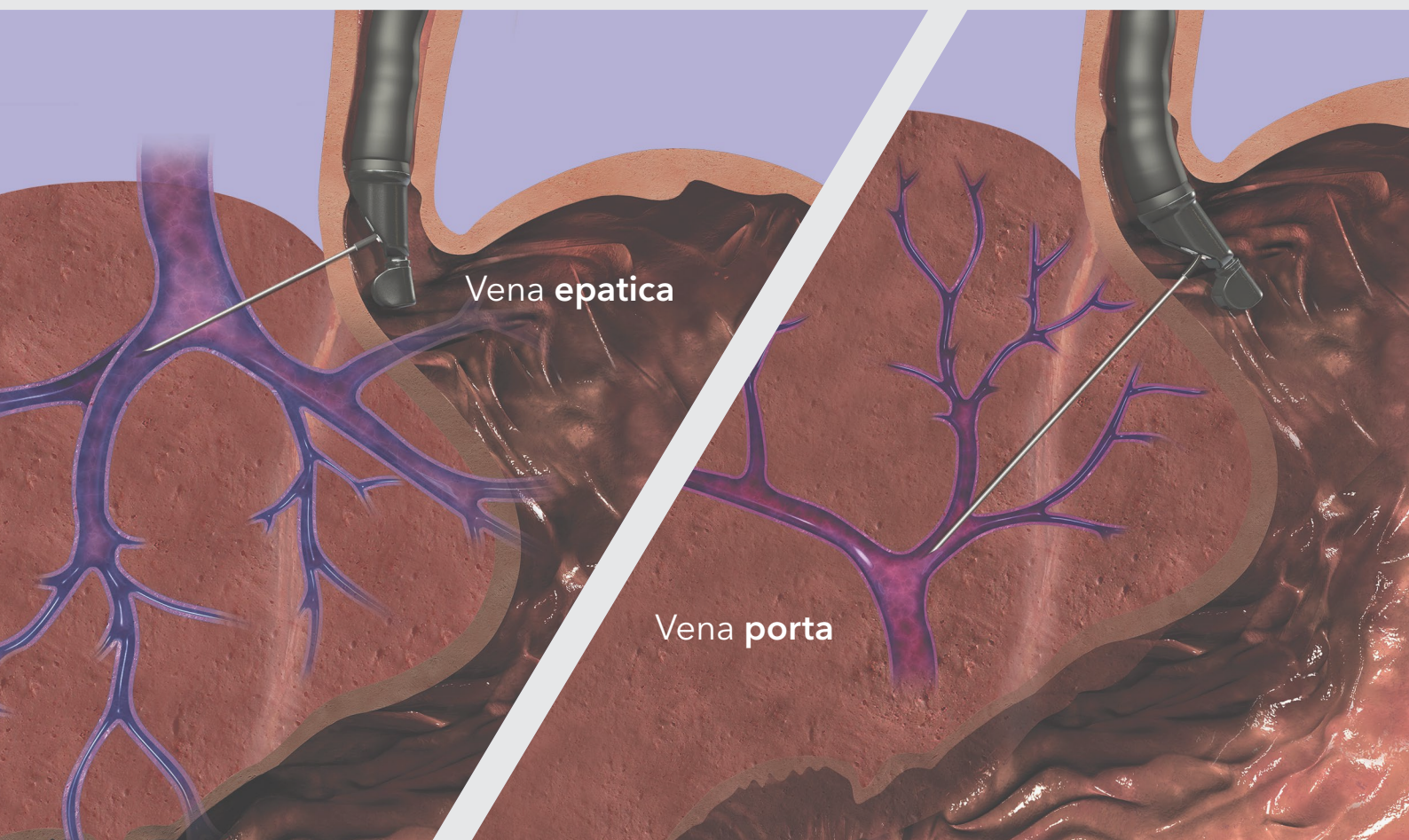

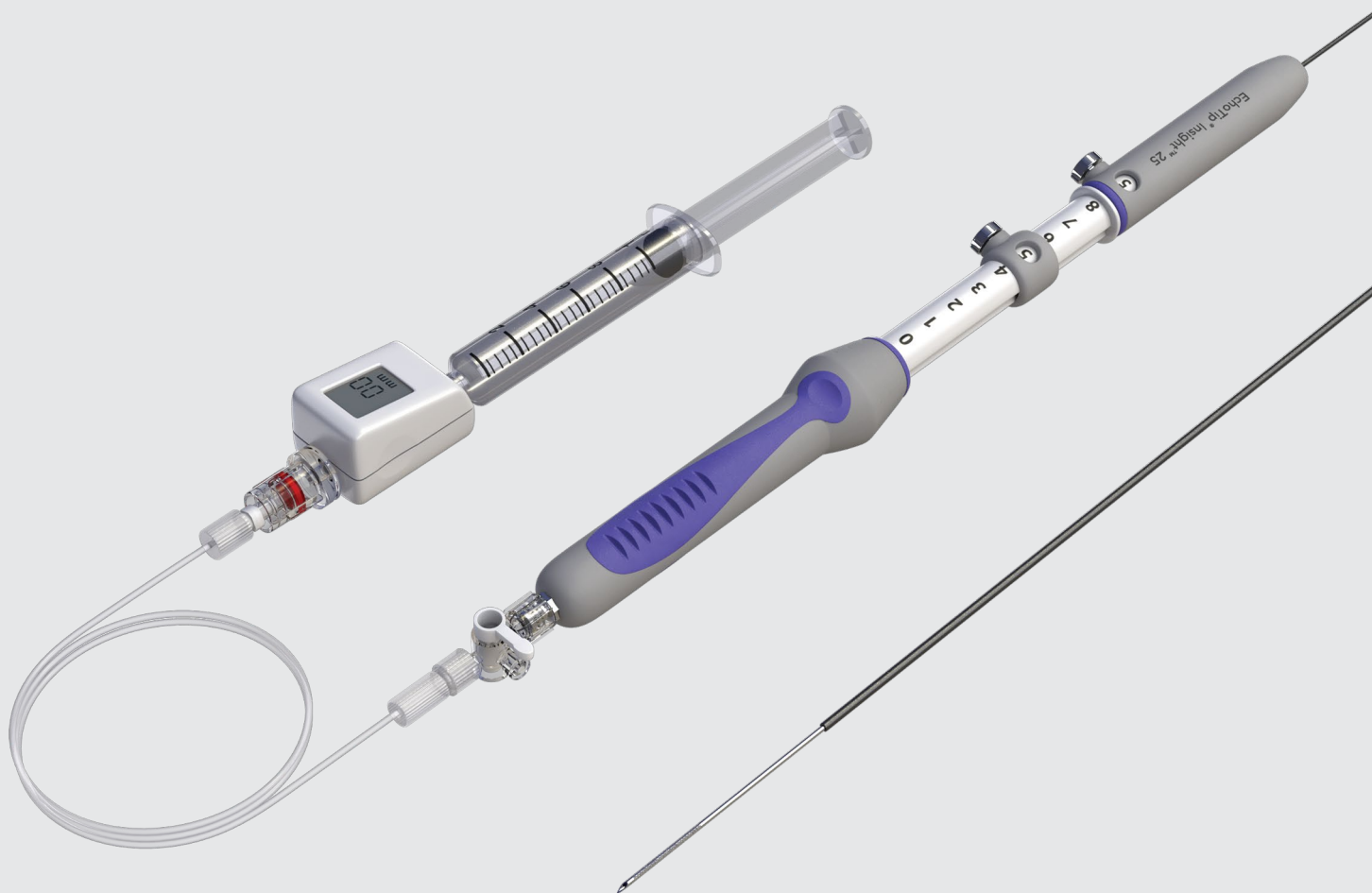

Ago

- Punta ecogenica: per garantire che la punta dell'ago sia all'interno del target
- Ago di piccolo calibro (25 G): per agevolare l'accesso alle vene porta ed epatiche

Trasduttore

- Display digitale per la lettura della pressione
- Trasduttore auto-calibrante
- Dimensioni compatte

EchoTip[®] Insight[™]
PORTOSYSTEMIC PRESSURE GRADIENT

Specifiche tecniche del prodotto

Questo dispositivo viene utilizzato per accedere al sistema vascolare venoso correlato alla circolazione portale e al deflusso epatico attraverso il canale operativo di un ecoendoscopio per consentire la misurazione diretta della pressione.

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Calibro dell'ago G	Dimensioni dell'introduttore Fr	Estensione regolabile dell'ago cm	Lunghezza del tubo connettore cm	Intervallo di pressione mm Hg	Canale operativo minimo mm
G58000	ECHO-PPG-I	25	5,2	8	90	da -199 a +999	2,8

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al Servizio clienti per maggiori informazioni.

Vista® | Formazione teorica e pratica

Per maggiori informazioni su EchoTip Insight, contattare il rappresentante Cook di zona o visitare la pagina www.cookmedical.eu.

Per informazioni su come partecipare a uno dei nostri seminari di formazione teorica e pratica Vista, visitare il sito web Vista: vista.cookmedical.com.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4