


Messen Sie den Druck im  
Pfortadersystem bei der  
Endosonografie direkt.




EchoTip<sup>®</sup> Insight<sup>™</sup>  
PORTOSYSTEMIC PRESSURE GRADIENT

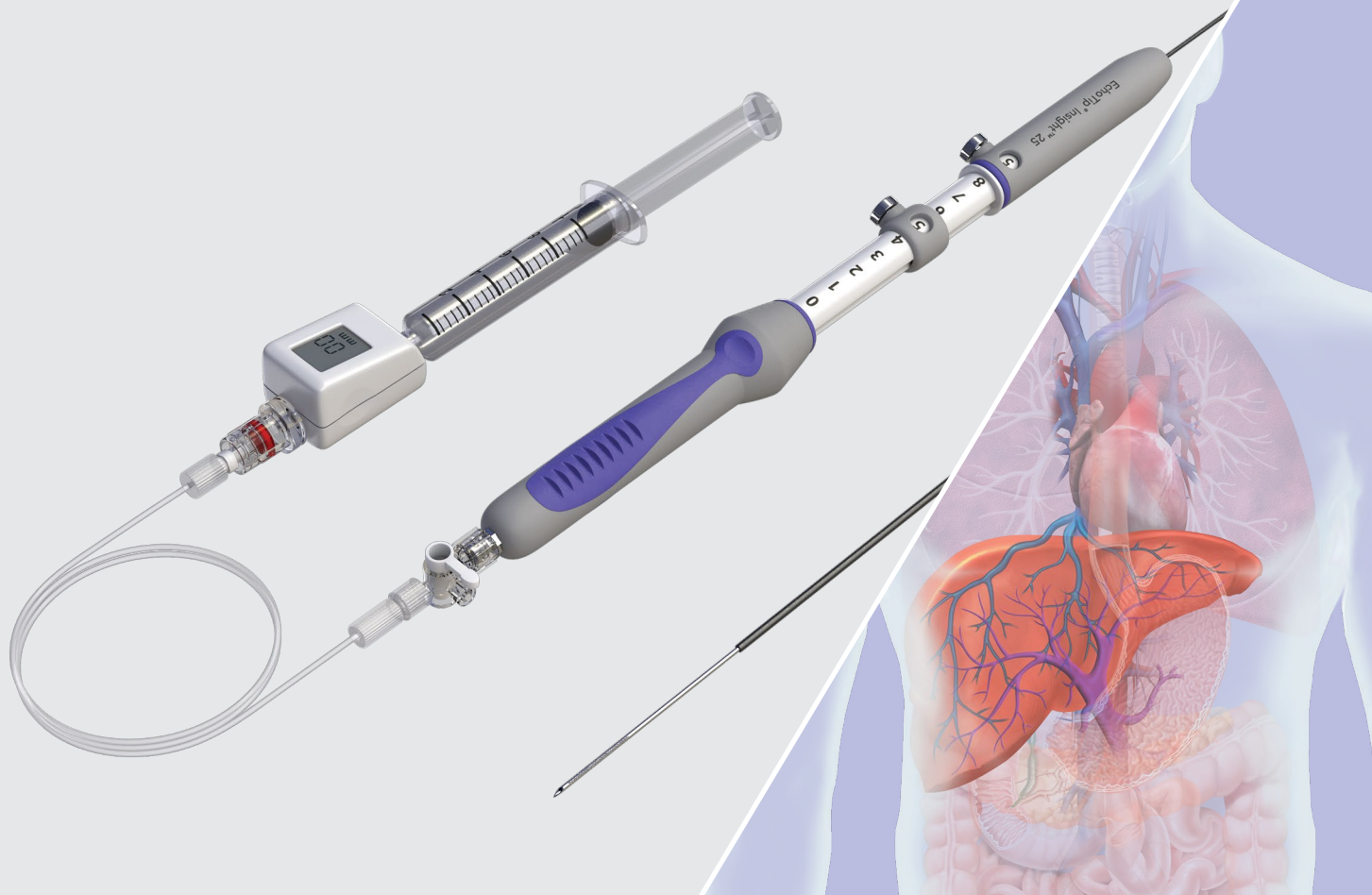

## EchoTip<sup>®</sup> Insight<sup>™</sup>

PORTOSYSTEMIC PRESSURE GRADIENT

Die EchoTip Insight Nadel und der entsprechende Verbindungsschlauch sind zusammen mit dem Compass CT Transducer in einem Außenkarton verpackt. Nach der Montage werden diese Instrumente zusammen mit einem Ultraschallendoskop bei Patienten mit Pfortaderhochdruck verwendet.

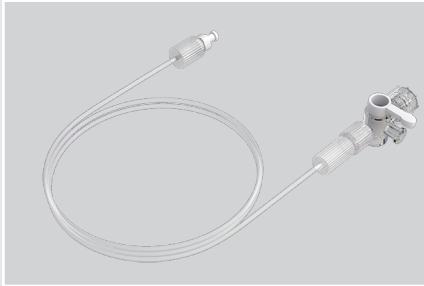


### Compass CT Drucktransducer:

- Digitale Anzeige des gemessenen Drucks
- Selbstkalibrierender Transducer
- Kompakte Abmessungen

### Verbindungsschlauch:

- 90 cm langer Verbindungsschlauch zur Positionierung des Transducers auf der Ebene der phlebostatischen Achse

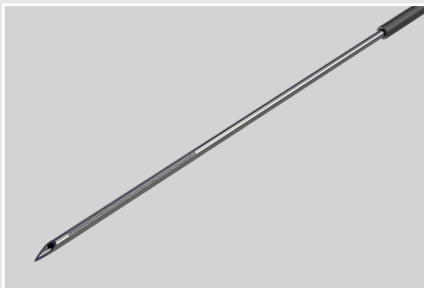

### Ultraschallnadel für die Endoskopie:

- Echogene Spitze - zur Überprüfung, ob sich die Spitze der Nadel im Zielbereich befindet
- Dünne Nadel (25 Gage) - für den Zugang zum Pfortadersystem und den Abflusswegen der Leber

Bestellnummer	Referenznummer	Nadelgröße Gage	Schleusengröße Fr	Einstellbare Nadelaus- fahr länge cm	Verbindungs- schlauch Länge cm	Druckbereich mm Hg	Mindestgröße des Arbeitskanals mm
G58000	ECHO-PPG-I	25	5,2	8	90	-199 bis +999	2,8

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst.

Lesen Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu).

### Customer Service

EU Website: [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu)  
 EDI: [cookmedical.eu/edi](http://cookmedical.eu/edi)  
 Distributors: +353 61239240, [ssc.distributors@cookmedical.com](mailto:ssc.distributors@cookmedical.com)  
 Austria: +43 179567121, [oe.orders@cookmedical.com](mailto:oe.orders@cookmedical.com)  
 Belgium: +32 27001633, [be.orders@cookmedical.com](mailto:be.orders@cookmedical.com)  
 Denmark: +45 38487607, [da.orders@cookmedical.com](mailto:da.orders@cookmedical.com)  
 Finland: +358 972519996, [fi.orders@cookmedical.com](mailto:fi.orders@cookmedical.com)  
 France: +33 171230269, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Germany: +49 6950072804, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 Hungary: +36 17779199, [hu.orders@cookmedical.com](mailto:hu.orders@cookmedical.com)  
 Ireland: +353 61239252, [ie.orders@cookmedical.com](mailto:ie.orders@cookmedical.com)  
 Italy: +39 0269682853, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Netherlands: +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto:nl.orders@cookmedical.com)  
 Norway: +47 23162968, [no.orders@cookmedical.com](mailto:no.orders@cookmedical.com)  
 Spain: +34 912702691, [es.orders@cookmedical.com](mailto:es.orders@cookmedical.com)  
 Sweden: +46 858769468, [se.orders@cookmedical.com](mailto:se.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - French: +41 448009609, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - Italian: +41 448009609, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - German: +41 448009609, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 United Kingdom: +44 2073654183, [uk.orders@cookmedical.com](mailto:uk.orders@cookmedical.com)

USA Website: [cookmedical.com](http://cookmedical.com)

EDI: [cookmedical.com/edi.do](http://cookmedical.com/edi.do)

#### Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: [orders@cookmedical.com](mailto:orders@cookmedical.com)

#### Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-A4