


Bandligaturgestützte endoskopische Schleimhautresektion im oberen Magen- Darm-Trakt.



Duette[®]
MULTI-BAND MUCOSECTOMY

Mithilfe der Kombination aus einem Multiband-Ligator und einer Schlinge ermöglicht Duette die gezielte Gewebeentnahme und -resektion im oberen Magen-Darm-Trakt. Die innovative Auslegung von Duette sorgt für positive Ergebnisse bei der endoskopischen Schleimhautresektion.

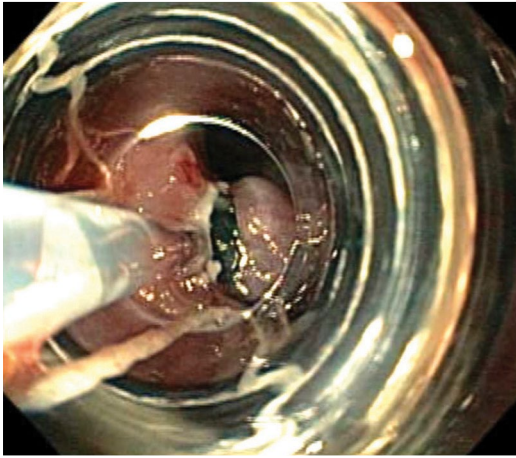

Bildnachweis (Verfahren): Robert Enns, MD, FRCP
und Sunny Lee, MBBS, FRACP

Duette®

MULTI-BAND MUCOSECTOMY

Dieses Instrument dient zur endoskopischen Schleimhautresektion im oberen Magen-Darm-Trakt. Die Schlinge wird steril geliefert, der Bandligator unsteril. Das Produkt ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.

- Die Konfiguration des Produkts ist vergleichbar mit der des 6 Shooter® Saeed® Multiband-Ligators.
- Für die Resektion stehen sechs Latexbänder zur Verfügung. Auf dem Zylinder befindet sich ein durchsichtiges Band, das darauf hinweist, dass nur noch ein weiteres Band vorhanden ist.
- Die Schlinge besteht aus einem Drahtgeflecht und weist eine Mini-Sechseckform auf.
- Die Schlinge ist in 5 und 7 Fr erhältlich.
- Die Schlinge kann durch den Ligator-Griff geführt werden und ermöglicht dadurch eine schnelle Resektion von ligiertem Gewebe ohne Entfernung des Endoskops oder Auseinanderbauen von Komponenten.

Bestellnummer	Referenznummer	Außendurchmesser des Endoskops mm	Anzahl der Bänder	Schleuse Fr	Schlingen-größe cm	Mindest-durchmesser des Arbeitskanals mm
G34036	DT-6	9,5–13	6	7	1,5 x 2,5	3,7
G35129	DT-6-5F	9,5–13	6	5	1,5 x 2,5	2,8
G34054	DT-6-XL	11–14	6	7	1,5 x 2,5	3,7

ACHTUNG: Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex und kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst.

Die vollständigen Produkt- und Verschreibungsinformationen einschließlich Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und möglichen unerwünschten Ereignissen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung. Lesen Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter www.cookmedical.eu.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4