

Resección mucosa endoscópica mediante ligadura con bandas en la porción alta del tubo digestivo



Duette[®]
MULTI-BAND MUCOSECTOMY

El dispositivo Duette está compuesto por un ligador multibanda y un asa, facilitando así el acceso y la resección en la región de la porción alta del tubo digestivo. El diseño de Duette puede ayudarle a obtener mejores resultados clínicos cuando lleve a cabo procedimientos de resección mucosa endoscópica.

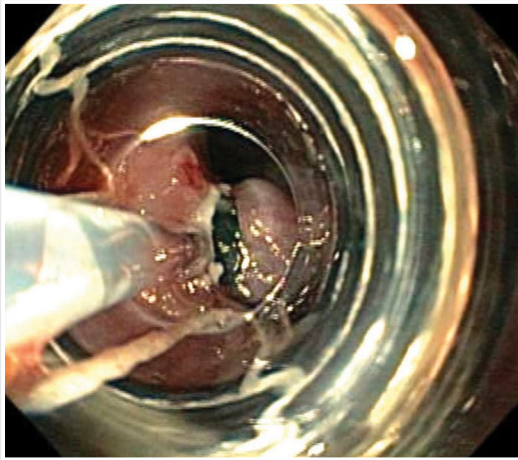


Imagen del procedimiento cedida por cortesía de: Robert Enns, MD, FRCP, y Sunny Lee, MBBS, FRACP

Duette®

MULTI-BAND MUCOSECTOMY

Para la resección mucosa endoscópica en la porción alta del tubo digestivo. El componente de asa se suministra estéril, y el componente de cerclaje se suministra no estéril. Este producto está indicado para un solo uso.

- La configuración del dispositivo es similar a la del ligador multibanda Shooter® Saeed® de 6 bandas.
- Las seis bandas de látex de caucho se proporcionan para poder realizar la resección. En el capuchón viene incluida una única banda transparente para saber así cuándo queda solamente una banda disponible.
- Alambre del asa suave, trenzado y con una configuración minihexagonal.
- Puede seleccionar entre dos tamaños de asa: 5 Fr y 7 Fr.
- El asa puede pasarse a través del mango del ligador para permitir la resección rápida del tejido ligado sin extraer el endoscopio ni desmontar los componentes.

Referencia	Referencia de producto	Diámetro exterior del endoscopio mm	Número de bandas	Vaina Fr	Tamaño del asa cm	Diámetro mínimo del canal de accesorios mm
G34036	DT-6	9,5-13	6	7	1,5 x 2,5	3,7
G35129	DT-6-5F	9,5-13	6	5	1,5 x 2,5	2,8
G34054	DT-6-XL	11-14	6	7	1,5 x 2,5	3,7

AVISO: este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.

Algunos productos o referencias de producto pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o con atención al cliente de Cook para obtener más información.

Consulte las instrucciones de uso para obtener información completa sobre el producto y la prescripción en detalle, incluidas las indicaciones, contraindicaciones, avisos, precauciones y posibles acontecimientos adversos. Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en www.cookmedical.eu

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4