

Consiga el cierre.

Rotación uno a uno para lograr una colocación precisa y un diseño que agarra el tejido para proporcionar un cierre seguro



Instinct Plus[®]
ENDOSCOPIC CLIPPING DEVICE

El dispositivo de colocación de clips endoscópicos Instinct Plus se ha rediseñado para un funcionamiento más suave y sensible a las manipulaciones¹ y combina resistencia con la sencillez del despliegue en un solo paso.

Resistencia y seguridad

- Fuerte retención de clips^{2, 3}
- Varias puntas de anclaje en el clip para ayudar a tirar del tejido y sujetarlo
- Clips reforzados con nitinol, una aleación superelástica con memoria de forma

Manejo sensible a la manipulación

- Amplitud de clip ajustable que se abre hasta 16 mm de ancho
- Rotación uno a uno desde el mango hasta la punta
- Posibilidad de abrir y cerrar hasta cinco veces para reposicionar

Versatilidad

- Compatibilidad con endoscopios de visión frontal y lateral
- Indicación de cierre de defectos y hemostasia, colocación de sondas de alimentación yeyunal y stents metálicos esofágicos autoexpandibles (consulte las indicaciones de uso completas para obtener más información)



1. Data on file. Force and throw at handle to approximate tissue and to open clip (with tissue) for Instinct generation 2. Test report 800008-35-R. September 13, 2019.
2. Ponugoti PL, Rex DK. Clip retention rates and rates of residual polyp at the base of retained clips on colorectal EMR sites. *Gastrointest Endosc.* 2017;85(3):530-534.
3. Data on file. Deployed tip tissue dislodgement force post procedure (force of clip retention at tissue) and force of clip compression at tissue for Instinct generation 2. Test report 800008-10-R. August 8, 2019.

Instinct Plus®



ENDOSCOPIC CLIPPING DEVICE

«MR Conditional» (esto es, seguro bajo ciertas condiciones de la RM)



Un paciente con este clip se puede someter a una exploración inmediata en un sistema de RM que cumpla las condiciones siguientes:

- Campo magnético espacial de 3,0 T o 1,5 T
- Gradiente espacial máximo del campo de 1900 G/cm (19 T/m)
- Índice medio de absorción específica de cuerpo entero (SAR, por sus siglas en inglés) máximo notificado para el sistema de RM: 2,0 W/kg

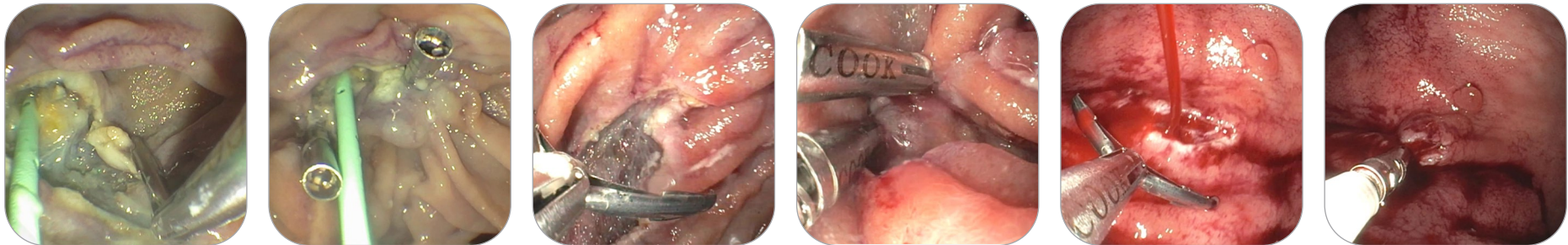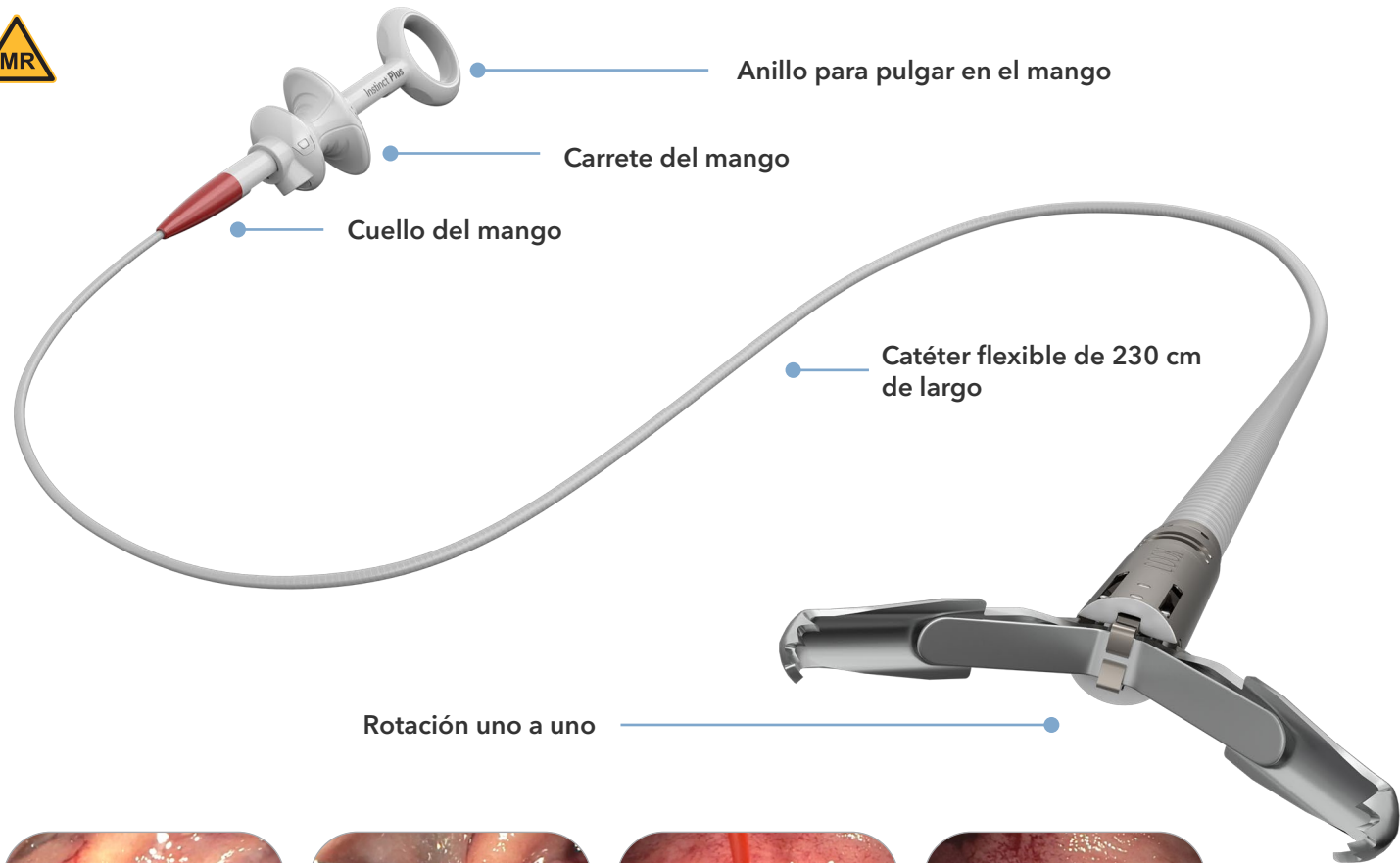

Créditos de la imagen: Dr. Shou Jiang Tang, University of Mississippi Medical Center, Jackson, Mississippi

El dispositivo de colocación de clips endoscópicos Instinct Plus se utiliza para colocar clips endoscópicos dentro del tracto digestivo para:

- Marcado endoscópico
- Hemostasia para:
 - › Defectos en la mucosa/submucosa de menos de 3 cm
 - › Úlceras sangrantes
 - › Arterias de menos de 2 mm
 - › Pólipos de menos de 1,5 cm de diámetro
 - › Divertículos en el colon
 - › Colocación profiláctica de clips para reducir el riesgo de hemorragia tardía después de la resección de una lesión
- Anclaje para sujetar sondas de alimentación yeyunal a la pared del intestino delgado
- Como método complementario para el cierre de perforaciones lumbinales del tracto gastrointestinal de menos de 20 mm que se puedan tratar de forma conservadora
- Anclaje para fijar stents metálicos esofágicos totalmente recubiertos y autoexpandibles a la pared del esófago en pacientes con fístulas, fugas, perforaciones o desuniones

Referencia	Referencia de producto	Ancho de apertura del clip (mm)	Catéter (Fr)	Longitud del catéter (cm)	Cantidad	Estado de RM	Diámetro mínimo de canal con visualización hacia delante (mm)	Diámetro mínimo de canal con visualización lateral (mm)
G58010	INSC-P-7-230-S	16	7	230	10	«MR Conditional» (esto es, seguro bajo ciertas condiciones de la RM)	2,8	4,2

Es posible que algunos productos o números de referencia de productos no estén disponibles en todos los mercados. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de Cook o con el departamento de atención al cliente y distribución. Consulte la información sobre los riesgos del producto en las instrucciones de uso en cookmedical.eu.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu

EDI: cookmedical.eu/edi

Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com

Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com

Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com

Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com

Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com

France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com

Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com

Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com

Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com

Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com

Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com

Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com

Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com

Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com

Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com

Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com

Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com

Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com

United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4

