

Ottenete la chiusura.

Rotazione 1:1 per un
posizionamento sempre preciso
e una progettazione che afferra i
tessuti per una chiusura sicura



Instinct Plus[®]
ENDOSCOPIC CLIPPING DEVICE

Riprogettato per un funzionamento più fluido e una gestione reattiva,¹ l'applicatore endoscopico di clip Instinct Plus combina la resistenza con la semplicità di inserimento e posizionamento in un'unica fase.



Resistenza e sicurezza

- Resistente fissaggio della clip^{2,3}
- Punta di ancoraggio multiple sulla clip per facilitare il trascinamento e trattenere il tessuto
- Clip rinforzate con nitinol, una lega a memoria di forma superelastica

Gestione reattiva

- Apertura della clip regolabile fino a 16 mm di larghezza
- Rotazione 1:1 dall'impugnatura alla punta
- Possibilità di apertura e chiusura fino a cinque volte per il riposizionamento

Versatilità

- Compatibilità con endoscopi sia con vista verso la parte anteriore che sul lato
- Indicazione per chiusura del difetto ed emostasi, nonché per l'apposizione di sondini per alimentazione digiunale e stent metallici autoespandibili esofagei (fare riferimento alle indicazioni per l'uso complete per i dettagli)

1. Data on file. Force and throw at handle to approximate tissue and to open clip (with tissue) for Instinct generation 2. Test report 800008-35-R. 13 settembre 2019.
2. Ponugoti PL, Rex DK. Clip retention rates and rates of residual polyp at the base of retained clips on colorectal EMR sites. *Gastrointest Endosc.* 2017;85(3):530-534.
3. Data on file. Deployed tip tissue dislodgement force post procedure (force of clip retention at tissue) and force of clip compression at tissue for Instinct generation 2. Test report 800008-10-R. 8 agosto 2019.

Instinct Plus®

ENDOSCOPIC CLIPPING DEVICE

Può essere sottoposto a RM in presenza di condizioni specifiche



Un paziente con questa clip può essere scansionato in modo sicuro immediatamente in un sistema RM che soddisfi le seguenti condizioni:

- Campo magnetico spaziale di 3,0 o 1,5 T
- Gradiente massimo del campo speciale di 1900 G/cm (19 T/m)
- Sistema di risonanza magnetica massimo segnalato, tasso di assorbimento specifico (SAR) mediato sul corpo intero di 2,0 W/kg

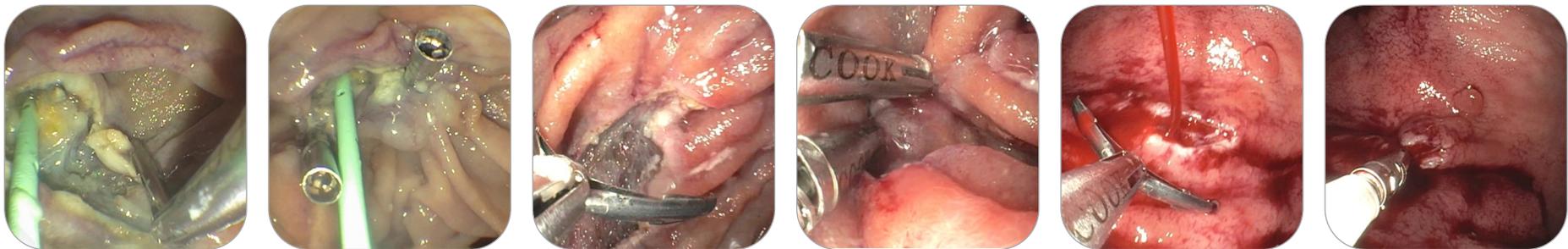
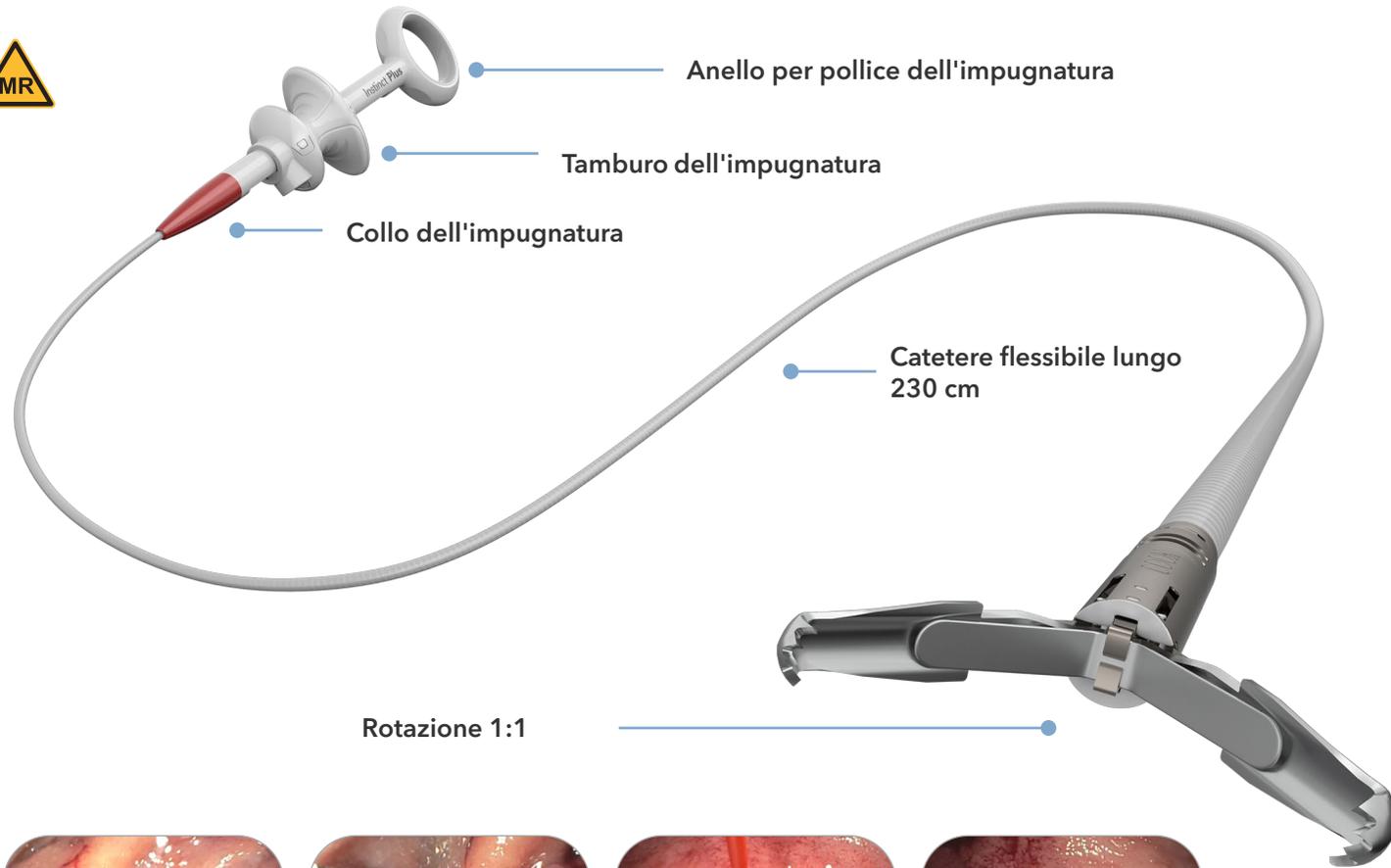


Immagine per gentile concessione di: Dr. Shou Jiang Tang, University of Mississippi Medical Center, Jackson, MS

L'applicatore endoscopico di clip Instinct Plus viene utilizzato per il posizionamento endoscopico di clip all'interno del tratto gastrointestinale per:

- Marcature endoscopiche
- Emostasi per:
 - › Difetti della mucosa/sottomucosa inferiori a 3 cm
 - › Ulcere sanguinanti
 - › Arterie inferiori a 2 mm
 - › Polipi di diametro inferiore a 1,5 cm
 - › Diverticoli nel colon e
 - › Clipping profilattico per ridurre il rischio di sanguinamento ritardato dopo la resezione della lesione
- Ancoraggio per fissare i sondini per alimentazione digiunale alla parete dell'intestino tenue
- Come metodo supplementare per la chiusura di perforazioni luminali del tratto gastrointestinale inferiori a 20 mm che possono essere trattate in modo conservativo
- Ancoraggio per fissare stent metallici autoespandibili esofagei completamente coperti alla parete dell'esofago in pazienti con fistole, perdite, perforazioni o mancata unione

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Larghezza apertura clip in mm	Catetere (Fr)	Lunghezza del catetere in cm	Quantità	Stato RM	Diametro minimo del canale operativo con vista verso la parte anteriore in mm	Diametro minimo del canale operativo con vista sul lato in mm
G58010	INSC-P-7-230-S	16	7	230	10	Può essere sottoposto a RM in presenza di condizioni specifiche	2,8	4,2

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution per maggiori informazioni. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle IFU all'indirizzo cookmedical.eu.



Customer Service

EU Website: cookmedical.eu

EDI: cookmedical.eu/edi

Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com

Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com

Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com

Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com

Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com

France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com

Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com

Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com

Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com

Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com

Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com

Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com

Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com

Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com

Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com

Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com

Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com

Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com

United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:


Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com

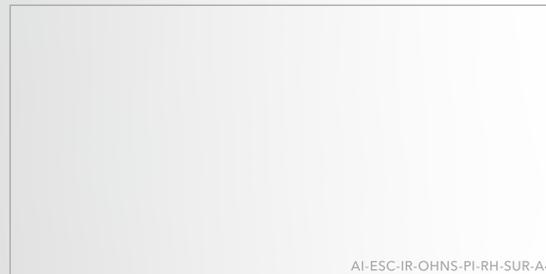

AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4

