


# Auf Flexibilität kommt es an

Gewebe mit einer Kanüle anvisieren und entnehmen, die sich durch maximale Flexibilität und minimalen Kraftaufwand bei der Punktion auszeichnet.

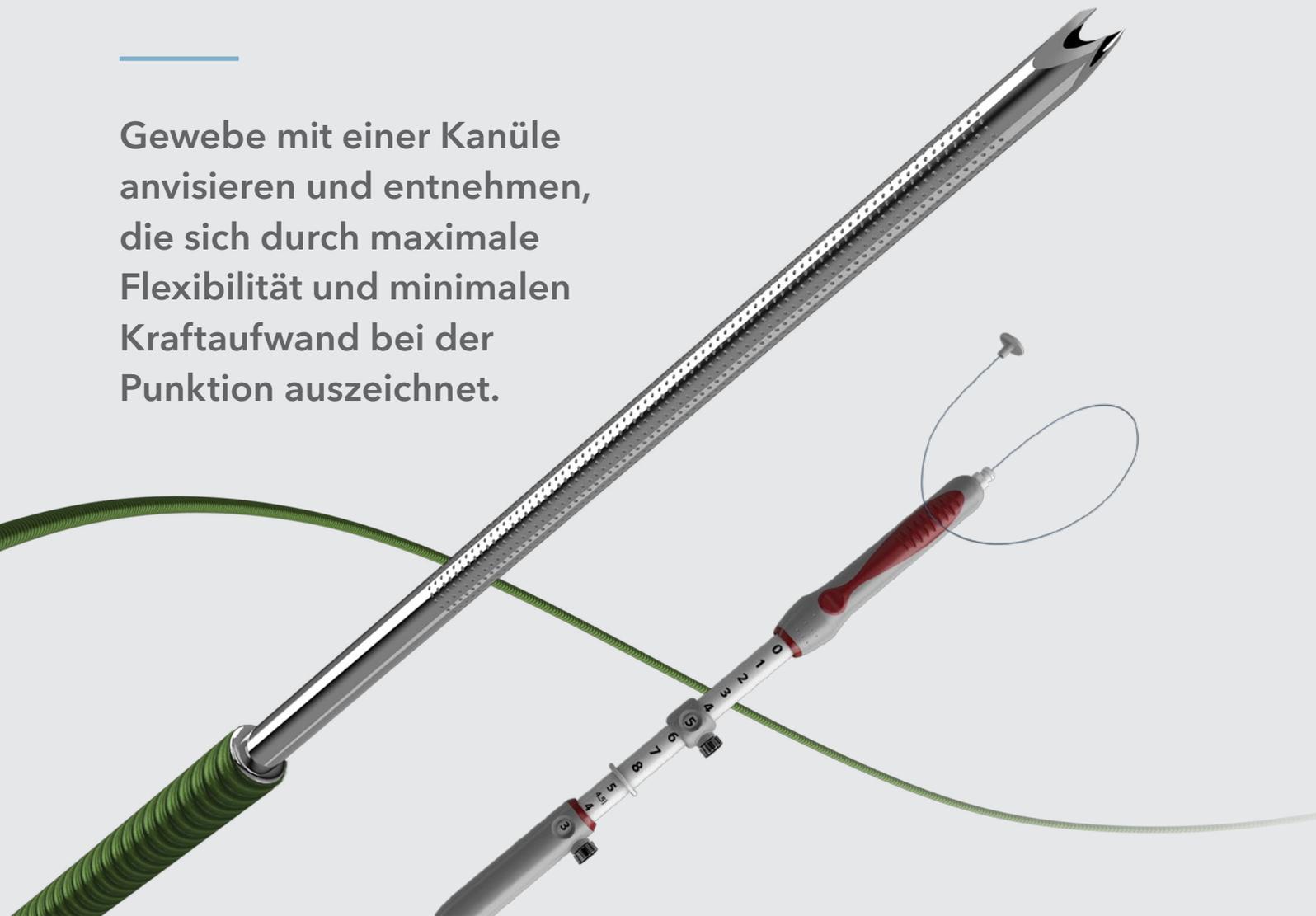

## EchoTip® ClearCore™ EUS BIOPSY NEEDLE

### Mehr Flexibilität

Die mit einer Drahtspirale verstärkte, innen und außen beschichtete Schleuse zeichnet sich durch maximale Flexibilität beim Zugang zu schwieriger Anatomie aus<sup>1,2</sup> und bietet herausragende Kontrolle für den Vorschub der Kanüle ohne Anpassung des Endoskops.<sup>3</sup>

### Optimierte Punktion

Die echogene, aus einer Kobalt-Chrom-Legierung (CoCr) gefertigte Kanüle ist besonders steif<sup>4</sup> und ermöglicht die Gewebepunktion mit minimalem Kraftaufwand<sup>3,5</sup> zum schnellen Ansteuern von Läsionen.

### Kontrollierte Präzision

Der ergonomisch geformte Griff gewährleistet die Kontrolle und Stabilität der Kanüle. Die einzigartige Auslegung des ReCoil® Mandrins ermöglicht die einfache Führung des Mandrins während des Verfahrens.



## EchoTip® ClearCore™

EUS BIOPSY NEEDLE

Die **EchoTip ClearCore EUS Biopsiekanüle** ist zur Verwendung mit einem Ultraschallendoskop für Feinnadelbiopsien (FNB) von submukösen und extramuralen Läsionen, mediastinalen Massen, Lymphknoten und intraperitonealen Massen im oder neben dem Magen-Darm-Trakt vorgesehen.

Die Kanüle ist mit zahlreichen Endoskopen kompatibel.<sup>2</sup>

Die Kanüle wird steril geliefert und ist ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt.

Bestellnummer	Referenznummer	Kanüle Gauge	Schleuse Fr	Ausfahrlänge der Kanüle cm	Schliff der Kanülenspitze	Minstdurchmesser des Arbeitskanals mm
G60992	ECHO-BX-22	22	5,3	0-8	Franseen	2,8

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Customer Support & Distribution. Beachten Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu).

Daten liegen vor:

1. D00527893, D00516367, D00516371, D00521988
2. D00527893, D00516367, D00516371
3. D00537459
4. Keehan E, Gergely L. Catheter and specialty needle alloys. Poster session presented at: Materials & Processes for Medical Devices Conference & Exposition; August 2009; Minneapolis, MN.
5. D00300922, D00527893, D00516367, D00516371, D00525720

### Customer Service

EU Website: [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu)  
 EDI: [cookmedical.eu/edi](http://cookmedical.eu/edi)  
 Distributors: +353 61239240, [ssc.distributors@cookmedical.com](mailto:ssc.distributors@cookmedical.com)  
 Austria: +43 179567121, [oe.orders@cookmedical.com](mailto:oe.orders@cookmedical.com)  
 Belgium: +32 27001702, [be.orders@cookmedical.com](mailto:be.orders@cookmedical.com)  
 Denmark: +45 38487607, [da.orders@cookmedical.com](mailto:da.orders@cookmedical.com)  
 Finland: +358 972519996, [fi.orders@cookmedical.com](mailto:fi.orders@cookmedical.com)  
 France: +33 171230269, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Germany: +49 6950072804, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 Hungary: +36 17779199, [hu.orders@cookmedical.com](mailto:hu.orders@cookmedical.com)  
 Iceland: +354 8007615, [IS.orders@cookmedical.com](mailto:IS.orders@cookmedical.com)  
 Ireland: +353 61239252, [ie.orders@cookmedical.com](mailto:ie.orders@cookmedical.com)  
 Italy: +39 0269682853, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Netherlands: +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto:nl.orders@cookmedical.com)  
 Norway: +47 23162968, [no.orders@cookmedical.com](mailto:no.orders@cookmedical.com)  
 Spain: +34 912702691, [es.orders@cookmedical.com](mailto:es.orders@cookmedical.com)  
 Sweden: +46 858769468, [se.orders@cookmedical.com](mailto:se.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - French: +41 448009609, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - Italian: +41 448009609, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - German: +41 448009609, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 United Kingdom: +44 2073654183, [uk.orders@cookmedical.com](mailto:uk.orders@cookmedical.com)

USA Website: [cookmedical.com](http://cookmedical.com)  
 EDI: [cookmedical.com/edi.do](http://cookmedical.com/edi.do)  
 Americas:  
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335  
 E-mail: [customersupport@cookmedical.com](mailto:customersupport@cookmedical.com)  
 Australia:  
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283  
 E-mail: [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)



AI, ESC, IR, OHNS, PI, RH, SUR-8.5X11