


# Misurazione diretta della pressione portale sotto guida EUS



**EchoTip Insight®**  
PORTOSYSTEMIC PRESSURE GRADIENT

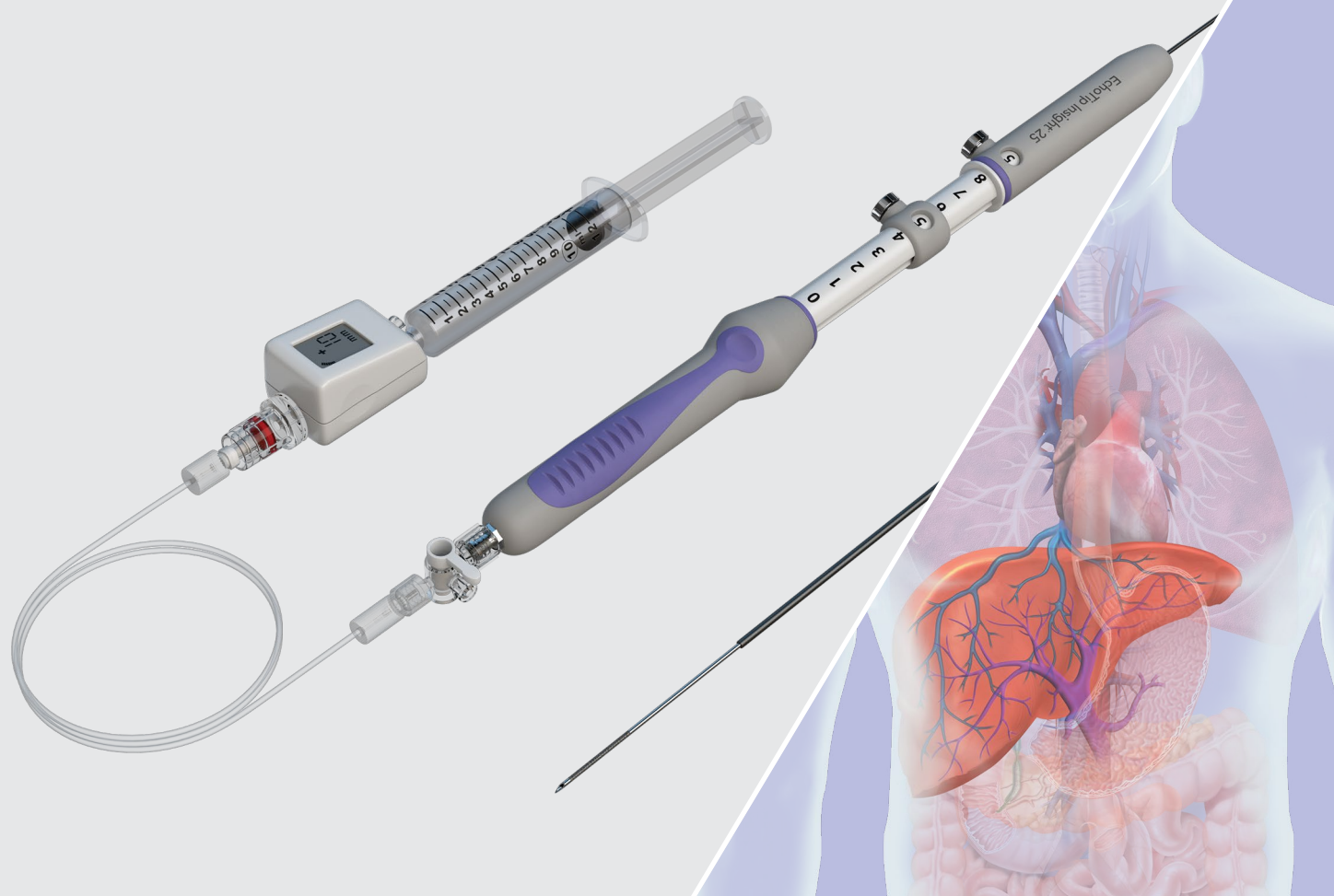


## EchoTip Insight®

PORTOSYSTEMIC PRESSURE GRADIENT

Ago EchoTip Insight: questo dispositivo viene utilizzato per accedere alle vene epatiche e porta o alle loro diramazioni, tramite un approccio transgastrico-transepatico oppure transduodenale-transepatico a livello del bulbo duodenale, attraverso il canale operativo di un ecoendoscopio, per consentire la misurazione diretta della pressione.

Tubo connettore: viene utilizzato per il trasferimento di liquidi tra i componenti del sistema EchoTip Insight.

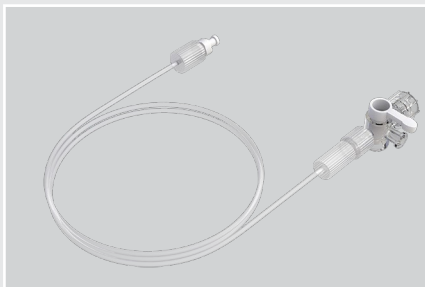


### Compass UniversalHG

- Display digitale per la lettura della pressione
- Trasduttore autocalibrante
- Dimensioni compatte

### Tubo connettore

- Tubo connettore della lunghezza di 90 cm

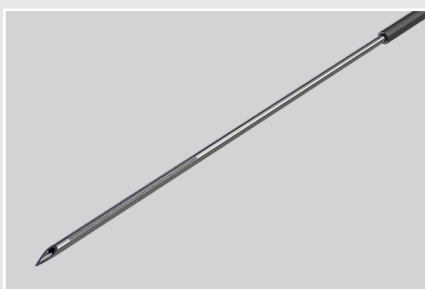

### Ago ecoendoscopico

- Punta ecogenica: per garantire che la punta dell'ago sia all'interno del target
- Ago di piccolo calibro (25 G): per agevolare l'accesso alle vene porta ed epatiche

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Calibro dell'ago	Guaina Fr	Lunghezza dell'estensione regolabile dell'ago cm	Lunghezza del tubo connettore cm	Intervallo di pressione mmHg	Diametro minimo del canale operativo mm
G58000	ECHO-PPG-I	25	5,2	8	90	da -199 a +999	2,8

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu).

### Customer Service

EU website: [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu)  
 EDI: [cookmedical.eu/edi](http://cookmedical.eu/edi)  
 Distributors: +353 61239240, [emea.distributors@cookmedical.com](mailto:emea.distributors@cookmedical.com)  
 Austria: +43 179567121, [oe.orders@cookmedical.com](mailto:oe.orders@cookmedical.com)  
 Belgium: +32 27001702, [be.orders@cookmedical.com](mailto:be.orders@cookmedical.com)  
 Denmark: +45 38487607, [da.orders@cookmedical.com](mailto:da.orders@cookmedical.com)  
 Finland: +358 972519996, [fi.orders@cookmedical.com](mailto:fi.orders@cookmedical.com)  
 France: +33 171230269, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Germany: +49 21612723770, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 Hungary: +36 17779199, [hu.orders@cookmedical.com](mailto:hu.orders@cookmedical.com)  
 Iceland: +354 8007615, [is.orders@cookmedical.com](mailto:is.orders@cookmedical.com)  
 Ireland: +353 61239252, [ie.orders@cookmedical.com](mailto:ie.orders@cookmedical.com)  
 Italy: +39 0269682853, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Netherlands: +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto:nl.orders@cookmedical.com)  
 Norway: +47 23162968, [no.orders@cookmedical.com](mailto:no.orders@cookmedical.com)  
 Spain: +34 912702691, [es.orders@cookmedical.com](mailto:es.orders@cookmedical.com)  
 Sweden: +46 858769468, [se.orders@cookmedical.com](mailto:se.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - French: +41 448009609, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - Italian: +41 448009609, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
 Switzerland - German: +41 448009609, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
 United Kingdom: +44 2073654183, [uk.orders@cookmedical.com](mailto:uk.orders@cookmedical.com)

USA website: [cookmedical.com](http://cookmedical.com)  
 EDI: [cookmedical.com/edi.do](http://cookmedical.com/edi.do)

Americas:  
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335  
 Email: [customersupport@cookmedical.com](mailto:customersupport@cookmedical.com)

Australia:  
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283  
 Email: [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)



AI, ESC, IR, PI-A4