


Resezione precisa e uniforme

Controllo degli angoli
e rimozione efficiente
dei polipi grazie alla
capacità di rotazione.

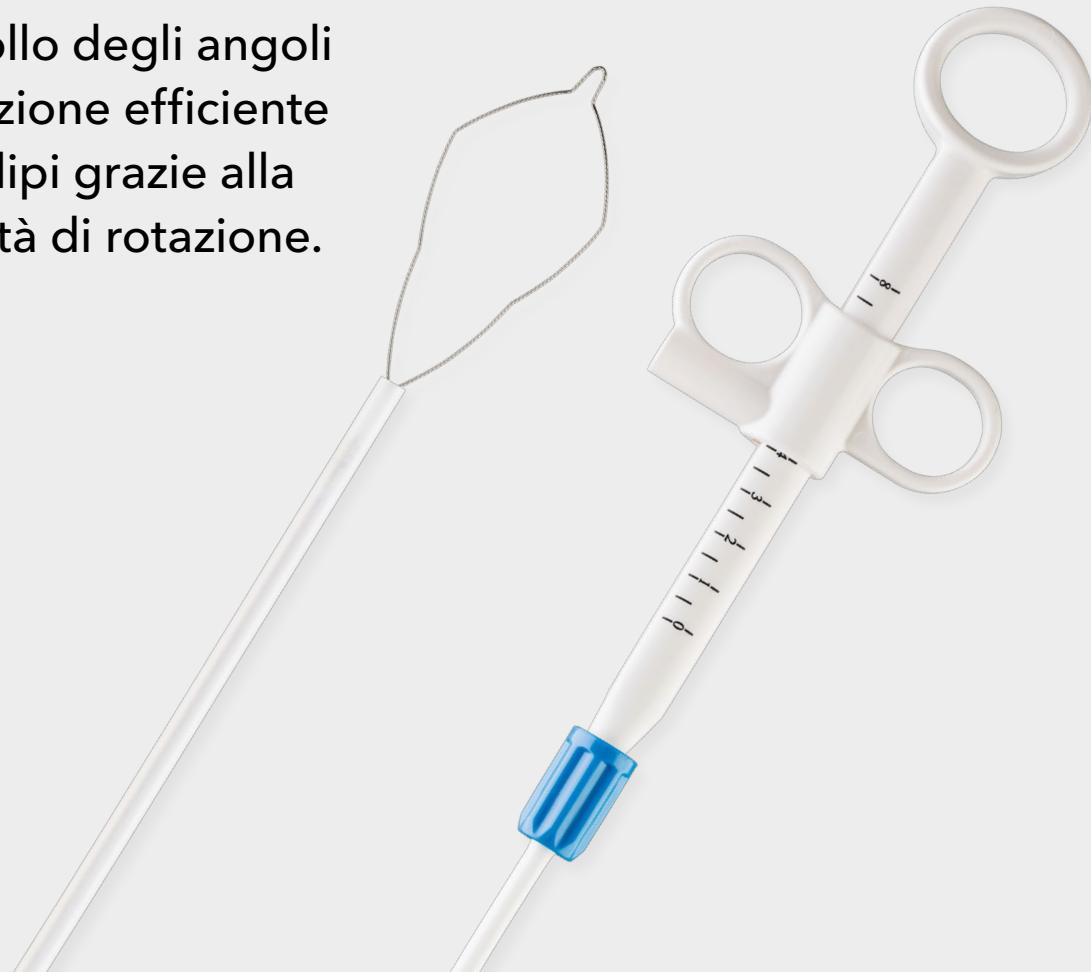

Cold AcuSnare®

POLYPECTOMY SNARE

Posizionamento preciso dell'ansa

La progettazione rotabile in due direzioni in tempo reale consente una resezione precisa ed efficiente dei polipi. L'impugnatura ergonomica e flessibile è progettata per ottimizzare la facilità d'uso e semplificare il flusso di lavoro.

Progettata per la polipectomia con ansa a freddo

Grazie alla sua capacità di resistere a forze di trazione o di stiramento elevate, l'ansa metallica consente di eseguire in modo sicuro una procedura di polipectomia con ansa a freddo controllata e precisa per polipi piccoli e molto piccoli.

Ansa metallica resistente al piegamento

L'ansa è costituita da filo multifilamento in acciaio inossidabile e resistente al piegamento, che consente di effettuare più di un taglio senza che l'ansa perda la sua forma.



Cold AcuSnare®

POLYPECTOMY SNARE

Pensata per la resezione endoscopica di polipi piccoli e molto piccoli all'interno del tratto gastrointestinale senza uso di energia diatermica.

- Sono disponibili varie specifiche di prodotto e vari modelli in grado di adattarsi a svariate esigenze cliniche.
- Il prodotto è fornito sterile ed è esclusivamente monouso.

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Diametro della guaina mm	Lunghezza utile cm	Dimensione dell'apertura dell'ansa mm	Diametro del filo di taglio mm	Quantità
G61206	CACS-10-025	2,4	230	10	0,25	10
G61204	CACS-10-030	2,4	230	10	0,30	10
G61207	CACS-15-025	2,4	230	15	0,25	10
G61205	CACS-15-030	2,4	230	15	0,30	10

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution.

Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle Istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 21612723770, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
 Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 Email: customersupport@cookmedical.com
 Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 Email: cau.custserv@cookmedical.com