

Consiga un buen cierre.

Rotación 1:1 para una colocación precisa y diseño con agarre de tejido que proporciona un cierre seguro



Instinct Plus[®]
ENDOSCOPIC CLIPPING DEVICE



El dispositivo de colocación de clips endoscópicos Instinct Plus, rediseñado para optimizar su funcionamiento y ofrecer una mejor respuesta en el manejo,¹ combina la fuerza con la sencillez del despliegue en un solo paso.



Fuerza y seguridad

- Clip con capacidad de retención fuerte¹
- Varias puntas de anclaje en el clip para facilitar el arrastre y la sujeción del tejido
- Clips reforzados con nitinol, una aleación superelástica con memoria de forma

Excelente respuesta en el manejo

- Clip con extensión ajustable y una apertura de hasta 16 mm de ancho
- Rotación 1:1 desde el mango hasta la punta
- Capacidad para abrirse y cerrarse hasta cinco veces para cambiar de posición

Versatilidad



- Compatibilidad con endoscopios de visión frontal y lateral
- Indicado para cerrar defectos y conseguir la hemostasia, así como para fijar sondas de alimentación yeyunal y stents esofágicos metálicos autoexpandibles (consulte más información en las indicaciones de uso completas)

1. Ponugoti PL, Rex DK. Clip retention rates and rates of residual polyp at the base of retained clips on colorectal EMR sites. *Gastrointest Endosc.* 2017;85(3):530-534.

«MR Conditional» (esto es, seguro bajo ciertas condiciones de la MRI)

Un paciente con este clip puede someterse inmediatamente y con seguridad a una exploración en un sistema de MRI que cumpla las siguientes condiciones:

- Campo magnético espacial de 3,0 o 1,5 T
- Gradiente de campo espacial máximo de 1900 G/cm (19 T/m)
- Promedio de índice de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés) de cuerpo entero máximo indicado por el sistema de MRI de 2,0 W/kg

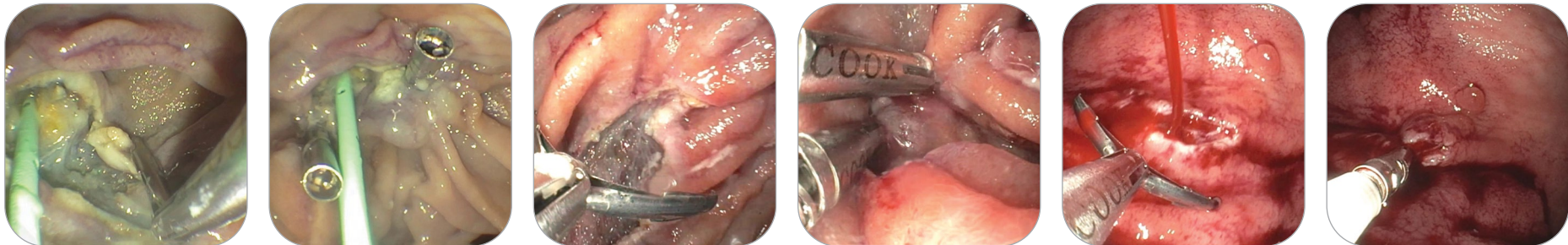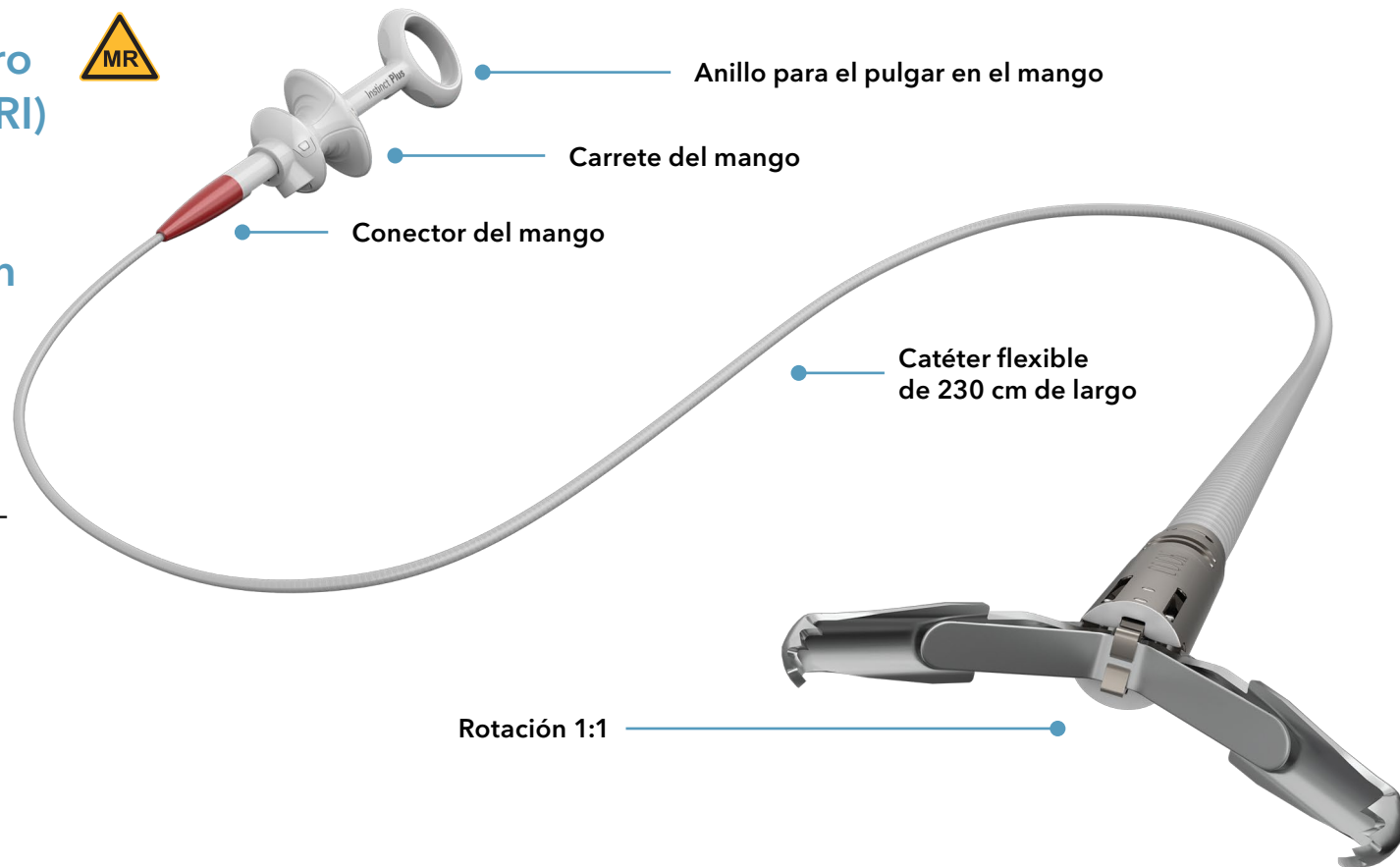

El dispositivo de colocación de clips endoscópicos Instinct Plus se coloca por vía endoscópica en el interior del tracto digestivo para aplicar presión mecánica al tejido y sirve para colocar clips endoscópicos en el interior del tracto digestivo con las siguientes finalidades:

- Marcado endoscópico
- Hemostasia para:
 - › Defectos en mucosas/ submucosas de menos de 3 cm
 - › Úlceras hemorrágicas
 - › Arterias de menos de 2 mm
- › Pólipos de menos de 1,5 cm de diámetro
- › Divertículos en el colon
- › Aplicación de clips profilácticos para reducir el riesgo de hemorragia tardía después de la resección de una lesión
- Anclaje para fijar sondas de alimentación yeyunal a la pared del intestino delgado
- Método complementario para cerrar perforaciones luminales del tracto digestivo de menos de 20 mm que puedan tratarse de forma conservadora
- Anclaje para fijar stents esofágicos metálicos autoexpandibles totalmente recubiertos a la pared del esófago en pacientes con fístulas, fugas, perforaciones o separaciones

Referencia	Referencia de producto	Ancho de apertura del clip mm	Catéter Fr	Longitud del catéter cm	Longitud del catéter cm	Estado respecto a la MRI	Diámetro mínimo del canal con visión frontal mm	Diámetro mínimo del canal con visión lateral mm
G5810	INSC-P-7-230-S	16	7	230	10	«MR Conditional» (esto es, seguro bajo ciertas condiciones de la MRI)	2,8	4,2

Siga atentamente todas las instrucciones paso a paso, incluida la información relativa a riesgos, datos técnicos, nombres de dispositivos e indicaciones que se facilita en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu. Tenga en cuenta que es posible que algunos productos o números de referencia no estén disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante de Cook.



Customer Service

EU website: cookmedical.eu

EDI: cookmedical.eu/edi

Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com

Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com

Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com

Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com

Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com

France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com

Germany: +49 2161 272 3770, de.orders@cookmedical.com

Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com

Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com

Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com

Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com

Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com

Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com

Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com

Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com

Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com

Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com

Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com

United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

Email: cau.custserv@cookmedical.com

AI, ESC, IR, PI-A4

