

La **flexibilidad** que le permitirá avanzar

Introductor

Flexor® Shuttle® SL

Introductor

Flexor® Shuttle Select®



Maniobrabilidad



Capacidad de empuje



Visibilidad



Utilizabilidad

Introdutores y vainas guía Flexor Shuttle: para orientarse con seguridad por vasculaturas difíciles de la arteria tibial y la arteria carótida.



1960

La historia de Cook Medical como referente en la innovación del acceso vascular se remonta a los años 60, cuando –en colaboración con una pareja de médicos– diseñó la primera vaina introductora: toda una revolución.



1991

En 1991, Cook presentó Flexor®, una vaina más larga de punta blanda y resistente al acodamiento que permitía acceder a una vasculatura más pequeña y más frágil para poder implantar dispositivos de forma segura.



Actualidad

Con el tiempo, esta tecnología tan importante se ha ido sofisticando y, a día de hoy, contamos con siete "familias" Flexor que incluyen una gran variedad de tamaños, longitudes y diseños.



Descubra más sobre la **historia de Flexor**

Nuestra tecnología Flexor se utiliza actualmente para aplicaciones aórticas y periféricas, entre las que se incluyen intervenciones carótidas, iliofemorales, radiales, renales, venosas e infrapoplíteas.

Los introductores Flexor Shuttle SL y Flexor Shuttle Select están diseñados para otorgar un acceso protegido al sistema vascular en procedimientos de implantación de dispositivos.

Estos dispositivos están disponibles en una gran variedad de tamaños, longitudes y configuraciones.

La mejor carta de presentación son sus innovadoras características, que le brindan la flexibilidad necesaria para acceder a cualquier estructura anatómica difícil.



Maniobrabilidad

- Vaina con punta redondeada y dilatador con punta cónica para facilitar la inserción en la estructura anatómica del paciente.
- Revestimiento hidrofílico AQ® para optimizar la lubricidad.



Capacidad de empuje

- Espiral de acero inoxidable incorporada en el material de la vaina para brindar resistencia al acodamiento.
- Varios durómetros de nailon a lo largo del portador de la vaina brindan capacidad de empuje en el extremo proximal y flexibilidad en el extremo distal.




Visibilidad

- Banda radiopaca incorporada en el interior del material de la vaina para identificar la ubicación precisa de la punta distal de la vaina a fin de aumentar la precisión de la colocación.



Utilizabilidad

- Luz de baja fricción, con revestimiento de PTFE para facilitar la implantación de dispositivos sin complicaciones.
- Válvula hemostática para reducir al mínimo las fugas (con adaptador Tuohy-Borst incluido).

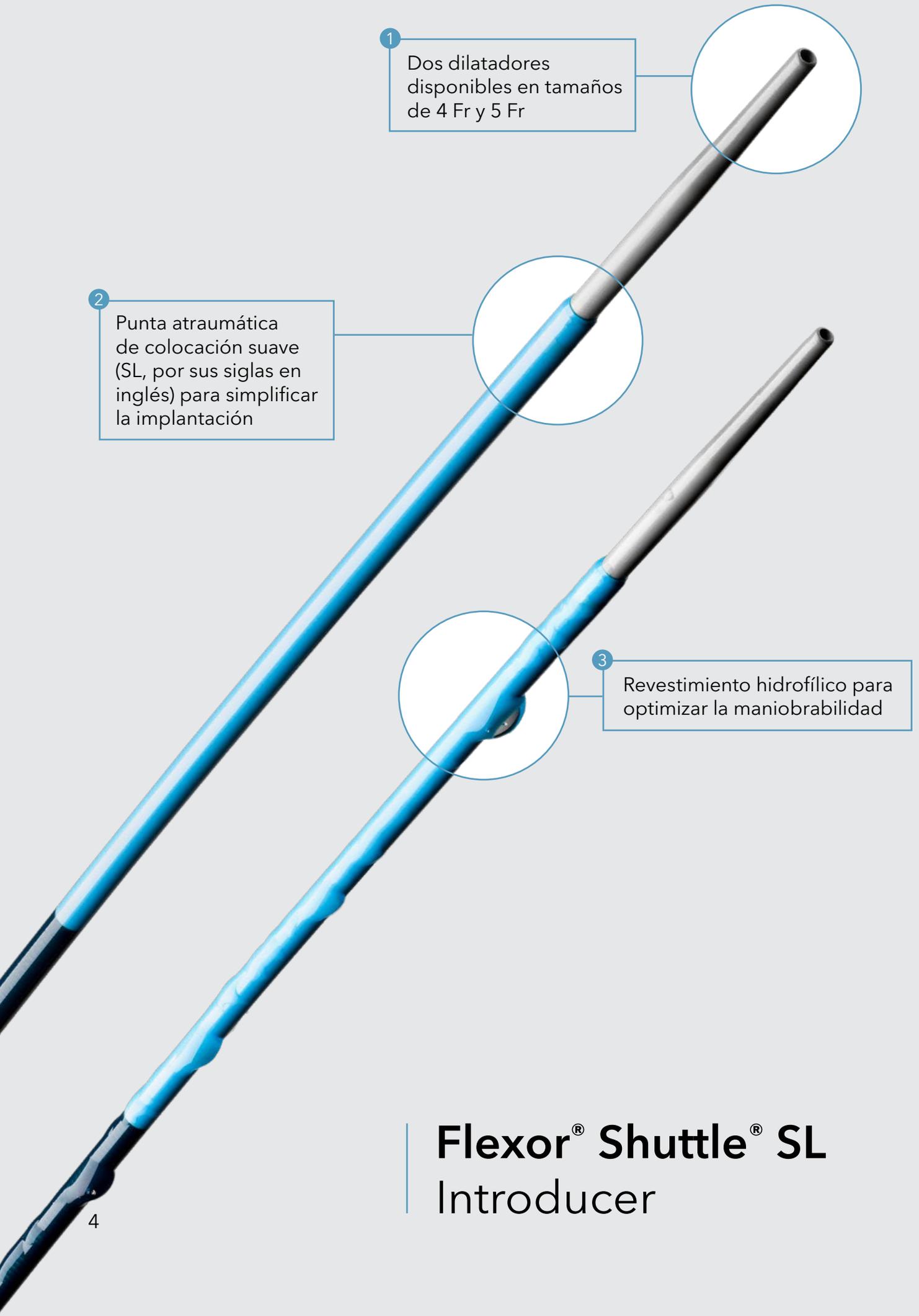

1 Dos dilatadores disponibles en tamaños de 4 Fr y 5 Fr

2 Punta atraumática de colocación suave (SL, por sus siglas en inglés) para simplificar la implantación

3 Revestimiento hidrofílico para optimizar la maniobrabilidad

4


Flexor[®] Shuttle[®] SL Introducer

Flexor® Shuttle® SL


Introducer

El introductor Flexor Shuttle SL otorga acceso por debajo de la rodilla para permitir la implantación de catéteres, balones u otros dispositivos.

- 1 Los tamaños de French más pequeños vienen con dos dilatadores compatibles con guías de 0,018 inch y 0,035 inch
- 2 El diseño de colocación suave (SL, por sus siglas en inglés) con punta atraumática reduce los traumatismos vasculares durante la implantación
- 3 El revestimiento hidrofílico AQ en los 25 cm distales proporciona una superficie lubricada para optimizar la maniobrabilidad.

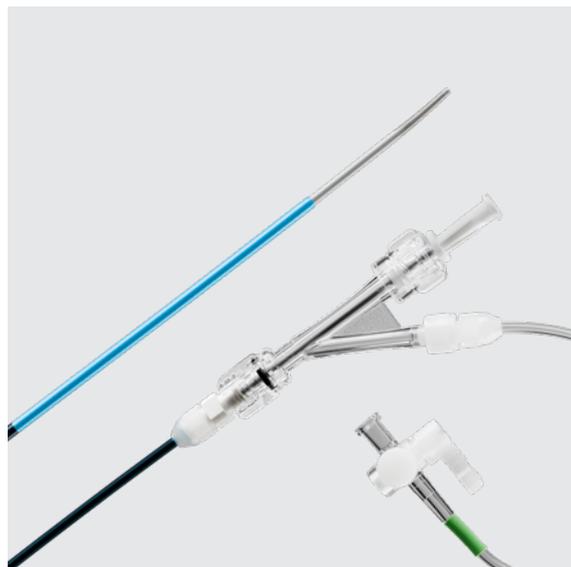

Referencia	Referencia de producto	Fr	Longitud cm	Acepta diámetro de guía inch
Flexor® Shuttle® SL				
G48190	KSAW-4.0-18/35-90-RB-SHTL-HC	4	90	0,018/0,035
G48193	KSAW-4.0-18/35-110-RB-SHTL-HC	4	110	0,018/0,035
G30009	KSAW-5.0-18/38-90-RB-SHTL-HC	5	90	0,018/0,038
G48194	KSAW-5.0-18/38-110-RB-SHTL-HC	5	110	0,018/0,038
G13539	KSAW-6.0-38-80-RB-SHTL-HC	6	80	0,038
G13264	KSAW-6.0-38-90-RB-SHTL-HC	6	90	0,038
G50141	KSAW-6.0-38-110-RB-SHTL-HC	6	110	0,038
G13338	KSAW-7.0-38-80-RB-SHTL-HC	7	80	0,038
G12835	KSAW-7.0-38-90-RB-SHTL-HC	7	90	0,038
G12836	KSAW-8.0-38-90-RB-SHTL-HC	8	90	0,038

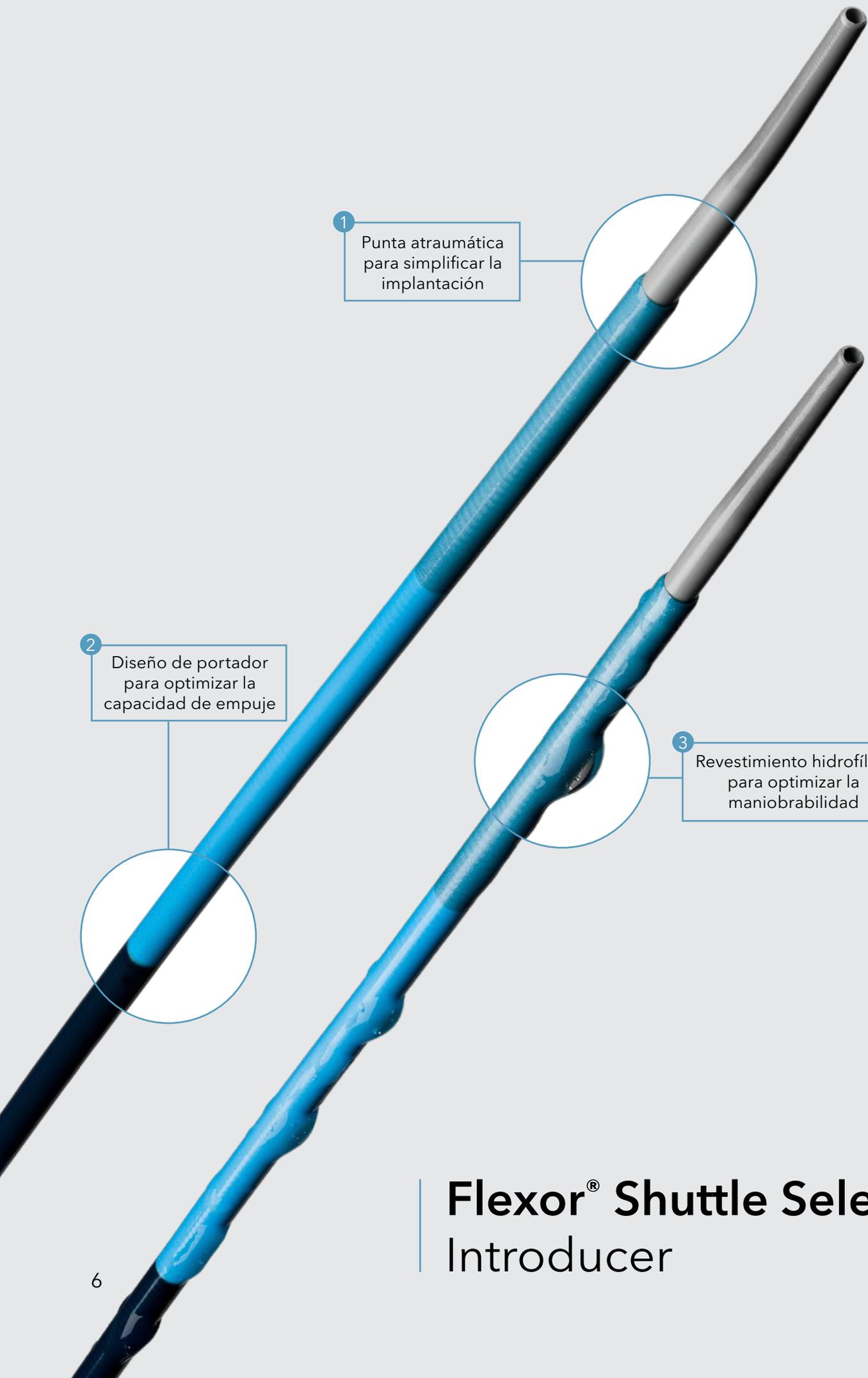

1 Punta atraumática para simplificar la implantación

2 Diseño de portador para optimizar la capacidad de empuje

3 Revestimiento hidrofílico para optimizar la maniobrabilidad


Flexor® Shuttle Select® Introducer

Flexor® Shuttle Select®

Introducer

Flexor Shuttle Select está diseñado para simplificar el acceso a estructuras anatómicas arqueadas que planteen alguna dificultad.


- 1 El diseño de colocación suave (SL, por sus siglas en inglés) con punta atraumática reduce los traumatismos vasculares durante la implantación
- 2 El diseño rígido del portador proximal brinda una capacidad de empuje superior y un mejor soporte de los dispositivos.
- 3 El revestimiento hidrofílico AQ en los 25 cm distales proporciona una superficie lubricada para optimizar la maniobrabilidad.

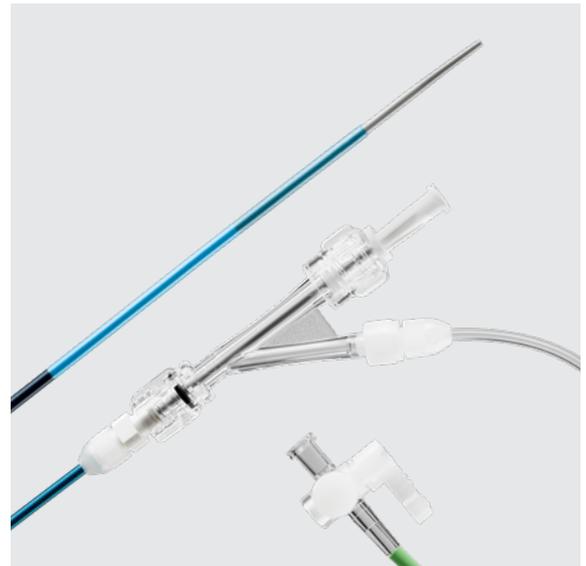


Referencia	Referencia de producto	Fr	Longitud cm	Acepta diámetro de guía inch
Flexor® Shuttle Select®				
G31133	KSAW-5.0-38-90-RB-SHTL-FLEX-HC	5	90	0,038
G31138	KSAW-6.0-38-90-RB-SHTL-FLEX-HC	6	90	0,038

Zonas del durómetro

Flexor® Shuttle® SL Introducer

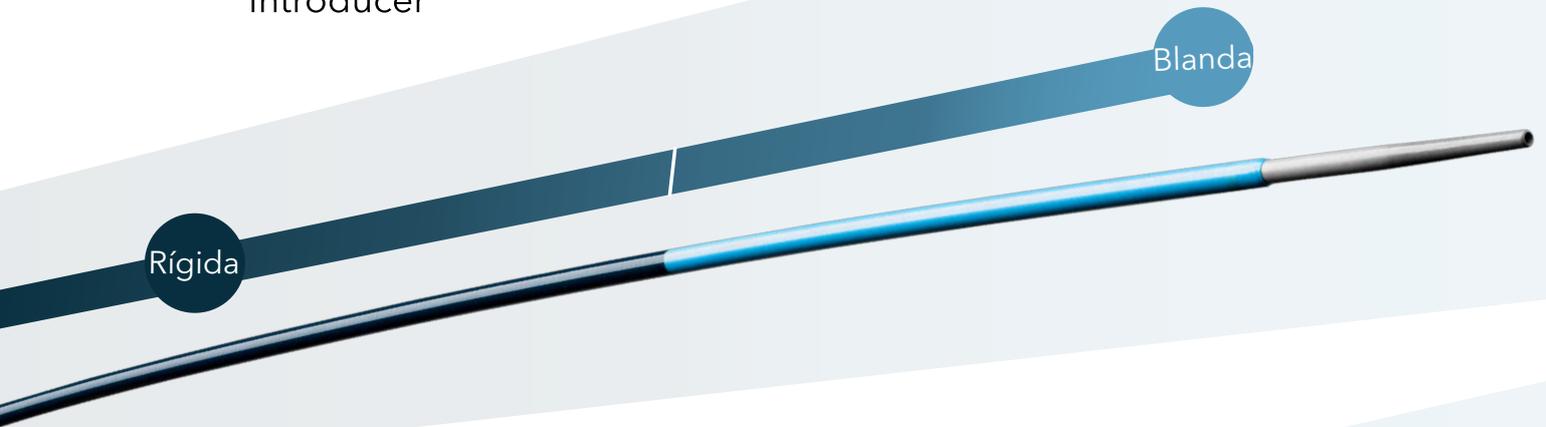

Flexor® Shuttle Select® Introducer

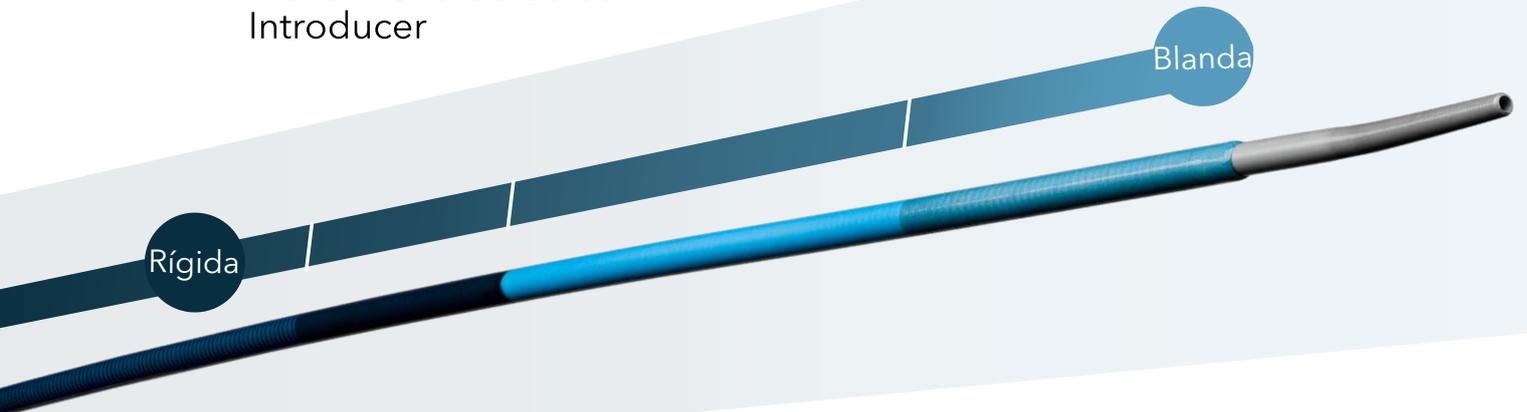

Para obtener más información,
póngase en contacto con su
representante local de Cook Medical.



Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4