

La **flessibilità** necessaria per le vostre procedure

Flexor® Shuttle® SL
Introduttore

Flexor® Shuttle Select®
Introduttore



Trackability



Capacità
di spinta



Visibilità



Semplicità d'uso

COOK®
MEDICAL

Esplorazione sicura del complicato sistema vascolare delle arterie tibiali e carotidee grazie agli introduttori e alle guaine di introduzione Flexor Shuttle.



1960

La storia di Cook Medical sull'innovazione dell'accesso vascolare risale agli anni '60, quando collaborammo con una coppia di medici per sperimentare la prima guaina di introduzione.



1991

Nel 1991, Cook lanciò Flexor: un introduttore più lungo, resistente agli attorcigliamenti e dalla punta morbida, che permise di accedere a vasi più piccoli e fragili e facilitare l'introduzione dei dispositivi.



Oggi

Questo prodotto tecnologico essenziale si è evoluto nel tempo e oggi offriamo sette gruppi di prodotti Flexor in un'ampia gamma di dimensioni, lunghezze e progettazioni.



Maggiori informazioni sulla **storia di Flexor**

La nostra tecnologia Flexor è attualmente utilizzata per applicazioni aortiche e periferiche, compresi gli interventi carotidei, iliaco-femorali, radiali, renali, venosi e infra-poplitei.

Gli introduttori Flexor Shuttle SL e Flexor Shuttle Select sono progettati per aiutare a stabilire un percorso protetto per il trasporto di altri dispositivi all'interno del sistema vascolare.

Questi dispositivi sono disponibili in una varietà di dimensioni, lunghezze e configurazioni.

Le eccellenti caratteristiche innovative consentono di ottenere la flessibilità necessaria per avere accesso ad anatomie complicate.



Capacità di avanzamento

- Punta dell'introduttore arrotondata e punta del dilatatore rastremata per facilitare l'inserimento nell'anatomia del paziente.
- Rivestimento idrofilo AQ® per migliorare la scorrevolezza.



Capacità di spinta

- Spirale in acciaio inossidabile incorporata nel materiale dell'introduttore per la resistenza all'attorcigliamento.
- Molteplici zone a diverse rigidità del nylon lungo il corpo dell'introduttore forniscono capacità di spinta sull'estremità prossimale e flessibilità sull'estremità distale.




Visibilità

- La banda radiopaca, incorporata nel materiale dell'introduttore, consente di garantire la precisione della posizione della punta distale dell'introduttore e un posizionamento accurato.



Semplicità d'uso

- Il lume rivestito in PTFE ad attrito ridotto facilita l'inserimento senza ostacoli del dispositivo.
- Valvola emostatica per ridurre al minimo le perdite (con adattatore Tuohy-Borst incluso).

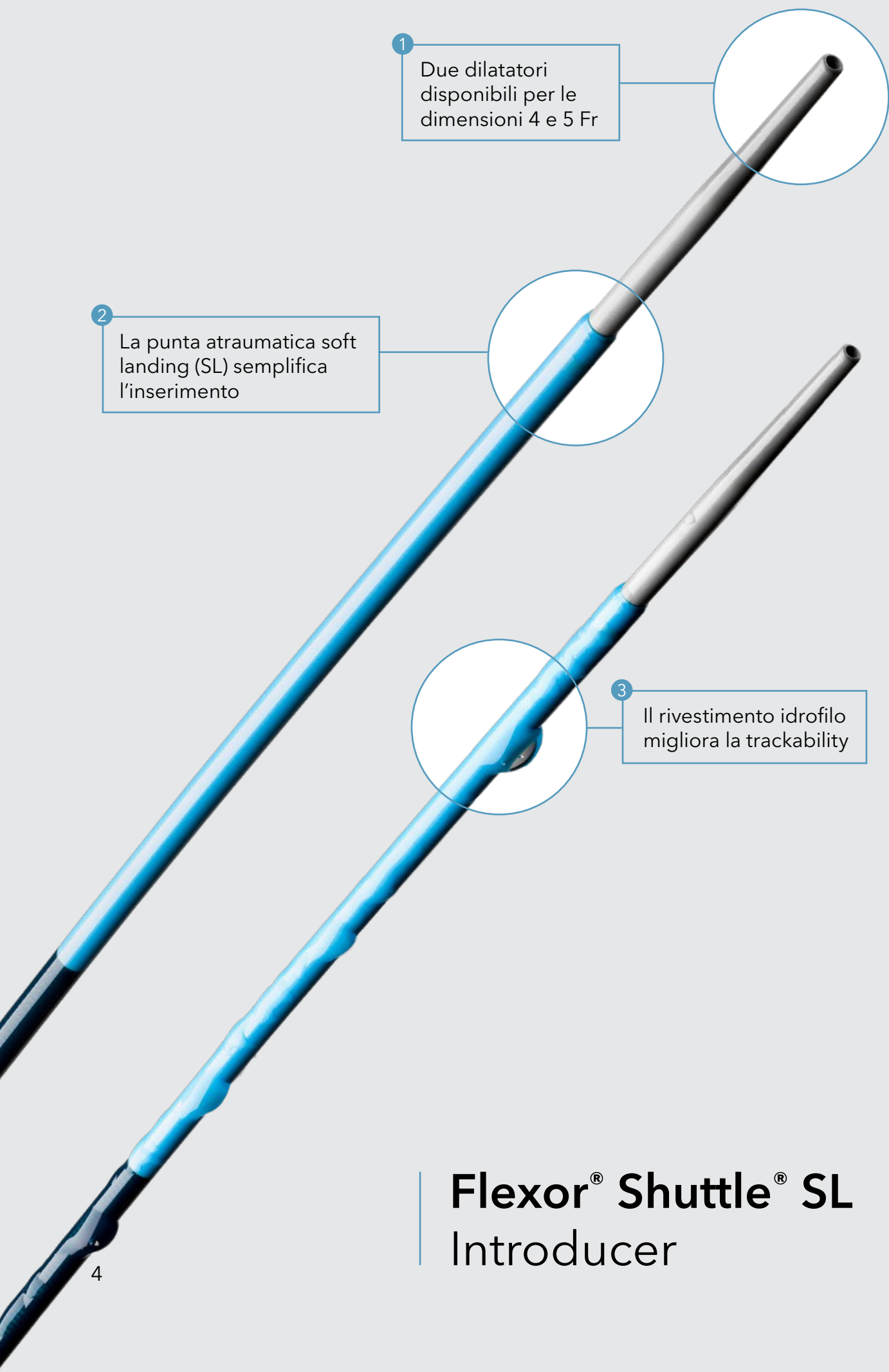

1
Due dilatatori
disponibili per le
dimensioni 4 e 5 Fr

2
La punta atraumatica soft
landing (SL) semplifica
l'inserimento

3
Il rivestimento idrofilo
migliora la trackability

4


Flexor[®] Shuttle[®] SL Introducer

Flexor® Shuttle® SL


Introducer

L'introduttore Flexor Shuttle SL fornisce un accesso al di sotto del ginocchio per l'introduzione di cateteri, palloncini o altri dispositivi.

- 1 Le versioni con dimensioni French inferiori sono dotate di due dilatatori, che consentono la compatibilità con guide da 0,018 inch e 0,035 inch
- 2 La punta atraumatica soft landing (SL) riduce il trauma ai vasi durante l'impiego
- 3 Il rivestimento idrofilo AQ® sui 25 cm distali fornisce una superficie scorrevole per una maggiore trackability

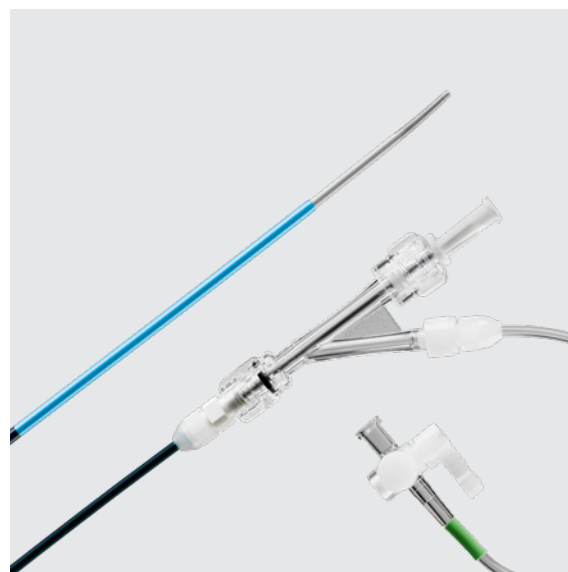

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Fr	Lunghezza cm	Diametro delle guide compatibili inch
Flexor® Shuttle® SL				
G48190	KSAW-4.0-18/35-90-RB-SHTL-HC	4	90	0,018/0,035
G48193	KSAW-4.0-18/35-110-RB-SHTL-HC	4	110	0,018/0,035
G30009	KSAW-5.0-18/38-90-RB-SHTL-HC	5	90	0,018/0,038
G48194	KSAW-5.0-18/38-110-RB-SHTL-HC	5	110	0,018/0,038
G13539	KSAW-6.0-38-80-RB-SHTL-HC	6	80	0,038
G13264	KSAW-6.0-38-90-RB-SHTL-HC	6	90	0,038
G50141	KSAW-6.0-38-110-RB-SHTL-HC	6	110	0,038
G13338	KSAW-7.0-38-80-RB-SHTL-HC	7	80	0,038
G12835	KSAW-7.0-38-90-RB-SHTL-HC	7	90	0,038
G12836	KSAW-8.0-38-90-RB-SHTL-HC	8	90	0,038

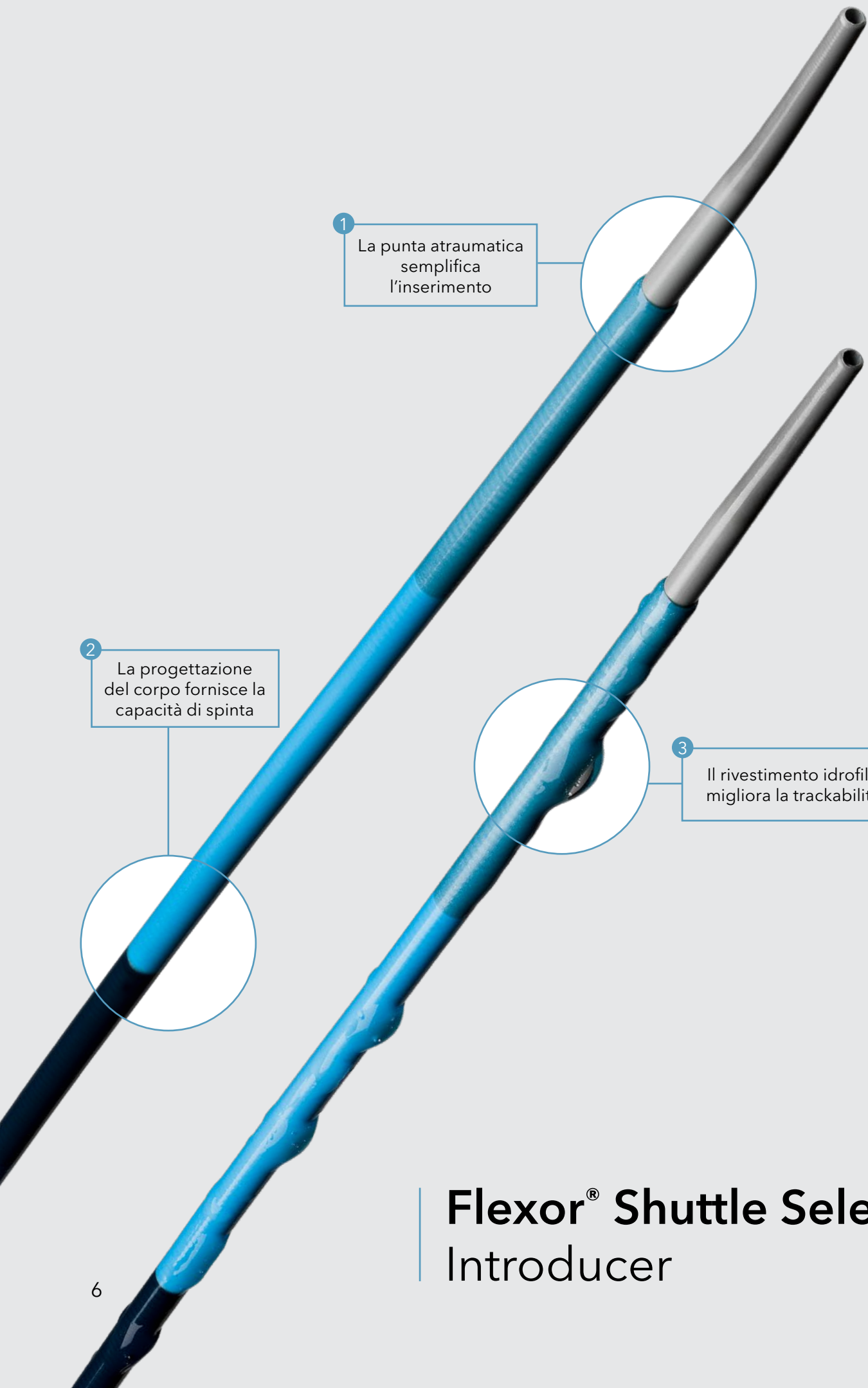

1 La punta atraumatica
semplifica
l'inserimento

2 La progettazione
del corpo fornisce la
capacità di spinta

3 Il rivestimento idrofilo
migliora la trackability


Flexor[®] Shuttle Select[®] Introducer

Flexor® Shuttle Select®

Introducer

Flexor Shuttle Select è progettato per semplificare l'accesso in complicate anatomie arcuate.

- 1 La punta atraumatica soft landing (SL) riduce il trauma ai vasi durante l'impiego
- 2 La rigidità del corpo prossimale conferisce superiori capacità di spinta e di supporto per i dispositivi
- 3 Il rivestimento idrofilo AQ® sui 25 cm distali fornisce una superficie scorrevole per una maggiore trackability

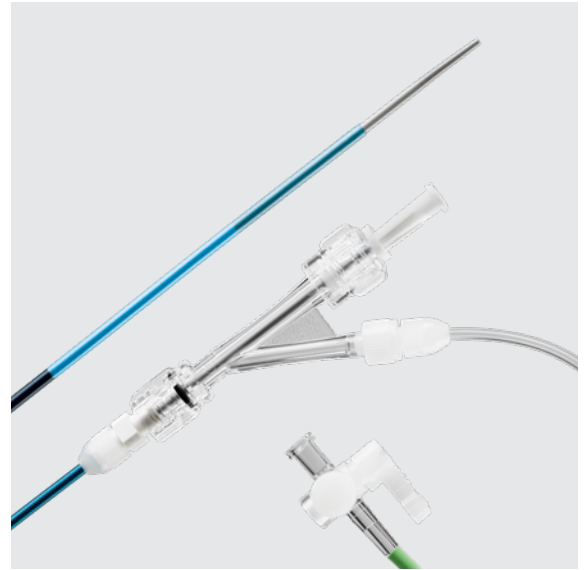

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Fr	Lunghezza cm	Diametro delle guide compatibili inch
Flexor® Shuttle Select®				
G31133	KSAW-5.0-38-90-RB-SHTL-FLEX-HC	5	90	0,038
G31138	KSAW-6.0-38-90-RB-SHTL-FLEX-HC	6	90	0,038

Zone di rigidità

Flexor® Shuttle® SL Introducer

Rigido

Morbido

Flexor® Shuttle Select® Introducer

Rigido

Morbido

Per maggiori informazioni,
rivolgersi al rappresentante
Cook Medical di riferimento.



Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4