

Elastyczność niezbędna, by iść naprzód

Flexor® Shuttle® SL

Introducer

Flexor® Shuttle Select®

Introducer



Przesuwalność



Łatwość
wprowadzania



Widoczność



Użyteczność

COOK®
MEDICAL

Pewnie poruszaj się w wymagającym układzie naczyniowym tętnic piszczelowych i szyjnych, korzystając z introduktorów i koszulek prowadzących Flexor Shuttle.



1960

Doświadczenie firmy Cook Medical w dziedzinie innowacyjnego dostępu naczyniowego sięga lat 60., kiedy to we współpracy z lekarzami jako pierwsi zaproponowaliśmy koszulki wprowadzające.



1991

W 1991 roku firma Cook zaprezentowała introduktor Flexor – dłuższą, odporną na zapętlenie koszulkę z miękką końcówką, która umożliwiała dostęp do mniejszych, delikatniejszych naczyń, aby sprostać wyzwaniom związanym z wprowadzeniem przyrządów.



Dziś

Z czasem ta podstawowa technologia ewoluowała i obecnie oferujemy siedem „rodzin” produktów Flexor w szerokiej gamie rozmiarów, długości i konstrukcji.



Dowiedz się więcej o **historii** produktów Flexor

Nasza technologia Flexor jest obecnie stosowana w aorcie i naczyniach obwodowych, w tym w zabiegach w obrębie naczyń szyjnych, biodrowo-udowych, promieniowych, nerkowych, żylnych oraz podkolanowych.

Introduktry Flexor Shuttle SL i Flexor Shuttle Select umożliwiają utworzenie zabezpieczonej drogi do wprowadzenia innych przyrządów do układu naczyniowego.

Wyroby te są dostępne w różnych rozmiarach, długościach i konfiguracjach.

Oto innowacyjne cechy, którymi się wyróżniają i które zapewniają wyjątkową elastyczność niezbędną przy uzyskiwaniu dostępu do wymagających struktur anatomicznych.



Przesuwalność

- Zaokrąglone końcówki koszulki i rozszerzadła stożkowego ułatwiają wprowadzenie w struktury anatomiczne pacjenta.
- Powłoka hydrofilna AQ® zwiększa poślizg.



Łatwość wprowadzania

- Wbudowany w materiał koszulki zwój ze stali nierdzewnej zapewnia odporność na zapętlenie.
- Strefy nylonu o różnej twardości umieszczone wzdłuż trzonu koszulki zapewniają łatwość wprowadzania końcówki proksymalnej i elastyczność końcówki dystalnej.




Widoczność

- Cieniodajny pasek wbudowany w materiał koszulki umożliwia precyzyjne lokalizowanie końcówki dystalnej koszulki i dokładne pozycjonowanie.



Użyteczność

- Kanał z powłoką PTFE, o niskim współczynniku tarcia, umożliwia bezproblemowe wprowadzanie przyrządów.
- Zastawka hemostatyczna (z dołączonym łącznikiem Tuohy-Borst) minimalizuje ryzyko wycieku.

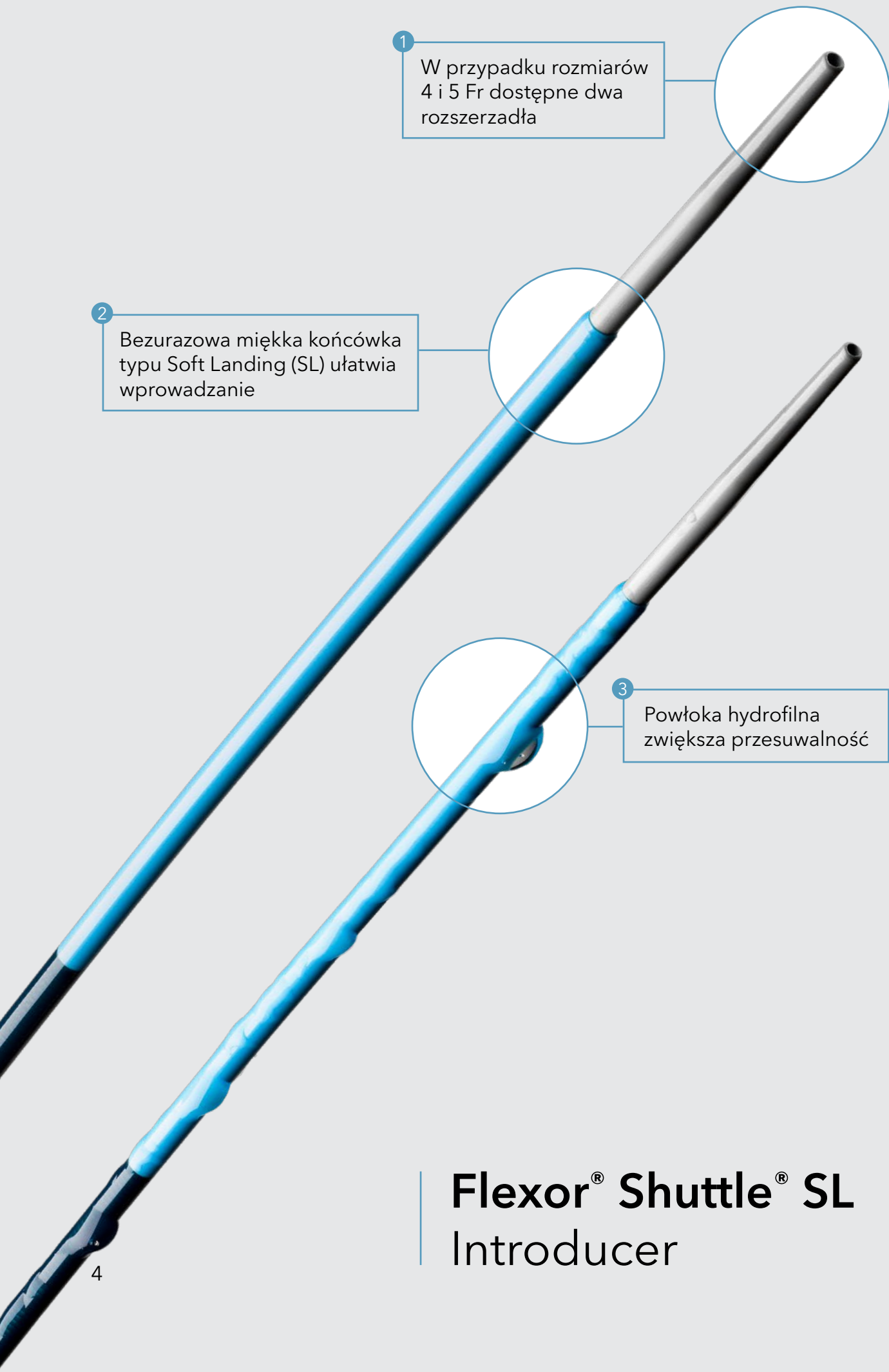

1 W przypadku rozmiarów 4 i 5 Fr dostępne dwa rozszerzadła

2 Bezurazowa miękka końcówka typu Soft Landing (SL) ułatwia wprowadzanie

3 Powłoka hydrofilna zwiększa przesuwalność


Flexor® Shuttle® SL Introducer

Flexor® Shuttle® SL


Introducer

Introduktor Flexor Shuttle SL pozwala uzyskać dostęp podkolanowy na potrzeby wprowadzania cewników, balonów lub innych przyrządów.

- 1 W przypadku mniejszych rozmiarów w skali French dostarczane są dwa rozszerzadła, co zapewnia kompatybilność z przewodnikami 0,018 inch i 0,035 inch
- 2 Konstrukcja bezurazowej miękkiej końcówki typu Soft Landing (SL) ogranicza urazy naczyń w trakcie przesuwania wyrobu
- 3 Powłoka hydrofilna AQ® na dystalnym odcinku 25 cm zapewnia śliską powierzchnię w celu zwiększenia przesuwalności

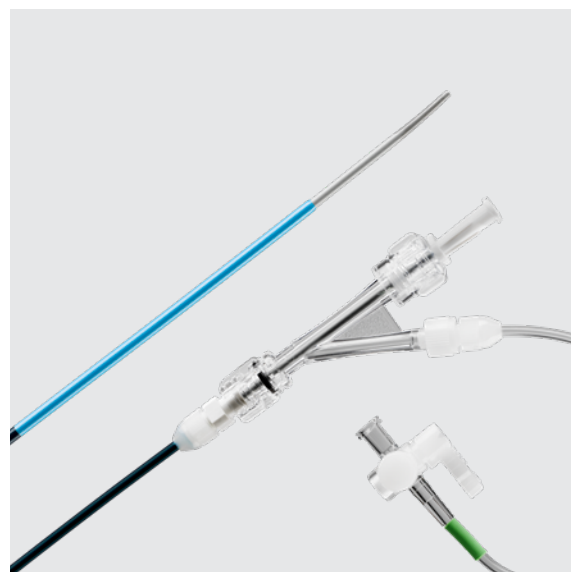

Numer katalogowy	Numer referencyjny części	Rozmiar Fr	Długość cm	Współpracuje z przewodnikiem o średnicy inch
Flexor® Shuttle® SL				
G48190	KSAW-4.0-18/35-90-RB-SHTL-HC	4	90	0,018/0,035
G48193	KSAW-4.0-18/35-110-RB-SHTL-HC	4	110	0,018/0,035
G30009	KSAW-5.0-18/38-90-RB-SHTL-HC	5	90	0,018/0,038
G48194	KSAW-5.0-18/38-110-RB-SHTL-HC	5	110	0,018/0,038
G13539	KSAW-6.0-38-80-RB-SHTL-HC	6	80	0,038
G13264	KSAW-6.0-38-90-RB-SHTL-HC	6	90	0,038
G50141	KSAW-6.0-38-110-RB-SHTL-HC	6	110	0,038
G13338	KSAW-7.0-38-80-RB-SHTL-HC	7	80	0,038
G12835	KSAW-7.0-38-90-RB-SHTL-HC	7	90	0,038
G12836	KSAW-8.0-38-90-RB-SHTL-HC	8	90	0,038

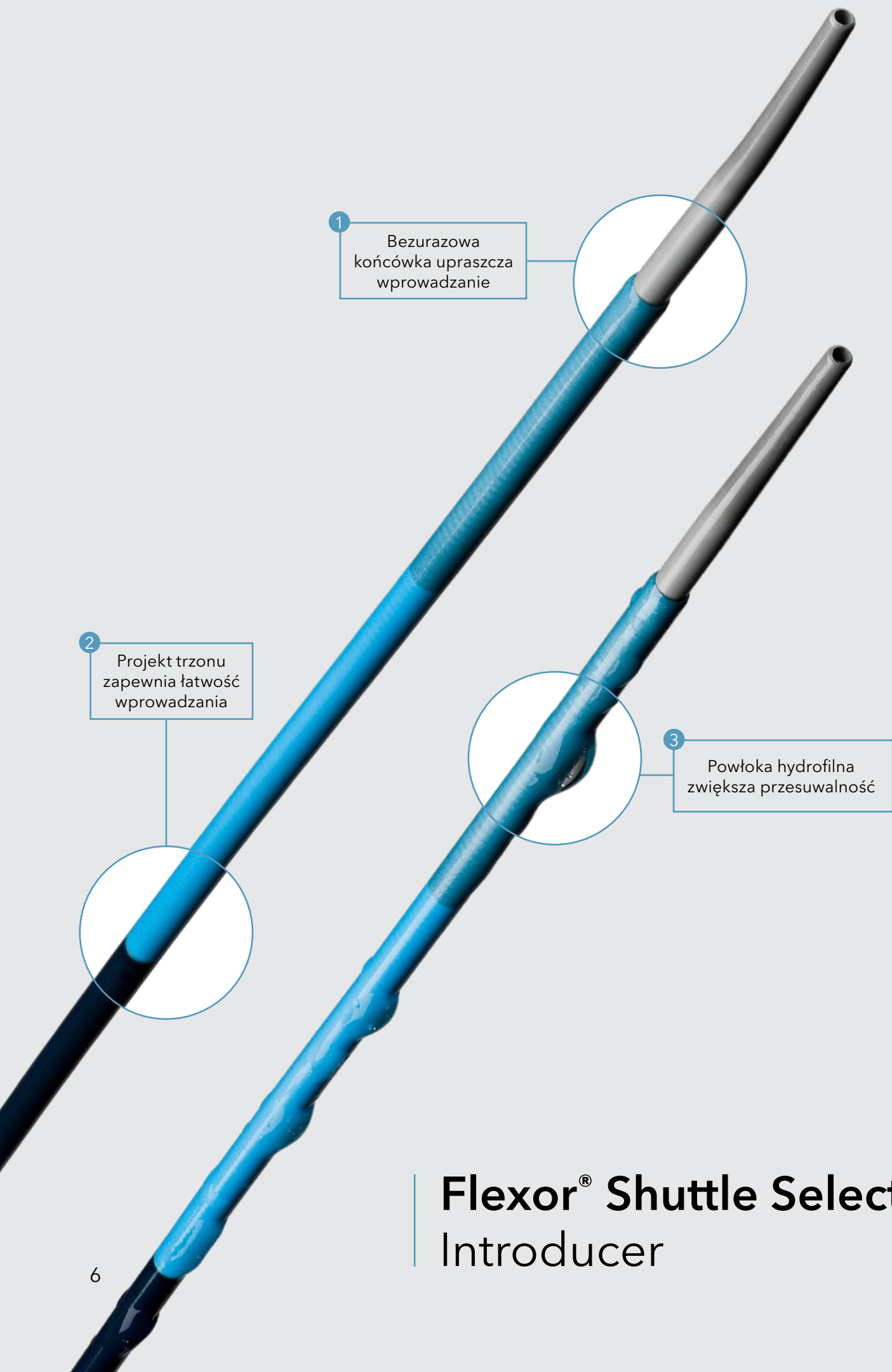

1 Bezurazowa
końcówka upraszcza
wprowadzanie

2 Projekt trzonu
zapewnia łatwość
wprowadzania

3 Powłoka hydrofilna
zwiększa przesuwalność


Flexor[®] Shuttle Select[®] Introducer

Flexor® Shuttle Select®

Introducer

Introduktor Flexor Shuttle Select zaprojektowano tak, aby ułatwić dostęp podczas trudnych interwencji naczyniowych w obrębie łuku aorty.

- 1 Konstrukcja bezurazowej miękkiej końcówki typu Soft Landing (SL) ogranicza urazy naczyń w trakcie przesuwania wyrobu
- 2 Konstrukcja sztywnego trzonu proksymalnego zapewnia wyjątkową łatwość wprowadzania i oparcie dla przesuwanych przyrządów
- 3 Powłoka hydrofilna AQ® na dystalnym odcinku 25 cm zapewnia śliską powierzchnię w celu zwiększenia przesuwalności

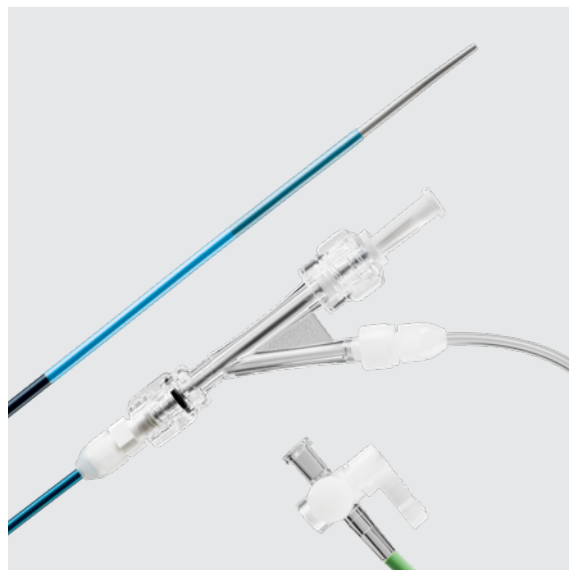

Numer katalogowy	Numer referencyjny części	Rozmiar Fr	Długość cm	Współpracuje z przewodnikiem o średnicy inch
Flexor® Shuttle Select®				
G31133	KSAW-5.0-38-90-RB-SHTL-FLEX-HC	5	90	0,038
G31138	KSAW-6.0-38-90-RB-SHTL-FLEX-HC	6	90	0,038

Strefy twardości

Flexor® Shuttle® SL Introducer

Sztywna

Miękka

Flexor® Shuttle Select® Introducer

Sztywna

Miękka

Aby dowiedzieć się więcej,
należy skontaktować się
z lokalnym przedstawicielem
firmy Cook Medical.



Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4