


Precisione durante l'accesso al di sotto del ginocchio.

Prestazioni idrofile uniformi, controllo del corpo di supporto e visibilità distale per agevolare l'esplorazione sicura delle tortuose strutture anatomiche periferiche.

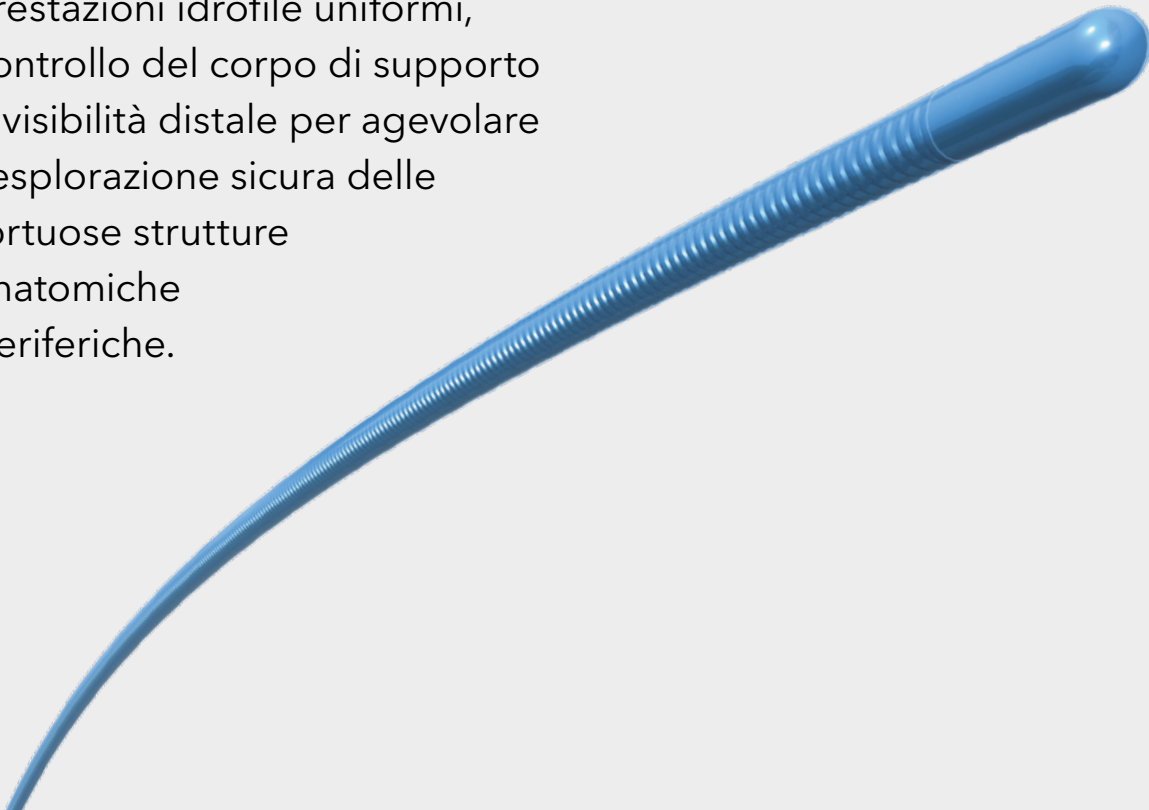

Approach[®] Hydro ST

HYDROPHILIC MICRO WIRE GUIDE

Progettazione specifica per la trackability in regioni periferiche


La struttura a rastrematura corta e il segmento distale idrofilo sono ottimizzati per agevolare l'avanzamento e mantenere la capacità di spinta e la trackability anche nei vasi periferici più piccoli.

Visibilità per un preciso controllo della guida

La microspirale distale in platino consente di migliorare la visualizzazione della punta, in modo che la guida possa essere monitorata con sicurezza e spostata in modo controllato durante le complesse procedure di interventistica periferica.

Supporto in corrispondenza dell'accesso distale

Un corpo di sostegno in acciaio inossidabile fornisce la stabilità necessaria per far avanzare agevolmente i cateteri di supporto all'interno dei vasi periferici, anche nelle complicate strutture anatomiche al di sotto del ginocchio.

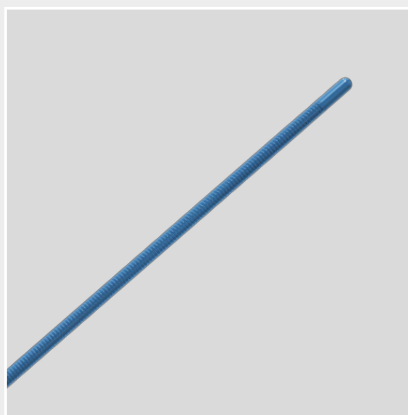

Approach® Hydro ST

HYDROPHILIC MICRO WIRE GUIDE

La microguida idrofila Approach Hydro ST facilita l'inserimento dei dispositivi all'interno del sistema vascolare periferico.

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Diametro della guida inch	Lunghezza della guida cm
G52937	HMW-14-135-ST	0,014	135
G52938	HMW-14-190-ST	0,014	190
G52939	HMW-14-300-ST	0,014	300

Attenersi scrupolosamente a tutte le istruzioni dettagliate, comprese le informazioni sui rischi, le informazioni tecniche, il nome del dispositivo e l'uso previsto, come indicato nelle Istruzioni per l'uso (IFU) disponibili su cookmedical.eu. Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori dettagli, rivolgersi al rappresentante Cook.

I seguenti prodotti sono compatibili con la microguida Approach Hydro ST.

ACCESS

Micropuncture®

Set con introduttore

Micropuncture

Set di accesso pedidio

TARGET

CXI®

Catetere di supporto

Guaina di introduzione Flexor® Ansel
con dilatatore High-Flex

TREAT

Advance® 14LP

Catetere a palloncino per
PTA a basso profilo

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 2161 272 3770, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
Email: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, PI-A4