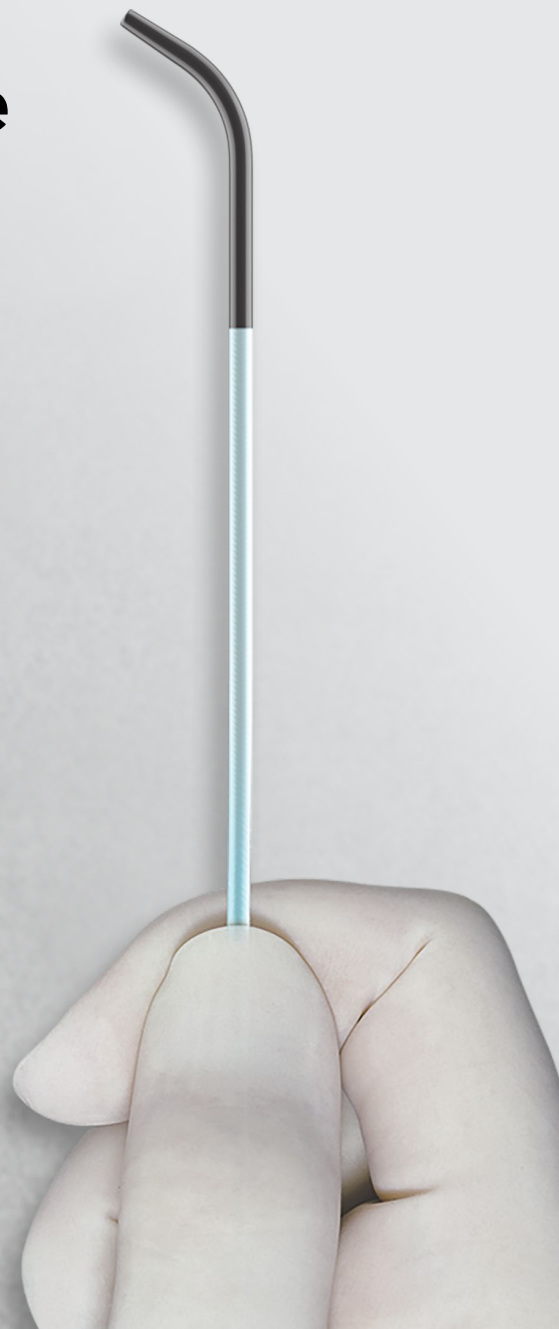
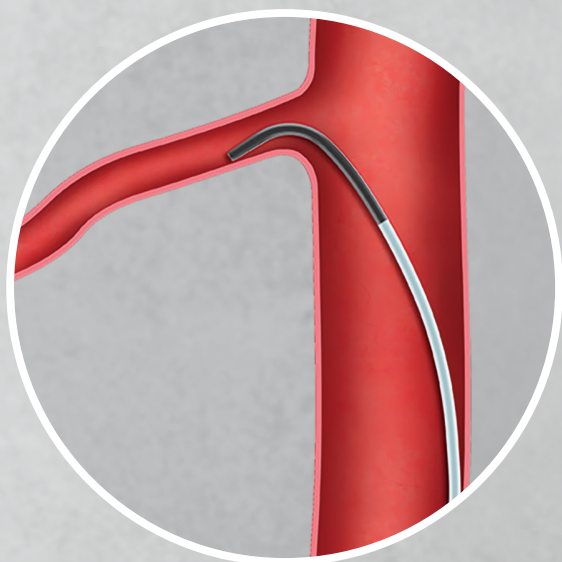


VISIBILIDAD | CAPACIDAD DE GIRO | MANIOBRABILIDAD

**El control que se siente.
La navegación en la que
puede confiar.**



Beacon[®] Tip
ANGIOGRAPHIC CATHETER





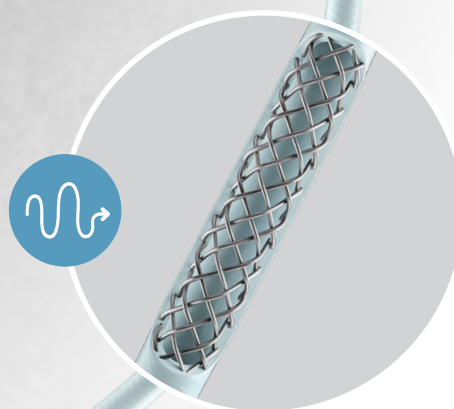
Visibilidad

Brilla bajo fluoroscopia



Capacidad de giro

Selección de vasos controlada



Maniobrabilidad

Navegue por una estructura anatómica tortuosa

Visibilidad

Tecnología de punta radiopaca para garantizar la visibilidad durante la manipulación del catéter

Capacidad de giro

Respuesta de torque de aproximadamente 1:1 para facilitar la selección del vaso deseado

Maniobrabilidad

Estructura de nailon con trenzado de acero inoxidable en el portador para navegar por una estructura anatómica tortuosa

Diseñados para proteger

Los catéteres se envuelven en aluminio para proteger la integridad del material del catéter.


- Las pruebas realizadas muestran que estos catéteres son menos susceptibles a que se separe la punta que los de la competencia.
- El embalaje de aluminio reduce significativamente el riesgo derivado de factores ambientales, como la luz, la humedad y el peróxido de hidrógeno vaporizado (PHV).

Período de almacenamiento de dos años



Protección frente a los daños causados por la luz y la humedad

Fr	Longitud del catéter cm	Caudal mL/s	kg/cm ²	psi
		CAUDAL MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA RECOMENDADA	
5,0	40	13	82	1200
5,0	65	11	82	1200
5,0	80	9	82	1200
5,0	100	9	82	1200
5,0	125	7	82	1200

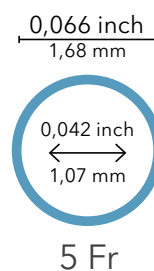

Curvas de catéter comunes

VISCERAL/AÓRTICA



C1



C2



CHG2.5



CHG-B



JB1



KMP



LEV1



MIK



MPA



RC1



RDC



RIM



RLG



SHK1.0



SIM1



SIM2



VANSCHIE 1



VANSCHIE 2



VANSCHIE 3



VANSCHIE 4



VANSCHIE 5



VS



VS1



VS2



VS3

BIFURCACIÓN/PÉLVICA



RIM



VS1



VS2



C1



C2



RBT

MULTIPROPÓSITO



KMP



TEGT

Vaso (diámetro medio)

CEREBRAL

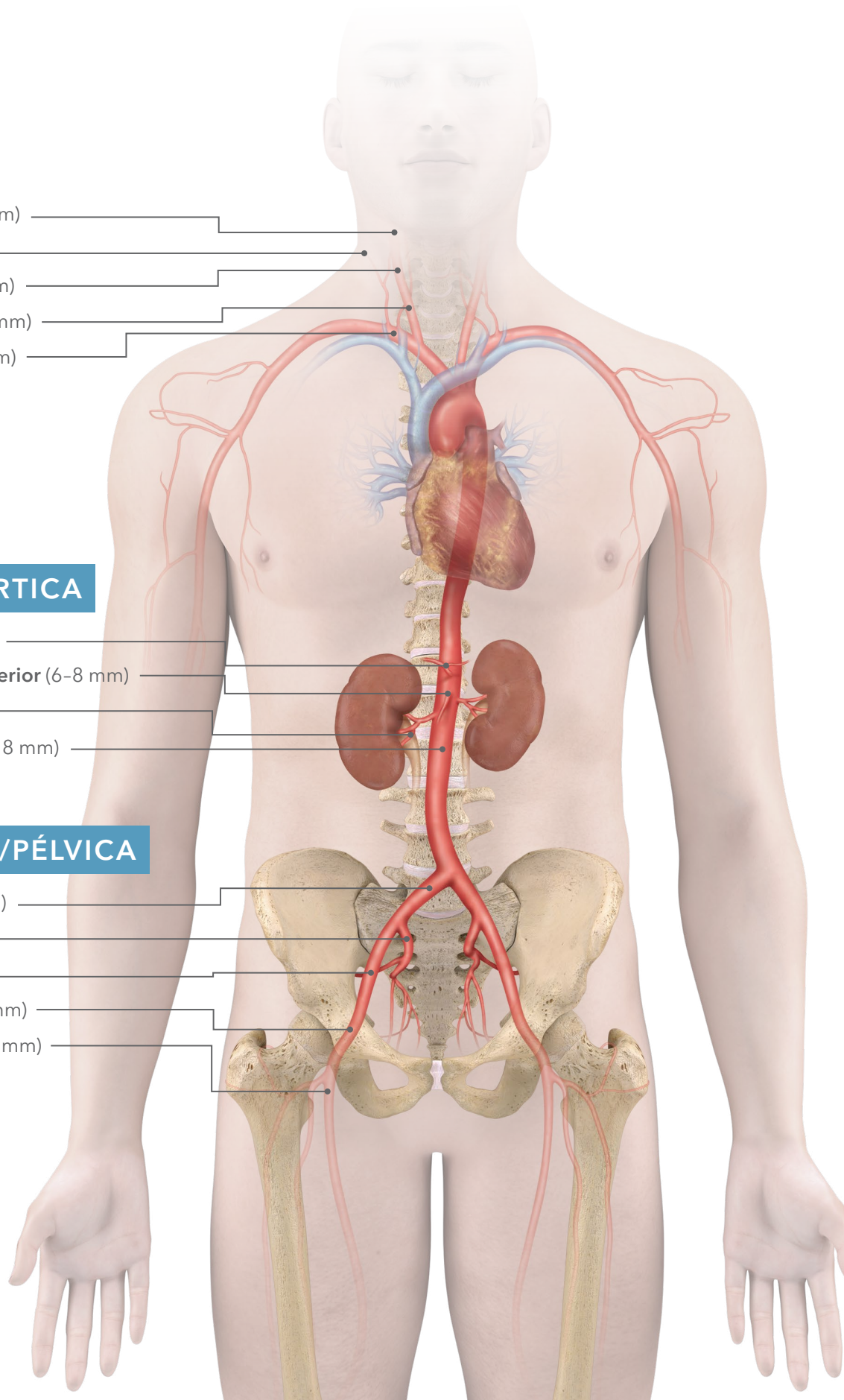
- Carótida externa (5-6 mm)
- Vertebral (3-5 mm)
- Carótida interna (5-6 mm)
- Carótida primitiva (5-8 mm)
- Braquiocefálica (8-10 mm)

VISCERAL/AÓRTICA


- Tronco celíaco (5-7 mm)
- Arteria mesentérica superior (6-8 mm)
- Renal (5-7 mm)
- Aorta descendente (16-18 mm)

BIFURCACIÓN/PÉLVICA

- Ilíaca primitiva (7-10 mm)
- Ilíaca interna (5-6 mm)
- Ilíaca externa (6-8 mm)
- Femoral primitiva (6-8 mm)
- Femoral superficial (4-6 mm)










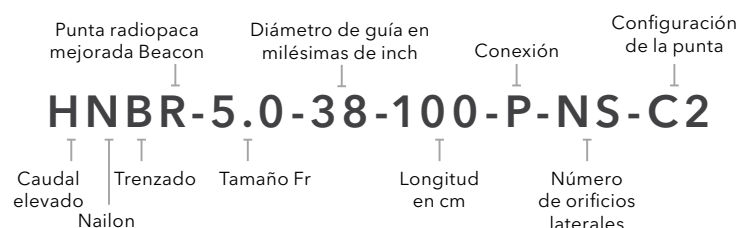CLAVE DE REFERENCIA DEL PRODUCTO PARA PEDIDOS



Referencia	Referencia de producto (RPN)	Fr	Diámetro de guía compatible inch	Longitud cm	Configuración de la punta	
G08441	HNBR5.0-35-65-P-NS-C1	5,0	0,035	65	C1	
G08446	HNBR5.0-38-65-P-NS-C1	5,0	0,038	65		
G08442	HNBR5.0-35-65-P-NS-C2	5,0	0,035	65	C2	
G08447	HNBR5.0-38-65-P-NS-C2	5,0	0,038	65		
G08586	HNBR5.0-38-80-P-NS-C2	5,0	0,038	80		
G08796	HNBR5.0-35-100-P-NS-C2	5,0	0,035	100		
G11430	HNBR5.0-38-80-P-NS-CHG2.5	5,0	0,038	80	CHG2.5	
G13560	HNBR5.0-38-80-P-NS-CHG-B	5,0	0,038	80	CHG-B	
G09751	HNBR5.0-35-40-P-NS-KMP	5,0	0,035	40	KMP	
G09548	HNBR5.0-38-40-P-NS-KMP	5,0	0,038	40		
G11458	HNBR5.0-35-65-P-NS-KMP	5,0	0,035	65		
G09469	HNBR5.0-38-65-P-NS-KMP	5,0	0,038	65		
G11457	HNBR5.0-38-100-P-NS-KMP	5,0	0,038	100		
G11194	HNBR5.0-38-65-P-NS-LEV1	5,0	0,038	65	LEV1	
G09312	HNBR5.0-38-80-P-NS-MIK	5,0	0,038	80	MIK	
G11195	HNBR5.0-38-65-P-NS-MPA	5,0	0,038	65	MPA	
G11205	HNBR5.0-38-100-P-NS-MPA	5,0	0,038	100		
G12154	HNBR5.0-38-125-P-NS-MPA	5,0	0,038	125		
G57015	HNBR5.0-35-65-P-NS-RBT	5,0	0,035	65	RBT	
G57017	HNBR5.0-35-90-P-NS-RBT	5,0	0,035	90		

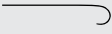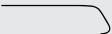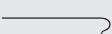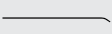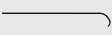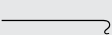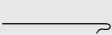Algunos productos o números de referencia pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o con el departamento Customer Support & Distribution de Cook para obtener más información. Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

Referencia	Referencia de producto (RPN)	Fr	Diámetro de guía compatible inch	Longitud cm	Configuración de la punta	
G08641	HNBR5.0-38-65-P-NS-RC1	5,0	0,038	65	RC1	
G08578	HNBR5.0-38-65-P-NS-RDC	5,0	0,038	65	RDC	
G08444	HNBR5.0-35-65-P-NS-RIM	5,0	0,035	65	RIM	
G10082	HNBR5.0-38-65-P-NS-RIM	5,0	0,038	65		
G12870	HNBR5.0-38-100-P-NS-RIM	5,0	0,038	100		
G11476	HNBR5.0-38-65-P-NS-SHK1.0	5,0	0,038	65	SHK1.0	
G11377	HNBR5.0-38-65-P-NS-TEGT	5,0	0,038	65	TEGT	
G11193	HNBR5.0-38-100-P-NS-TEGT	5,0	0,038	100		
G31410	HNBR5.0-35-40-P-NS-VANSCHIE1	5,0	0,035	40	VANSCHIE1	
G13795	HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE1	5,0	0,035	65		
G35733	HNBR5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE1	5,0	0,035	125		
G31409	HNBR5.0-35-40-P-NS-VANSCHIE2	5,0	0,035	40	VANSCHIE2	
G13794	HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE2	5,0	0,035	65		
G35734	HNBR5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE2	5,0	0,035	125		
G31408	HNBR5.0-35-40-P-NS-VANSCHIE3	5,0	0,035	40	VANSCHIE3	
G13792	HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE3	5,0	0,035	65		
G35735	HNBR5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE3	5,0	0,035	125		
G13783	HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE4	5,0	0,035	65	VANSCHIE4	
G35736	HNBR5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE4	5,0	0,035	125		
G13793	HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE5	5,0	0,035	65	VANSCHIE5	
G35737	HNBR5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE5	5,0	0,035	125		
G11209	HNBR5.0-38-80-P-NS-VS	5,0	0,038	80	VS	
G11189	HNBR5.0-38-80-P-NS-VS1	5,0	0,038	80	VS1	
G35974	HNBR5.0-35-125-P-NS-VS1	5,0	0,035	125		
G11190	HNBR5.0-38-80-P-NS-VS2	5,0	0,038	80	VS2	
G11191	HNBR5.0-38-80-P-NS-VS3	5,0	0,038	80	VS3	

Algunos productos o números de referencia pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o con el departamento Customer Support & Distribution de Cook para obtener más información. Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

Catéteres: la evolución de nuestro legado

Los 60

1963: Comienza nuestra historia

Cook crea y empieza a fabricar catéteres con tubo de polietileno radiopaco que permiten a los médicos dar la forma deseada a los catéteres para facilitar las intervenciones.

1966: Curvas fabricadas a medida

A mediados de los 60, Cook empieza a ofrecer a los médicos catéteres con los tamaños, longitudes y curvas que precisan en función de cada intervención. Nuestro fundador, Bill Cook, decía: «Díganos qué curva quieren», y en ocasiones los médicos dibujaban literalmente en un papel la curva que querían.

Los 90

1990: Catéter Royal Flush® Plus de punta Beacon

Estos catéteres de nailon cuentan con puntas radiopacas mejoradas y caudales elevados continuos y estables durante la inyección.

1990: Catéteres Torcon NB® Advantage

El catéter Torcon incorpora una punta suave y atraumática, y un control mejorado de la torsión.

Los 2000

Catéteres angiográficos con punta Beacon y catéteres angiográficos hidrofílicos Slip-Cath®

El trenzado de acero inoxidable y el tubo de nailon mejoran el control de la torsión, y la tecnología de punta radiopaca Beacon ofrece una mayor visibilidad de la punta.

Actualidad

La evolución continúa

Con el tiempo, esta tecnología clave ha evolucionado y ahora ofrecemos múltiples gamas de catéteres con una amplia variedad de opciones de tamaño, longitud y curvatura.

“En una feria médica en 1964, el Sr. Cook estaba utilizando un quemador Bunsen para hacer una demostración de la fabricación de catéteres con tubos de plástico cuando un hombre se acercó para preguntar si podía tomar prestado el equipo, ya que la exposición estaba cerrando por ese día.

Se trataba del Dr. Charles T. Dotter, que desarrolló la angioplastia, la técnica consistente en ensanchar mecánicamente un vaso sanguíneo obstruido. A la mañana siguiente, regresó con 15 catéteres de exquisita factura y el Sr. Cook los vendió rápidamente por 10 dólares cada uno. A partir de entonces, se aliaron en beneficio mutuo en diversos proyectos a lo largo de los años.”

Martin D. Bill Cook, medical device maker, dies at 80. Sitio web del New York Times. <https://www.nytimes.com/2011/04/26/business/26cook.html>. Fecha de publicación: 25 de abril de 2011. Fecha de acceso: 12 de julio de 2023.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 21612723770, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
Email: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, PI-A4