




VISIBILITÀ | CONTROLLO DI TORSIONE | TRACKABILITY

Controllo percepibile. Esplorazione affidabile.

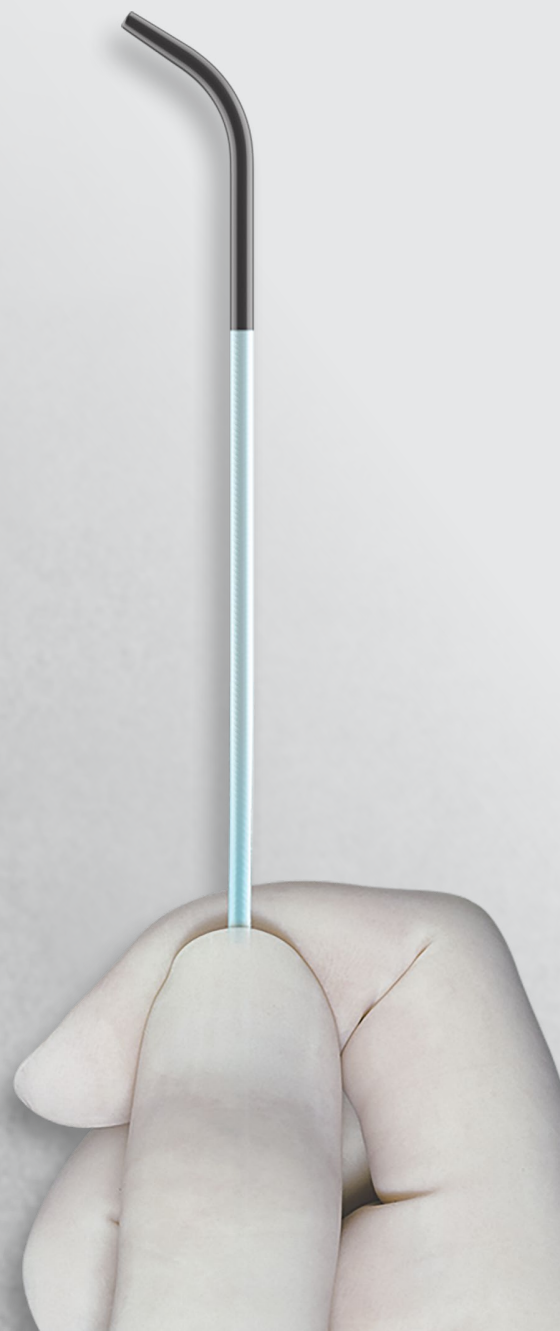

Beacon[®] Tip
ANGIOGRAPHIC CATHETER

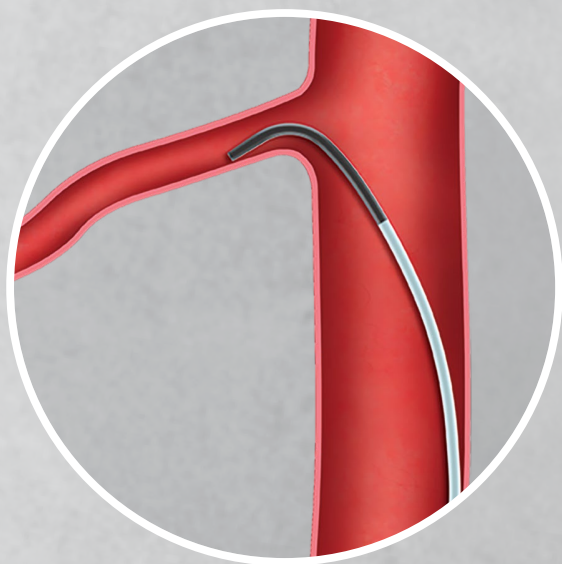

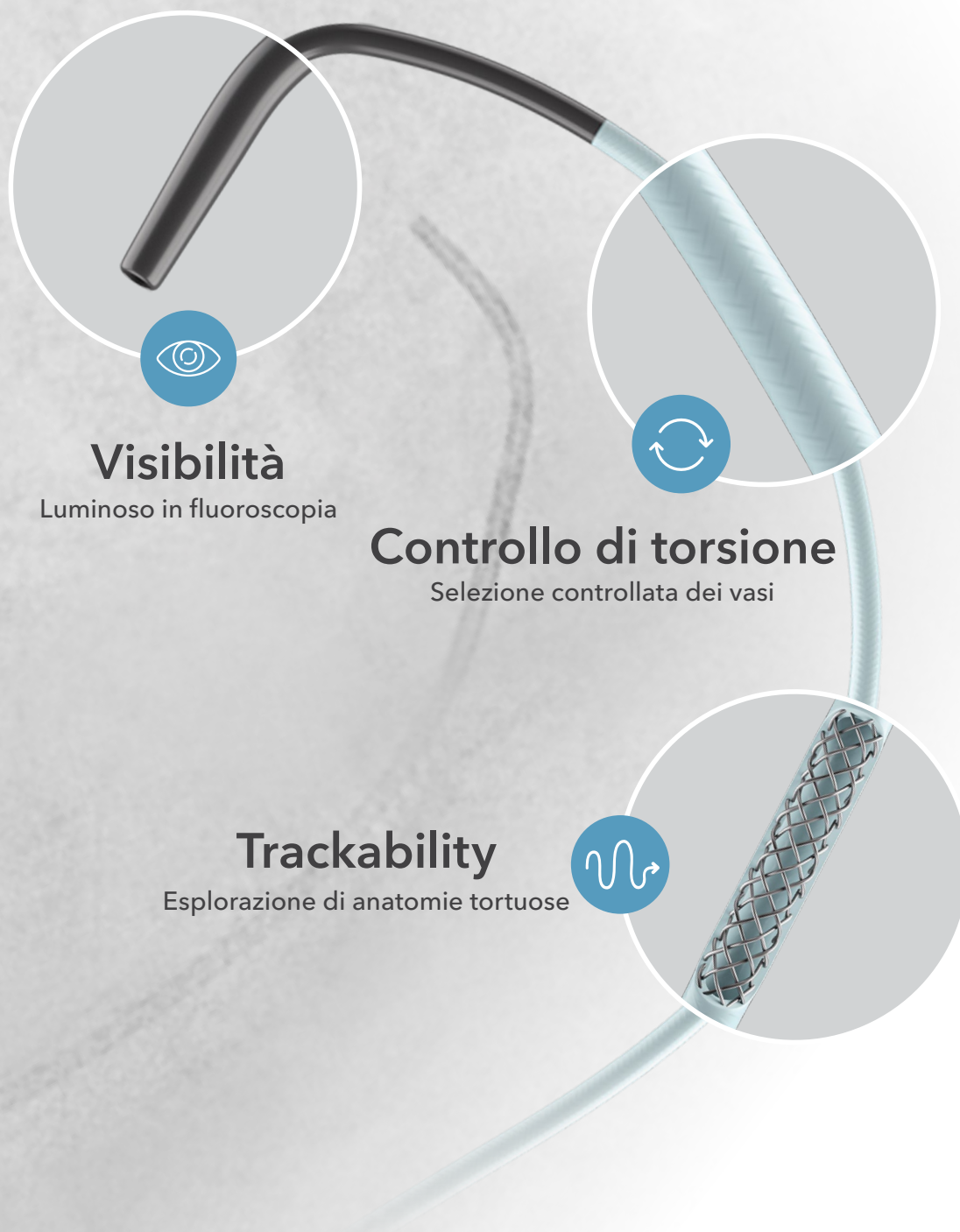

Visibilità

Luminoso in fluoroscopia

Controllo di torsione

Selezione controllata dei vasi

Trackability

Esplorazione di anatomie tortuose

Visibilità

Visibilità durante la manipolazione del catetere grazie alla tecnologia della punta radiopaca

Controllo di torsione

Risposta di torsione pari a quasi 1:1 per selezionare facilmente il vaso desiderato

Trackability

Struttura in nylon con intreccio in acciaio inossidabile all'interno del corpo, per spostarsi senza problemi in anatomie tortuose

Confezione protettiva

La confezione in alluminio protegge l'integrità del materiale dei cateteri.

- I test mostrano che questi cateteri sono meno soggetti alla separazione della punta rispetto a prodotti della concorrenza.
- La confezione in alluminio riduce significativamente il rischio dovuto a fattori ambientali quali la luce, l'umidità e il perossido di idrogeno vaporizzato (VHP).

Durata di vita
pari a due anni




Protezione contro
danni provocati da luce
e umidità



Fr	Lunghezza del catetere cm	Velocità di flusso mL/s	kg/cm ²	psi
		VELOCITÀ DI FLUSSO MASSIMA	PRESSIONE MASSIMA CONSIGLIATA	
5,0	40	13	82	1.200
5,0	65	11	82	1.200
5,0	80	9	82	1.200
5,0	100	9	82	1.200
5,0	125	7	82	1.200


0,066 inch
1,68 mm

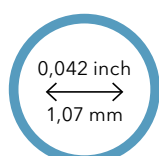


5 Fr

Curvature comuni dei cateteri


CATETERI VISCERALI/AORTICI

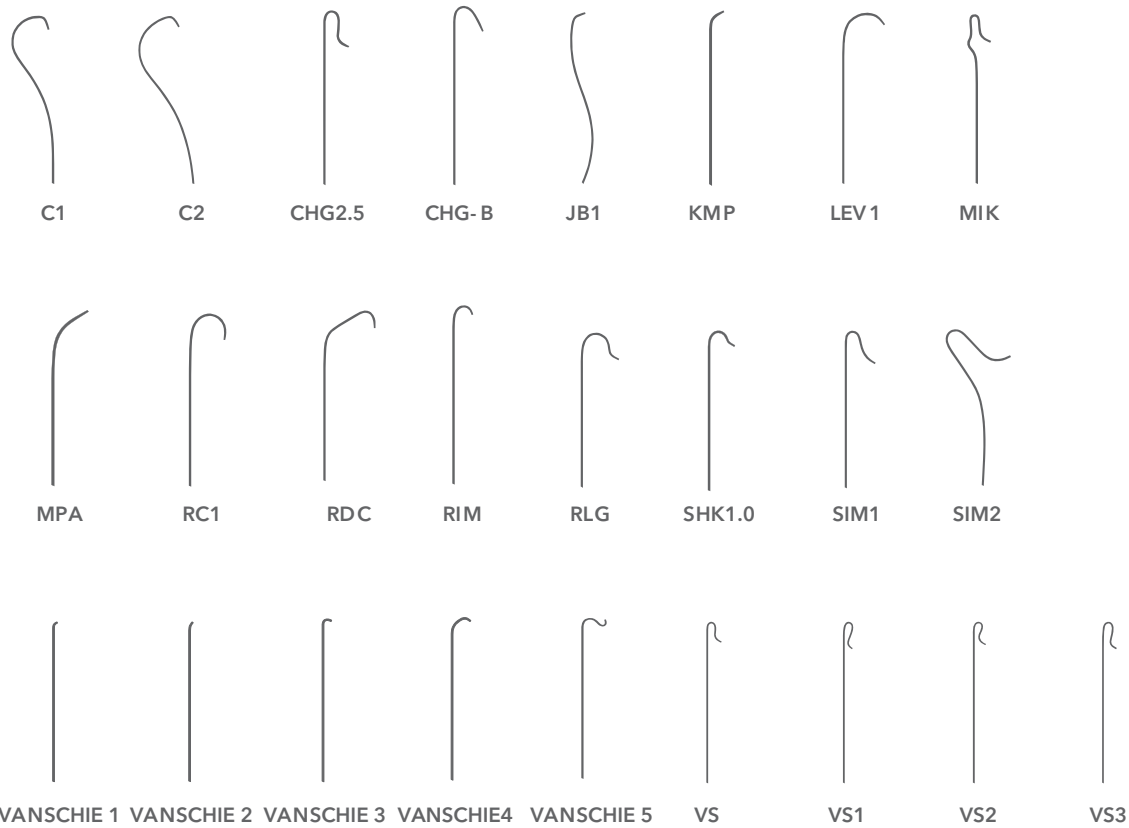

CATETERI PER BIFORCAZIONI/PELVICI

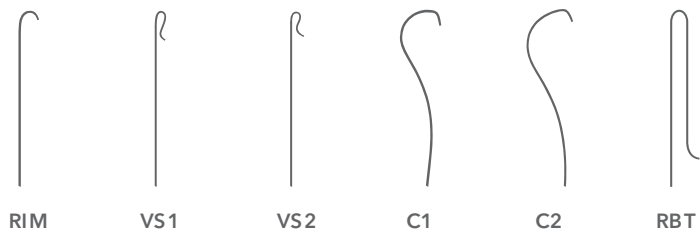

MULTIUSO

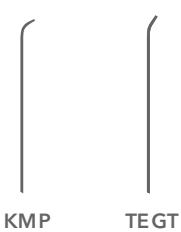

Vaso (diametro medio)

CATETERE CEREBRALE


- Carotide esterna (5-6 mm)
- Vertebrale (3-5 mm)
- Carotide interna (5-6 mm)
- Carotide comune (5-8 mm)
- Arteria brachiocefalica (anonima) (8-10 mm)

CATETERE VISCERALE/AORTICO


- Tronco celiaco (5-7 mm)
- Arteria mesenterica superiore (6-8 mm)
- Renale (5-7 mm)
- Aorta discendente (16-18 mm)







CATETERE PER BIFORCAZIONI/PELVICO

- Iliaca comune (7-10 mm)
- Iliaca interna (5-6 mm)
- Iliaca esterna (6-8 mm)
- Femorale comune (6-8 mm)
- Femorale superficiale (4-6 mm)

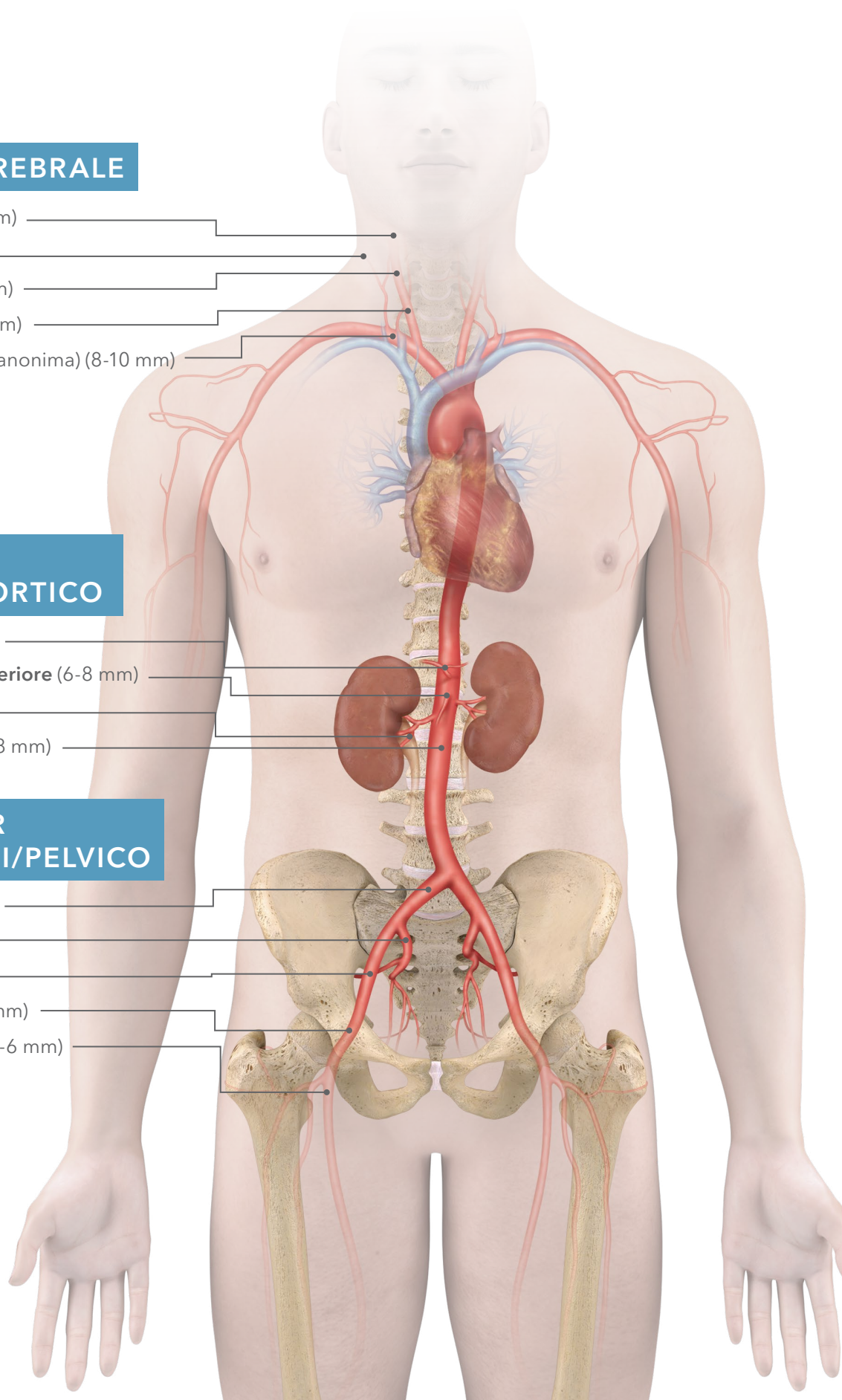

LEGENDA DEI CODICI PRODOTTO PER LE ORDINAZIONI

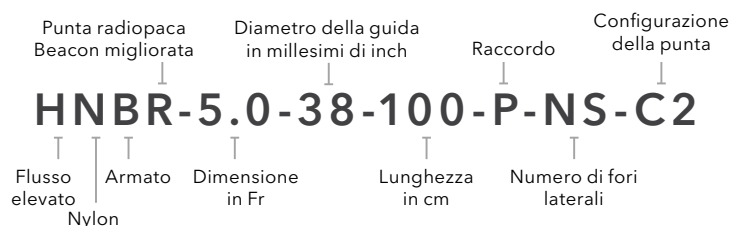

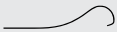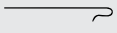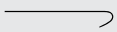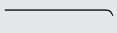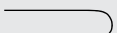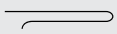Codice di ordinazione	Codice prodotto	Fr	Diametro delle guide compatibili inch	Lunghezza cm	Configurazione della punta	
G08441	HNBR5.0-35-65-P-NS-C1	5,0	0,035	65	C1	
G08446	HNBR5.0-38-65-P-NS-C1	5,0	0,038	65		
G08442	HNBR5.0-35-65-P-NS-C2	5,0	0,035	65	C2	
G08447	HNBR5.0-38-65-P-NS-C2	5,0	0,038	65		
G08586	HNBR5.0-38-80-P-NS-C2	5,0	0,038	80		
G08796	HNBR5.0-35-100-P-NS-C2	5,0	0,035	100		
G11430	HNBR5.0-38-80-P-NS-CHG2.5	5,0	0,038	80	CHG2.5	
G13560	HNBR5.0-38-80-P-NS-CHG-B	5,0	0,038	80	CHG-B	
G09751	HNBR5.0-35-40-P-NS-KMP	5,0	0,035	40	KMP	
G09548	HNBR5.0-38-40-P-NS-KMP	5,0	0,038	40		
G11458	HNBR5.0-35-65-P-NS-KMP	5,0	0,035	65		
G09469	HNBR5.0-38-65-P-NS-KMP	5,0	0,038	65		
G11457	HNBR5.0-38-100-P-NS-KMP	5,0	0,038	100		
G11194	HNBR5.0-38-65-P-NS-LEV1	5,0	0,038	65	LEV1	
G09312	HNBR5.0-38-80-P-NS-MIK	5,0	0,038	80	MIK	
G11195	HNBR5.0-38-65-P-NS-MPA	5,0	0,038	65	MPA	
G11205	HNBR5.0-38-100-P-NS-MPA	5,0	0,038	100		
G12154	HNBR5.0-38-125-P-NS-MPA	5,0	0,038	125		
G57015	HNBR5.0-35-65-P-NS-RBT	5,0	0,035	65	RBT	
G57017	HNBR5.0-35-90-P-NS-RBT	5,0	0,035	90		

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Fr	Diametro delle guide compatibili inch	Lunghezza cm	Configurazione della punta	
G08641	HNBR5.0-38-65-P-NS-RC1	5,0	0,038	65	RC1	
G08578	HNBR5.0-38-65-P-NS-RDC	5,0	0,038	65	RDC	
G08444	HNBR5.0-35-65-P-NS-RIM	5,0	0,035	65	RIM	
G10082	HNBR5.0-38-65-P-NS-RIM	5,0	0,038	65		
G12870	HNBR5.0-38-100-P-NS-RIM	5,0	0,038	100		
G11476	HNBR5.0-38-65-P-NS-SHK1.0	5,0	0,038	65	SHK1.0	
G11377	HNBR5.0-38-65-P-NS-TEGT	5,0	0,038	65	TEGT	
G11193	HNBR5.0-38-100-P-NS-TEGT	5,0	0,038	100		
G31410	HNBR5.0-35-40-P-NS-VANSCHIE1	5,0	0,035	40	VANSCHIE1	
G13795	HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE1	5,0	0,035	65		
G35733	HNBR5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE1	5,0	0,035	125		
G31409	HNBR5.0-35-40-P-NS-VANSCHIE2	5,0	0,035	40	VANSCHIE2	
G13794	HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE2	5,0	0,035	65		
G35734	HNBR5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE2	5,0	0,035	125		
G31408	HNBR5.0-35-40-P-NS-VANSCHIE3	5,0	0,035	40	VANSCHIE3	
G13792	HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE3	5,0	0,035	65		
G35735	HNBR5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE3	5,0	0,035	125		
G13783	HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE4	5,0	0,035	65	VANSCHIE4	
G35736	HNBR5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE4	5,0	0,035	125		
G13793	HNBR5.0-35-65-P-NS-VANSCHIE5	5,0	0,035	65	VANSCHIE5	
G35737	HNBR5.0-35-125-P-NS-VANSCHIE5	5,0	0,035	125		
G11209	HNBR5.0-38-80-P-NS-VS	5,0	0,038	80	VS	
G11189	HNBR5.0-38-80-P-NS-VS1	5,0	0,038	80	VS1	
G35974	HNBR5.0-35-125-P-NS-VS1	5,0	0,035	125		
G11190	HNBR5.0-38-80-P-NS-VS2	5,0	0,038	80	VS2	
G11191	HNBR5.0-38-80-P-NS-VS3	5,0	0,038	80	VS3	

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.

Cateteri: la nostra storia in continua evoluzione

Anni
'60

1963: quando tutto ebbe inizio

Cook ideò e iniziò a produrre cateteri con tubi in polietilene radiopaco che permisero ai medici di preformare i cateteri da utilizzare nelle procedure interventistiche.

1966: curvature su misura

A metà degli anni '60, Cook iniziò a produrre cateteri che presentavano dimensioni, lunghezze e curvature che soddisfacevano le specifiche esigenze procedurali dei medici. Bill Cook, il nostro fondatore, era solito dire: "Spiegateci che curvatura volete"; a volte, i medici disegnavano su un foglio di carta la curvatura che desideravano.

Anni
'90

1990: cateteri Royal Flush® Plus con punta Beacon

Questi cateteri in nylon sono dotati di punte radiopache migliorate e di elevate velocità di flusso continue, che rimangono stabili durante l'iniezione.

1990: cateteri Torcon NB® Advantage

Il catetere Torcon è dotato di una punta morbida e atraumatica, nonché di un controllo di torsione migliorato.

Anni
2000

Cateteri angiografici con punta Beacon e cateteri angiografici idrofili Slip-Cath®

L'intreccio in acciaio inossidabile e il tubo in nylon migliorano il controllo di torsione, mentre la tecnologia della punta Beacon radiopaca offre una maggiore visibilità della punta.

Oggi

L'evoluzione continua

Questa tecnologia fondamentale si è evoluta nel tempo: oggi, offriamo una grande varietà di linee di cateteri con un'ampia gamma di opzioni di dimensioni, lunghezze e curvature.

“In occasione di una fiera del settore medicale nel 1964, mentre il sig. Cook stava utilizzando un becco di Bunsen per dimostrare la produzione di cateteri a partire da un tubo di plastica, un uomo si avvicinò e gli chiese se potesse prendere in prestito l'apparecchiatura, in quanto la fiera stava giungendo al termine, per quel giorno.

Si trattava del Dott. Charles T. Dotter, lo sviluppatore dell'angioplastica, ovvero la tecnica di dilatazione meccanica di un vaso sanguigno ostruito. Questi tornò la mattina seguente con 15 cateteri realizzati in modo impeccabile, che vennero velocemente venduti dal sig. Cook per 10 \$ al pezzo. Quello fu l'inizio di una duratura e reciprocamente proficua collaborazione a numerosi progetti.”

Martin D. Bill Cook, medical device maker, dies at 80. Sito web del New York Times. <https://www.nytimes.com/2011/04/26/business/26cook.html>. Pubblicazione: 25 aprile 2011. Data di consultazione: 12 luglio 2023.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 21612723770, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
Email: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, PI-A4