


**La opción más inteligente:
reduzca el tiempo de oclusión^{1,2}
y ahorre dinero³ con nuestras
espirales empujables recubiertas
de fibras.**



Nester[®]
EMBOLIZATION COIL

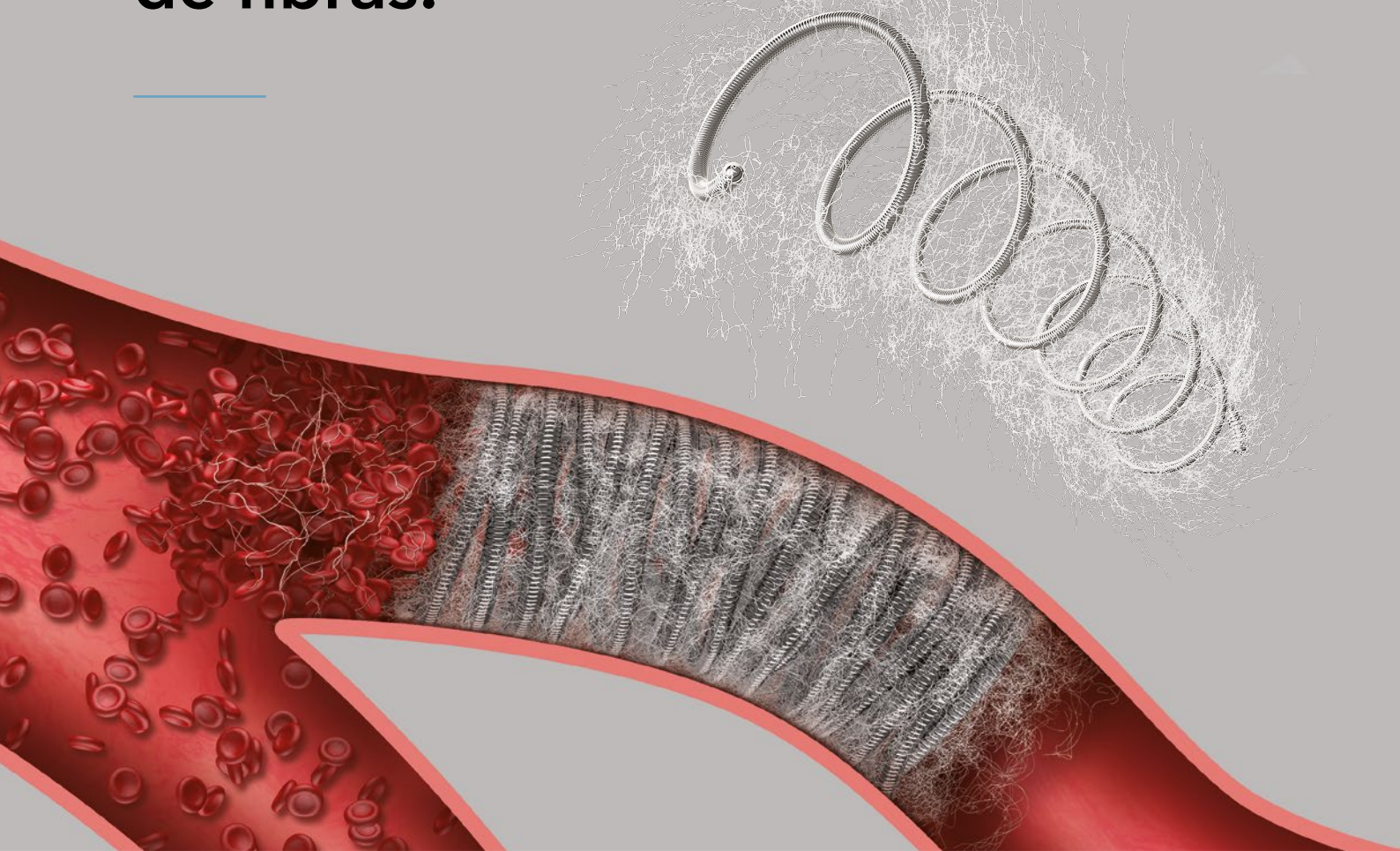

► MÁS
INFORMACIÓN.



Descripción del dispositivo

Las espirales y microespirales de embolización Nester están fabricadas en platino con fibras sintéticas espaciadas y se suministran precargadas en un cartucho de carga. Están diseñadas para implantarse en el vaso que se desea tratar, empleando una guía recta blanda a través de un catéter angiográfico estándar.

Indicaciones

Las espirales y microespirales de embolización Nester están indicadas para la embolización arterial y venosa en la vasculatura periférica.

- La variedad más amplia de diámetros y longitudes de la cartera de espirales de embolización de Cook
- Diseñadas para formar una masa de oclusión ajustada
- Hechas de platino blando para un relleno ajustado
- Recubiertas totalmente de fibras para una mayor trombogenicidad
- Fácilmente visibles mediante fluoroscopia
- «MR Conditional» (esto es, seguras bajo ciertas condiciones de la MRI) para 3 T y 1,5 T
- Aptas por sí solas o en combinación con otras espirales de embolización empujables y largables

Su superpoder económico

Si su procedimiento requiere una espiral largable inicial para vasos difíciles, considere la posibilidad de realizar el relleno con nuestras espirales empujables recubiertas de fibras y obtenga mayor valor económico.³ Nuestras espirales altamente trombógenas se ajustarán a sus objetivos, sus preferencias y su presupuesto. [Obtenga más información sobre los aspectos económicos en el Análisis del valor de Nester.](#)



Cantata® para implantar las microespirales de Cook

Los microcatéteres con DI de 0,021 y 0,025 inch están diseñados para implantar microespirales de 0,018 inch de diámetro y otros agentes de embolización de los tamaños adecuados. El microcatéter con DI de 0,027 inch de la opción de flujo elevado permite implantar una gama más amplia de agentes de embolización en la estructura anatómica diana.

La fibra: solución indiscutible

Todas las espirales tienen el mismo objetivo: ocluir el flujo sanguíneo. Los estudios muestran que el mayor uso de fibras y el menor uso de metal garantiza una mayor rapidez en la oclusión.^{1,2} Su procedimiento de embolización requerirá una menor cantidad de espirales recubiertas de fibras para lograr la oclusión, en comparación con el uso de espirales desprovistas de fibras. Cuando cada segundo cuenta, las espirales recubiertas de fibras son la opción más inteligente.



Referencia	Referencia de producto	DI del catéter y diámetro del orificio terminal recomendados inch	Longitud del émbolo extendido cm	Diámetro del émbolo enrollado mm	Número aproximado de lazos
Microespirales de 0,018 inch de diámetro					
G47344	MWCE-18-2-2-NESTER-01	0,018	2	2	3,2
G47331	MWCE-18-3-2-NESTER-01	0,018	3	2	4,8
G47332	MWCE-18-3-3-NESTER-01	0,018	3	3	3,2
G47333	MWCE-18-5-2-NESTER-01	0,018	5	2	8,0
G47334	MWCE-18-5-3-NESTER-01	0,018	5	3	5,3
G47335	MWCE-18-5-5-NESTER-01	0,018	5	5	3,2
G47337	MWCE-18-7-2-NESTER-01	0,018	7	2	11,1
G47338	MWCE-18-7-3-NESTER-01	0,018	7	3	7,4
G47339	MWCE-18-7-4-NESTER-01	0,018	7	4	5,6
G47340	MWCE-18-7-5-NESTER-01	0,018	7	5	4,5
G47341	MWCE-18-7-6-NESTER-01	0,018	7	6	3,7
G47342	MWCE-18-7-8-NESTER-01	0,018	7	8	2,8
G47326	MWCE-18-14-3-NESTER-01	0,018	14	3	14,9
G47327	MWCE-18-14-4-NESTER-01	0,018	14	4	11,1
G47328	MWCE-18-14-5-NESTER-01	0,018	14	5	8,9
G47329	MWCE-18-14-6-NESTER-01	0,018	14	6	7,4
G47330	MWCE-18-14-8-NESTER-01	0,018	14	8	5,6
G47325	MWCE-18-14-10-NESTER-01	0,018	14	10	4,5

Algunos productos o números de referencia pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o con el departamento Customer Support & Distribution de Cook para obtener más información. Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

1. Trerotola SO, Pressler GA, Premanandan C. Nylon fibered versus non-fibered embolization coils: comparison in a swine model. *J Vasc Interv Radiol.* 2019;30(6):949-955.
2. White SB, Wissing ER, Van Alstine WG, et al. Comparison of fibered versus nonfibered coils for venous embolization in an ovine model. *J Vasc Interv Radiol.* 2023;34(5):888-895.
3. Nester Value Analysis. View the full list of references in the document section of CookMedical.eu/Nester

Consulte las instrucciones de uso más recientes para obtener información detallada sobre el uso del sistema. Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

Referencia	Referencia de producto	DI del catéter y diámetro del orificio terminal recomendados inch	Longitud del émbolo extendido cm	Diámetro del émbolo enrollado mm	Número aproximado de lazos
Espirales de 0,035 inch de diámetro					
G47371	MWCE-35-7-3-NESTER-01	0,035	7	3	7,4
G47372	MWCE-35-7-4-NESTER-01	0,035	7	4	5,6
G47373	MWCE-35-7-5-NESTER-01	0,035	7	5	4,5
G47374	MWCE-35-7-6-NESTER-01	0,035	7	6	3,7
G47375	MWCE-35-7-8-NESTER-01	0,035	7	8	2,8
G47365	MWCE-35-7-10-NESTER-01	0,035	7	10	2,2
G47352	MWCE-35-14-4-NESTER-01	0,035	14	4	11,1
G47353	MWCE-35-14-5-NESTER-01	0,035	14	5	8,9
G47354	MWCE-35-14-6-NESTER-01	0,035	14	6	7,4
G47355	MWCE-35-14-8-NESTER-01	0,035	14	8	5,6
G47345	MWCE-35-14-10-NESTER-01	0,035	14	10	4,5
G47346	MWCE-35-14-12-NESTER-01	0,035	14	12	3,7
G47347	MWCE-35-14-14-NESTER-01	0,035	14	14	3,2
G47348	MWCE-35-14-16-NESTER-01	0,035	14	16	2,8
G47349	MWCE-35-14-18-NESTER-01	0,035	14	18	2,5
G47350	MWCE-35-14-20-NESTER-01	0,035	14	20	2,2
G47362	MWCE-35-20-5-NESTER-01	0,035	20	5	12,7
G47363	MWCE-35-20-6-NESTER-01	0,035	20	6	10,6
G47364	MWCE-35-20-8-NESTER-01	0,035	20	8	8,0
G47356	MWCE-35-20-10-NESTER-01	0,035	20	10	6,4
G47357	MWCE-35-20-12-NESTER-01	0,035	20	12	5,3
G47358	MWCE-35-20-14-NESTER-01	0,035	20	14	4,5
G47359	MWCE-35-20-16-NESTER-01	0,035	20	16	4,0
G47360	MWCE-35-20-18-NESTER-01	0,035	20	18	3,5
G47361	MWCE-35-20-20-NESTER-01	0,035	20	20	3,2

Algunos productos o números de referencia pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o con el departamento Customer Support & Distribution de Cook para obtener más información. Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 21612723770, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 Email: cau.custserv@cookmedical.com



AI, ESC, IR, PI-A4