

Controle todo el cable





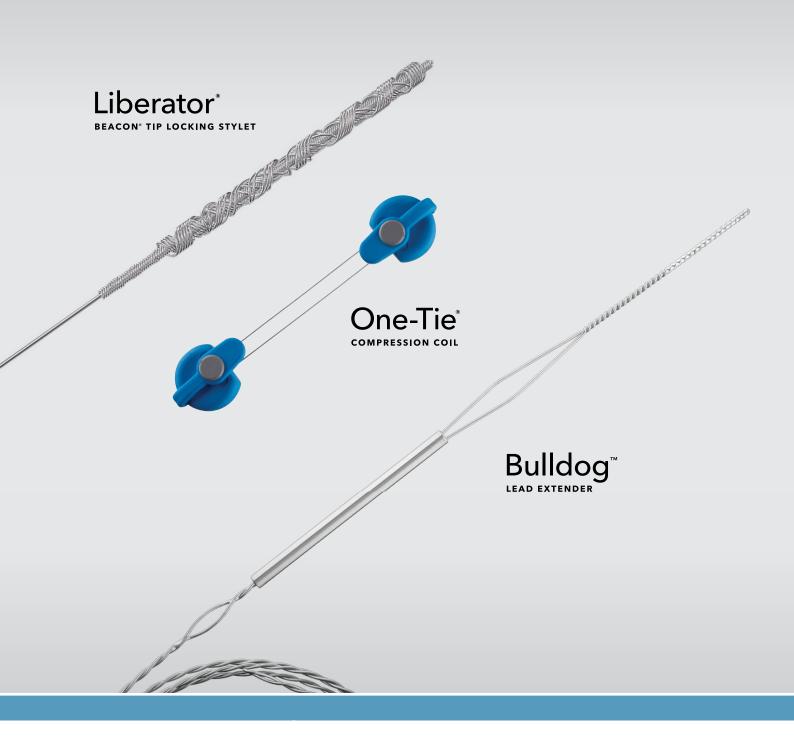

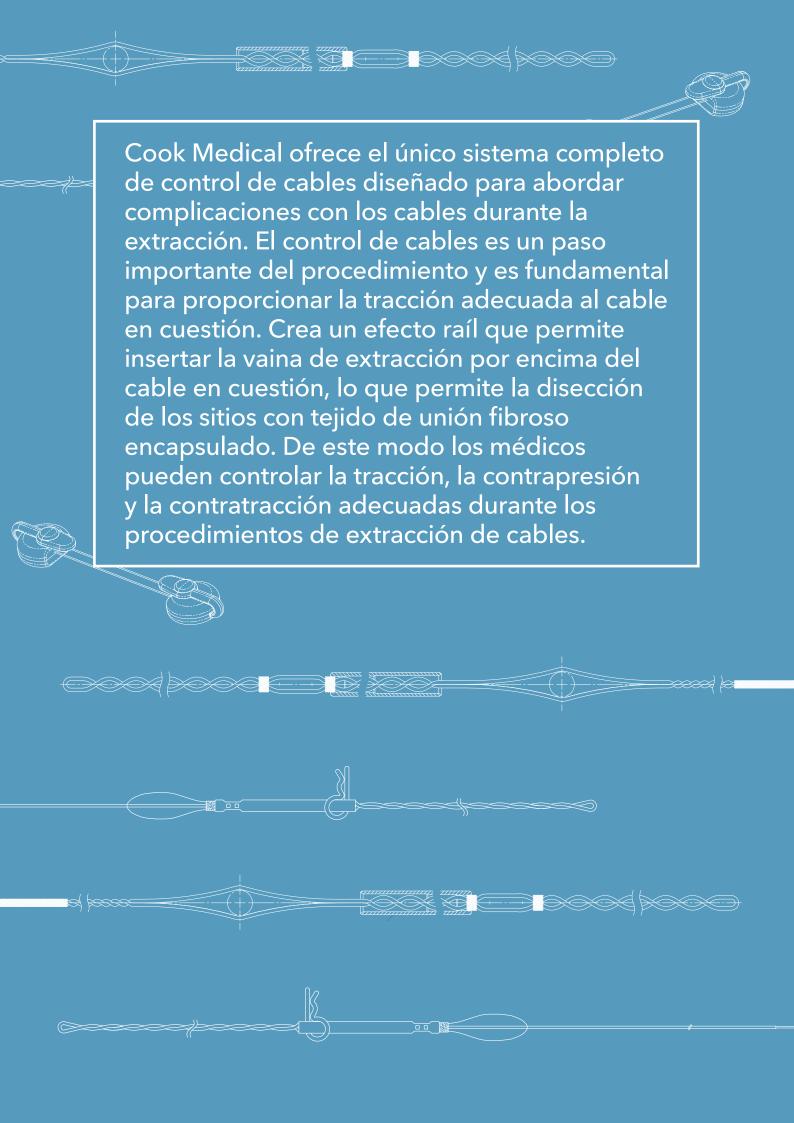


Liberator® Beacon® Tip Locking Stylet

Bloquee con seguridad

El estilete de fijación Liberator con punta Beacon permite visualizar mejor el mecanismo de fijación, lo que permite a los médicos saber exactamente cuánto han avanzado. Con un mecanismo de fijación situado cerca del extremo distal del cable, el dispositivo se puede fijar distalmente a medida que avanza por el cable. Esto facilita la creación del efecto raíl respecto a la posición de fijación del cable.

Características

- Tamaño universal
- Mecanismo de fijación a 7,6 cm de la punta distal
- El pestillo impide una fijación prematura
- Mango trenzado roscable que mejora el control/agarre del médico

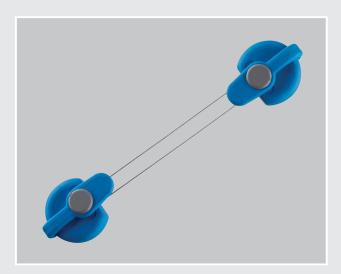


One-Tie® Compression Coil

Mayor control del cable¹

La espiral de compresión One-Tie comprime los componentes proximales del cable de derivación en cuestión. Al comprimir los componentes sobre el estilete de fijación proporciona a los médicos la capacidad de controlar mejor el cable e impedir el repliegue o la acumulación del aislamiento o la extrusión de los cables.

Características

- Fácil de aplicar
- Se adapta a todos los tipos de cable
- Diseñada para reducir el desplazamiento del aislamiento.

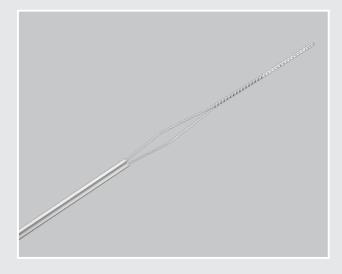

Bulldog™ Lead Extender

Gestiona la extracción de cables sin luz

El extensor de cables Bulldog ayuda a extraer cables de derivación cardíaca rotos o sin luz, o aquellos que contienen hilos conductores, como los cables de desfibriladores cardioversores implantables (DCI). Bulldog extiende el cable de modo que se pueda colocar en una vaina.

Características

- Mecanismo de fijación seguro y fácil de usar
- Compatibilidad con todas las vainas de extracción
- Mango roscable

Efecto raíl

Utilizados conjuntamente, el estilete Liberator y la espiral One-Tie proporcionan dos puntos de tracción a lo largo del cable. El primer paso es visualizar la posición de la fijación distal con el estilete Liberator y la espiral One-Tie y la compresión proximal estableciendo el raíl entre los dos puntos. El raíl creado y la utilización de la espiral One-Tie junto con el estilete Liberator proporcionan un apoyo central mejorado para las vainas de extracción durante procedimientos complicados de extracción de cables.1









Referencia	Referencia de producto	Longitud total cm	Longitud activa cm	Intervalo de fijación Diámetro pulgadas	Cantidad
Liberator® Beacon® Tip Locking Stylet					
G26550	LR-OFA01	140	70	0,016-0,32	_
One-Tie® Compression Coil					
G31929	LR-OTE-N	-	-	-	5
Bulldog™ Lead Extender					
G46542	LR-LED01	70	_	_	_

^{1.} Christoph T. Starck, Alexander Stepuk, Tomas Holubec, Jan Steffel, Jan Wendelin Stark, Volkmar Falk, Compression coil provides increased lead control in extraction procedures, EP Europace, Volume 17, Issue 3, March 2015, Pages 499-503, https://doi.org/10.1093/europace/euu272

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu EDI: cookmedical.eu/edi

Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com

Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com Iceland: +354 8007516, IS.orders@cookmedical.com Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com

Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com

Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com

Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: customer support @cook medical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



LM-A4