


# Megoldás a legproblémásabb kövekre is.



**NCircle<sup>®</sup>**

NITINOL TIPLESS STONE EXTRACTOR

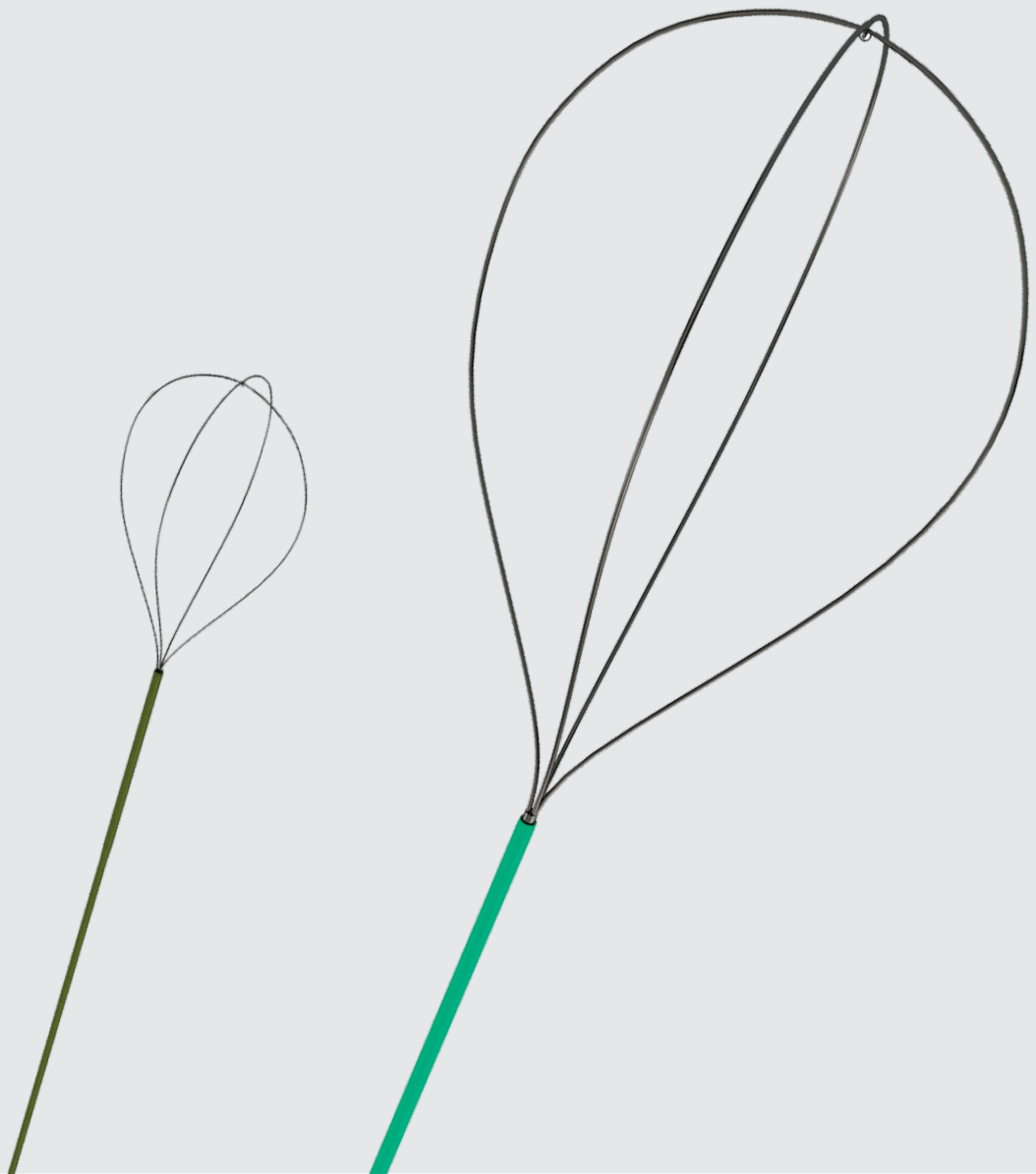

[www.cookmedical.com](http://www.cookmedical.com)

# NCircle®

## NITINOL TIPLESS STONE EXTRACTOR

A minél kisebb traumával járó kőeltávolítás rendkívül nehéz lehet, különösen olyankor, ha folyamatosan szabályozni kell a látómezőt, vagy egy kehelykő körül kell manőverezni. Az NCircle nitinol anyagú, csúcs nélküli kőeltávolító segíthet a kihívások leküzdésében.

### Csúcs nélküli kosár

A csúcs nélküli elrendezés lehetővé teszi, hogy a kosarat közvetlenül hozzáérinthesse a nyálkahártyához, lehetőleg minél kisebb traumát okozva, miközben a látómező is tiszta marad.

### Optimalizált ellenőrzés

Kialakításának köszönhetően az NCircle kőeltávolító a követ és a kosarat az ureteroszkóp fókuszterületében tartja.

### Nitinol anyagból készült

A nitinoldrót memóriával bíró, rugalmas tulajdonságának köszönhetően a kosár ismét felveszi eredeti alakját az eszköz nyitásakor.

### Hajlékonyság

A kőeltávolító külső hüvelyének hajlékonysága lehetővé teszi az ureteroszkóp teljes eltérítését a kő manipulációja közben.

### Delta Wire® technológia

Az NCircle kőeltávolító Delta Wire konfigurációban kapható. A Delta Wire kialakítás nyújtja a lehető legnagyobb dróttérfogatot (keresztmetszetet) a kosár megalkotásakor. A nagyobb drótkeresztmetszet megnöveli a kosár radiális erejét és nagyobb radiális dilatációt biztosít. A 2,4 Fr méretű hajlékony hüvely az ureteroszkóp folyamatos és teljes mértékű eltérítését teszi lehetővé a kő manipulációja közben, és fokozza az irrigálási áramlást.




#### Kerek drót

Egy szokványos csavarvonalas kőeltávolító kosara kör keresztmetszetű, rozsdamentes acéldrótokból készül. A hüvely átmérője határozza meg, hogy milyen vastagok lehetnek a drótok. Ezen az ábrán kör keresztmetszetű drótokból készült, négydrótos kosár keresztmetszete látható a hüvelyben.




#### Delta Wire

Ezen az ábrán pedig Delta Wire kialakítású négydrótos kosár látható a hüvelyben; jól látható a Delta Wire drótok mérete és alakja. A nagyobb anyagterületnek és a nitinolötvetet memóriával bíró tulajdonságainak köszönhetően ez a különleges kosár megnövelt radiális erőt képes kifejteni.

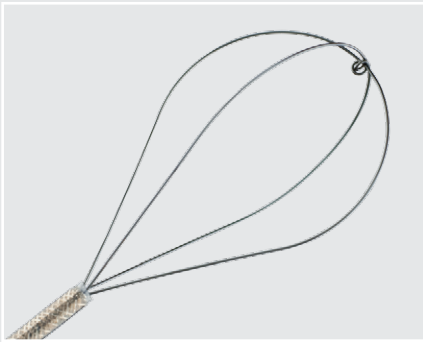

Az NCircle nitinol anyagú, csúcs nélküli kőeltávolító a húgyúti rendszerben lévő kövek manipulálására és eltávolítására szolgál. A nitinolból készült drótoknak köszönhetően a kosár még rendkívüli torzió után is megtartja az alakját. Az egyedi, csúcs nélküli kialakítás lehetővé teszi, hogy a kosarat a kehely tövében nyissa ki és vegye körül a követ. A kosárnak a kehely tövében történő nyitása csökkenti a nyálkahártya károsodásának és a perforációnak a kockázatát.

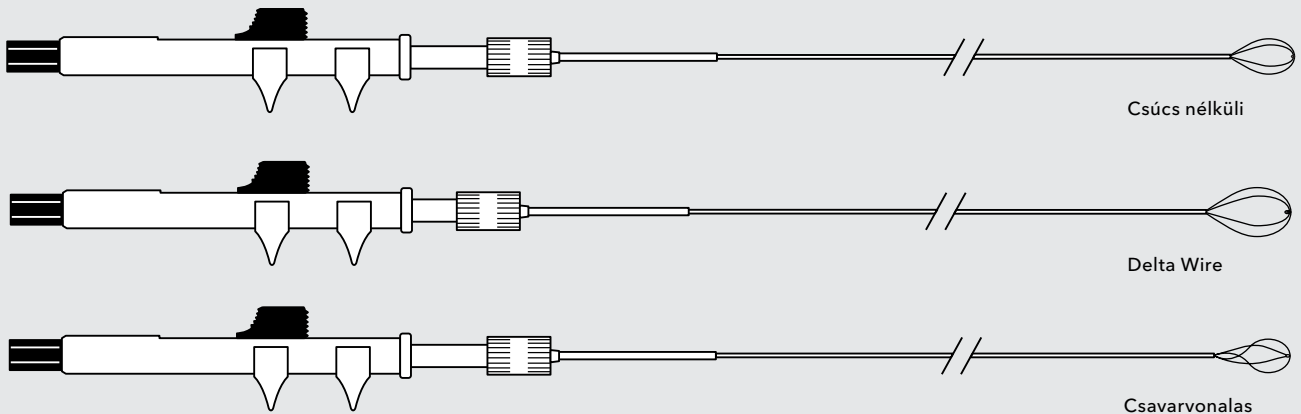

Rendelési szám	Referencia-cikkszám	Fr	Hossz cm	Kosár átmérője cm
<b>NCircle csúcs nélküli kőeltávolító</b>				
G46206	NTSE-015115	1,5	115	1
G18778	NTSE-022115-UDH	2,2	115	1
G17627	NTSE-030115-UDH	3,0	115	1
G17520	NTSE-045065-UDH	4,5	65	2
<b>NCircle csúcs nélküli kőeltávolító módosított kosárral</b>				
G18777	NTSE-022115-UDH-MB	2,2	115	2
G17872	NTSE-030115-UDH-MB	3,0	115	2
<b>NCircle Delta Wire csúcs nélküli kőeltávolító</b>				
G19110	NTSED-024115-UDH	2,4	115	1
<b>NCircle Delta Wire csúcs nélküli kőeltávolító módosított kosárral</b>				
G19111	NTSED-024115-UDH-MB	2,4	115	2
<b>NCircle csavarvonalas, csúcs nélküli kőeltávolító</b>				
G18191	NTHSES-030115-UDH	3,0	115	1
G18193	NTHSE-045065-UDH	4,5	65	1,5

Előfordulhat, hogy egyes termékek, illetve egyes cikkszámú termékek nem minden országban szerezhetők be. A részletekért lépjen kapcsolatba a Cook helyi képviselőjével vagy az ügyfélszolgálatával.

### Customer Service - Urology

**EMEA:** EDI - [www.cookmedical.com/edi.do](http://www.cookmedical.com/edi.do)  
Distributors: +353 61239240, [ssc.distributors@cookmedical.com](mailto:ssc.distributors@cookmedical.com)  
Austria: +43 179567121, [oe.orders@cookmedical.com](mailto:oe.orders@cookmedical.com)  
Belgium: +32 27001633, [be.orders@cookmedical.com](mailto:be.orders@cookmedical.com)  
Denmark: +45 38487607, [da.orders@cookmedical.com](mailto:da.orders@cookmedical.com)  
Finland: +358 972519996, [fi.orders@cookmedical.com](mailto:fi.orders@cookmedical.com)  
France: +33 171230269, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
Germany: +49 6950072804, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
Hungary: +36 17779199, [hu.orders@cookmedical.com](mailto:hu.orders@cookmedical.com)  
Ireland: +353 61239252, [ie.orders@cookmedical.com](mailto:ie.orders@cookmedical.com)  
Italy: +39 0269682853, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
Netherlands: +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto:nl.orders@cookmedical.com)  
Poland: +48 223060159, [pl.orders@cookmedical.com](mailto:pl.orders@cookmedical.com)  
Spain: +34 912702691, [es.orders@cookmedical.com](mailto:es.orders@cookmedical.com)  
Sweden: +46 858769468, [se.orders@cookmedical.com](mailto:se.orders@cookmedical.com)  
Switzerland - French: +41 448009609, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
Switzerland - Italian: +41 448009609, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
Switzerland - German: +41 448009609, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
United Kingdom: +44 2073654183, [uk.orders@cookmedical.com](mailto:uk.orders@cookmedical.com)

[www.cookmedical.com](http://www.cookmedical.com)

**Americas:** EDI - [www.cookmedical.com/edi.do](http://www.cookmedical.com/edi.do)  
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335  
E-mail: [orders@cookmedical.com](mailto:orders@cookmedical.com)

**Australia:**  
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283  
E-mail: [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)

