

Fogja be és
távolítsa el az apró
kőfragmentumokat is.



NCompass®
NITINOL STONE EXTRACTOR



cookmedical.eu

NCompass®


NITINOL STONE EXTRACTOR

A többdrótos geometriájú NCompass® nitinol kőeltávolító számos kőméret befogására alkalmas.

Az egyedi többdrótos geometria hagyományos 4 drótos kosár alakot vesz fel a teljes kinyitáskor. A részleges zárás során a kosár sűrű szövésű, 16 drótos kosárrá formálódik át. Az NCompass eltávolító kettős funkcionalitása nemcsak a rutinszerű kőbefogást és az ép kövek eltávolítását teszi lehetővé, hanem az intracorporealis lithotripsia során keletkező apró kőfragmentumok befogását is.

Jellemzők

Kifinomult többdrótos geometria	Kétféle kosárkialakítás: hagyományos 4 drótos forma teljes kinyitás esetén, illetve sűrű szövésű, 16 drótos kosár zárás közben. Teljes nyitáskor a disztális rész hálószerű területet képez, amely segít megakadályozni a kő kimozdulását.
Csúcs nélküli kialakítás	A csúcs nélküli kosárkialakítás követi az NCircle® kosár hagyományát.
Nitinol ötvözet	A rugalmas anyag memóriefunkciójának köszönhetően az eszköz megtartja előre kialakított formáját a kosár nyitáskor. A megtörésnek ellenálló kosár igen strapabíró. A kosár rugalmassága lehetővé teszi a kövek befogását és kiengedését.
Hajlékony hüvely	A hajlékony hüvely az ureteroszkóp folyamatos hajlítását teszi lehetővé a kő manipulációja közben.
1,7 Fr méretű hüvely	A hajlékony hüvely jobb irrigálási áramlást biztosít az endoszkóp munkacsatornáján keresztül.

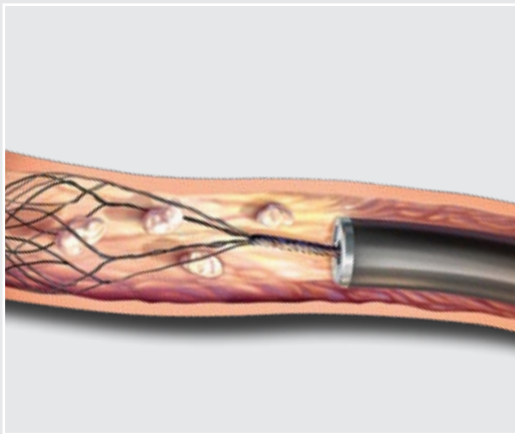


1. Teljes kinyitáskor az NCompass kőeltávolító lehetővé teszi, hogy a kő bejusson a kosárba.



2. A kosár disztális részén lévő többdrótos kialakítású terület befogja a köveket a kosár ureterben történő visszahúzása közben. Ez a befogási módszer segít megakadályozni a kövek kimozdulását.



3. Az NCompass fokozatos bezárása közben a sűrű szövésű többdrótos geometriának köszönhetően a kosár teljesen körülveszi a köveket a biztos befogás és eltávolítás érdekében.

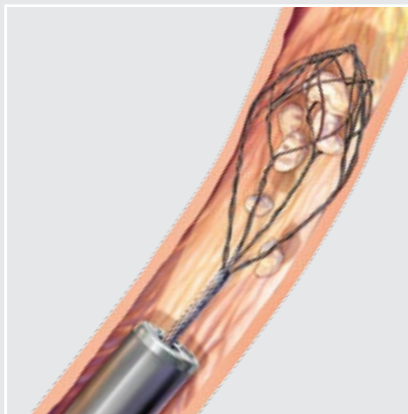

NCompass®

NITINOL STONE EXTRACTOR

1998-ban a Cook Medical bemutatta csúcs nélküli NCircle nitinol kosártechnológiát, amely forradalmian új megoldást jelentett a kőeltávolítás területén. Az NCompass nitinol kőeltávolító fejlesztése jól demonstrálja azon elhivatottságunkat, hogy világelsők legyünk a nitinol kőeltávolító technológiák terén.

Az NCompass nitinol kőeltávolító a húgyúti rendszerben lévő kövek manipulálására és eltávolítására szolgál. A kőeltávolítókat steril, feltéphető csomagolásban szállítjuk.

Rendelési szám	Referencia-cikkszám	Fr	Hossz (cm)	Kosár átmérője (cm)	Kosár-konfiguráció	Csúcs-konfiguráció
G46027	NCT4-017115	1,7	115	1,0	4 drótos, 16 drótos	csúcs nélküli
G32701	NCT4-024115	2,4	115	1,0	4 drótos, 16 drótos	csúcs nélküli
G32863	NCT4-024115-MB	2,4	115	1,5	4 drótos, 16 drótos	csúcs nélküli

Előfordulhat, hogy egyes termékek, illetve egyes cikkszámú termékek nem minden piacon kaphatók. A részletekkel kapcsolatban forduljon a Cook helyi képviselőjéhez vagy az ügyfélszolgálathoz.

Customer Service

EMEA: EDI - www.cookmedical.com/edi.do
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001633, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

www.cookmedical.eu

Americas: EDI - www.cookmedical.com/edi.do
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com

