

Extracción de cálculos salivales

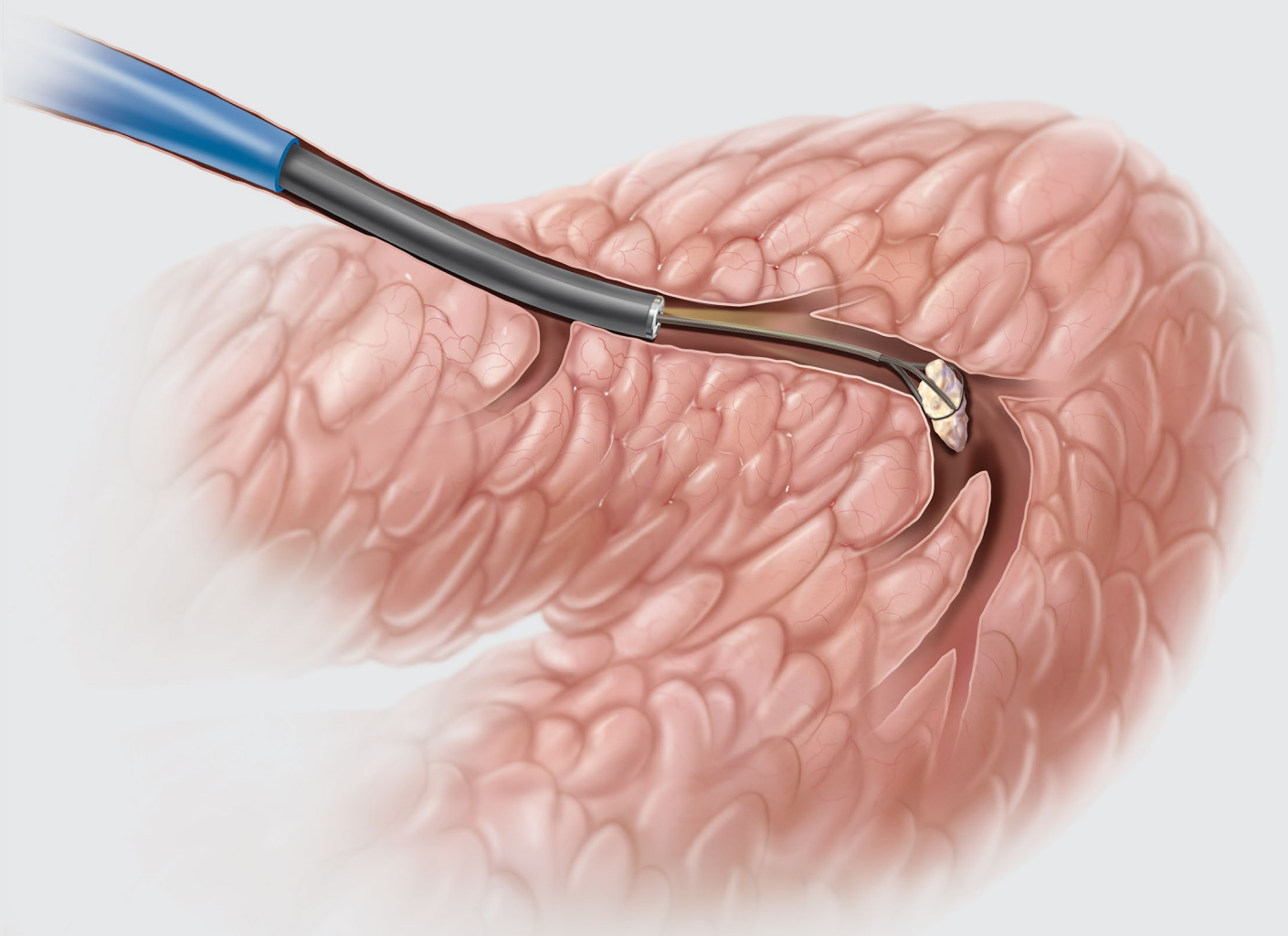


Ilustración de Lisa Clark

NGage[®] SALIVARY STONE EXTRACTOR

Funcionamiento doble

Con el extractor de cálculos es posible sujetar los cálculos a modo de cesta y liberarlos como una pinza extractora, lo que proporciona un control óptimo durante todo el procedimiento.

Ergonómico

El mango es fácil de usar y permite desplegar el extractor de cálculos con una sola mano.

Duradero

El extractor de cálculos fabricado con nitinol es flexible y resistente al acodamiento.




NGage®

SALIVARY STONE EXTRACTOR

Se utiliza para manipular, atrapar y extraer cálculos y otros cuerpos extraños de los conductos salivares y reducir el riesgo de migración de los cálculos salivares durante procedimientos intervencionistas.

Referencia	Referencia de producto	Tamaño del catéter Fr	Longitud del catéter cm	Diámetro de la cesta mm
G23798	SSEB-1.7-115-8	1,7	115	8


Productos relacionados

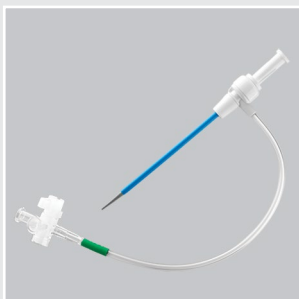

Equipo introductor para acceso salival Kolenda

Para la introducción de dispositivos diagnósticos o intervencionistas en el conducto salival submandibular.

Referencia	Referencia de producto	D.I. del introductor mm/inch	Diámetro de la guía inch	Longitud de la vaina cm
G24129	SDAS-6.0-18	2,2/0,087	0,018	5,5
G24132	SDAS-5.0-18	1,9/0,074	0,018	5,5

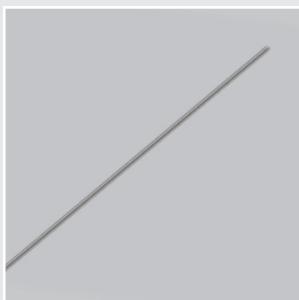

Guías

Se utiliza para acceder y mantener el acceso al conducto salival.

Referencia	Referencia de producto	Diámetro de la guía inch	Longitud de la guía cm	Configuración de la punta
G02274	C-SF-15-50	0,015	50	Recta
G02255	C-SF-18-40	0,018	40	Recta

Algunos productos o referencias de producto pueden no estar disponibles en todos los mercados. Consulte los detalles con su representante local o centro de atención al cliente de Cook Medical.

Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4