

Advance Serenity®

HYDROPHILIC PTA BALLOON DILATATION CATHETER

Para atravesar lesiones de forma más suave¹

Le presentamos nuestro balón
de PTA de 0,014 inch y 0,018 inch
para intervenciones en las regiones
infrapoplíteas y femoropoplíteas



Revestimiento hidrofílico de última generación

Proporciona lubricidad
para navegar con baja
fricción.



Punta formada con tecnología láser

Favorece la
maniobrabilidad y permite
transiciones suaves.¹



Portador de diseño coaxial

Capacidad de empuje
equilibrada en un término
medio entre la rigidez
y la flexibilidad.¹



Balón plisado

Permite que se repliegue
con suavidad.



Revestimiento hidrofílico de última generación

Proporciona una lubricidad inigualable que permite navegar con baja fricción a través de los vasos sanguíneos afectados.



Punta formada con tecnología láser

Aporta maniobrabilidad y transiciones suaves de la guía a la punta, lo que hace posible atravesar lesiones complejas.¹

Portador translúcido

La presencia de reflujo sanguíneo confirma el acceso luminal.¹



Portador de diseño coaxial

Brinda un equilibrio entre rigidez y flexibilidad que ofrece capacidad de empuje para atravesar lesiones distales.¹




Balón plisado

Permite que se repliegue con suavidad y sin complicaciones a través de la vaina.

Capacidad de cruce inigualable


Prueba de laboratorio en la que se atravesó una lesión sintética de 0,4 inch

Comparación entre Advance Serenity 14 y otros catéteres balón de PTA de 0,014 inch²

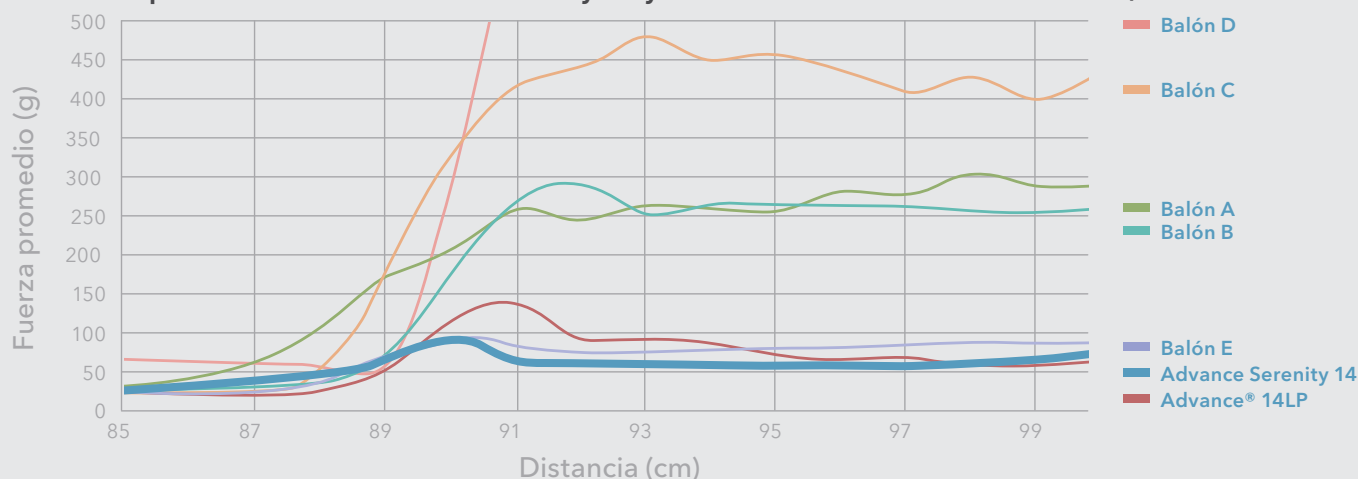

Prueba de laboratorio en la que se atravesó una lesión sintética de 0,9 inch

Comparación entre Advance Serenity 18 y otros catéteres balón de PTA de 0,018 inch³

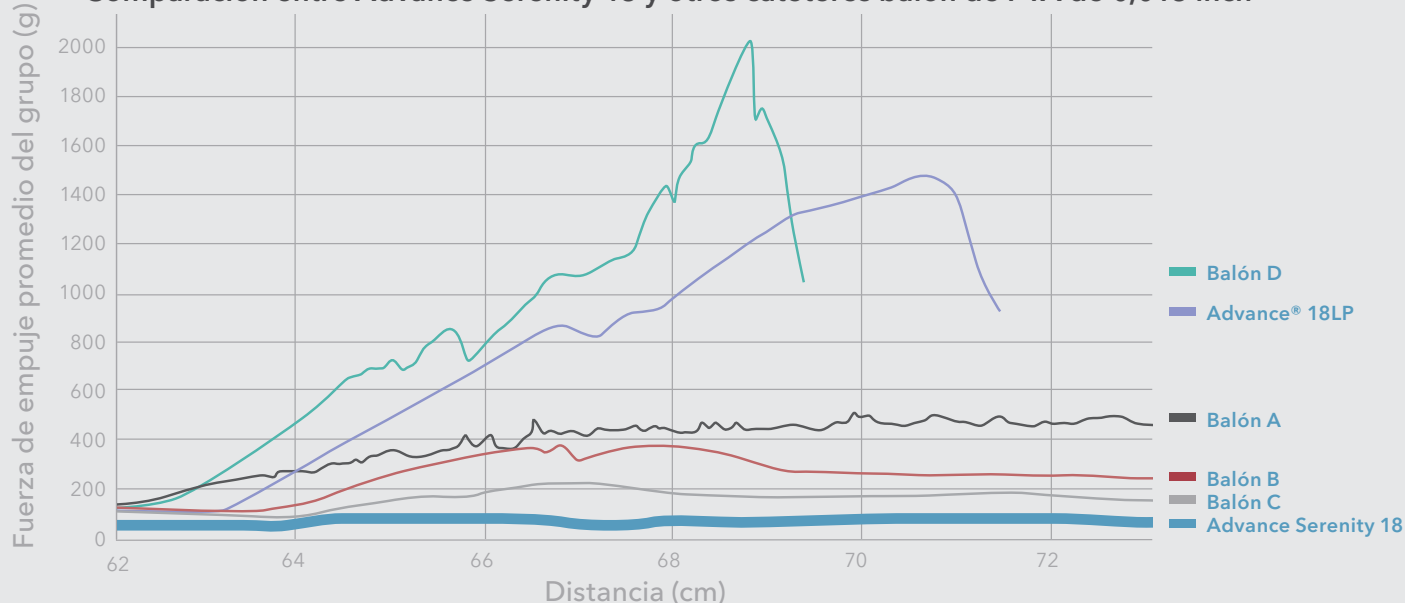


A diferencia de los principales competidores, Advance Serenity 14 y 18 han demostrado lograr una capacidad de cruce excelente usando una fuerza mínima. Advance Serenity 14 y 18 cuenta con un **diseño de punta con tecnología láser** y un **revestimiento hidrofílico de última generación** que permiten lograr una capacidad de cruce superior, como se pudo comprobar en una lesión sintética. El **portador con diseño coaxial** presenta un equilibrio entre rigidez y flexibilidad que brinda capacidad de empuje para atravesar lesiones distales. Su **balón con diseño plisado**, disponible en varias opciones de diámetro, hace posible tratar la extremidad entera, lo que le ayudará a ahorrar tiempo.¹

1. Advance Serenity. Doc. n.º 20155, rev. 00 (10 MAR 2020). Surmodics, Inc.

2. Advance Serenity. Informe de prueba RD2016-09. (25 ABR 2016). Surmodics, Inc.

3. Advance Serenity. Informe de prueba CD2019-106. (27 DIC 2019). Surmodics, Inc.

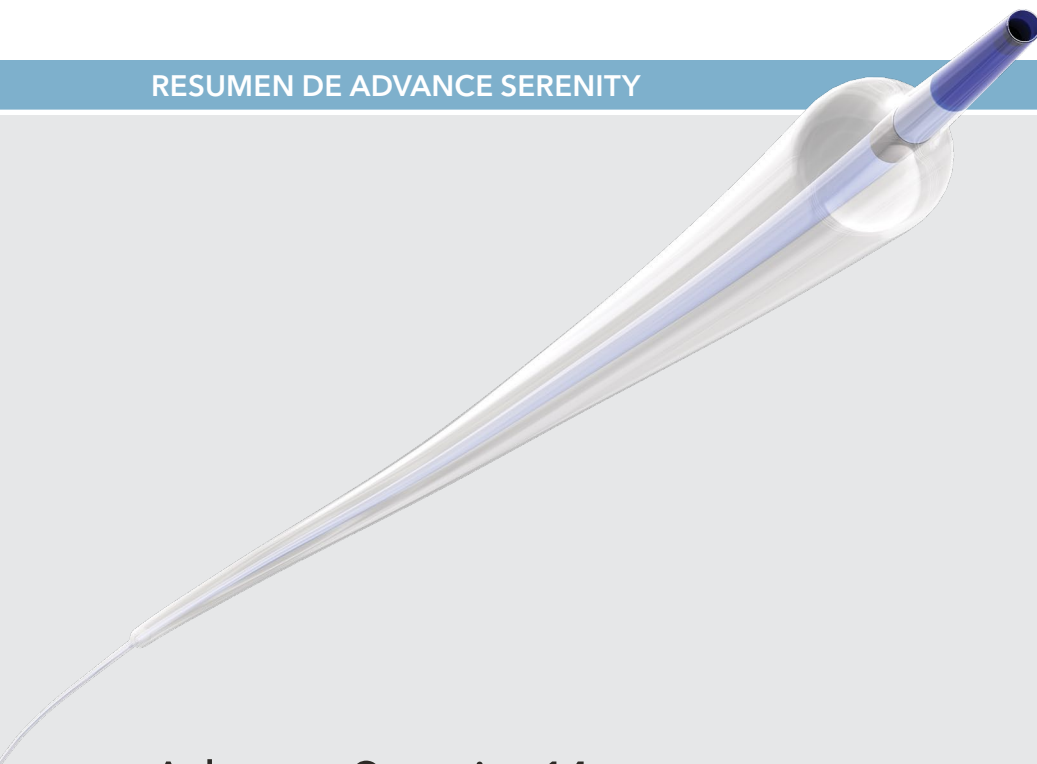

Advance Serenity® 14


HYDROPHILIC PTA BALLOON DILATATION CATHETER

El catéter balón de dilatación hidrofílico para ATP Advance Serenity 14 se utiliza para la dilatación por angioplastia transluminal percutánea (ATP) de estenosis vasculares periféricas en las arterias ilíaca, femoral, ilio-femoral, poplítea, infrapoplítea y renal, así como en el tratamiento de lesiones relacionadas con la obstrucción de fístulas arteriovenosas para diálisis, ya sean naturales o sintéticas.

- Todos los tamaños de balón son compatibles con vainas de 4 Fr.
- Las longitudes de balón de hasta 220 mm permiten el tratamiento de lesiones más largas con menos hinchados y deshinchados.

Advance Serenity 14: Región infrapoplítea

Plataforma del catéter	Sobre guía (OTW)
Guía recomendada	0,014 inch
Compatibilidad con vainas	4 Fr (todos los tamaños)
Longitud de trabajo del catéter	120 cm y 150 cm (todos los tamaños)
Diámetros de los balones	2-4 mm (incrementos de 0,5 mm)
Longitudes de los balones	20-220 mm
Presión nominal	6 atm (todos los tamaños)
Presión máxima de hinchado (RBP)	16 atm (todos los tamaños)

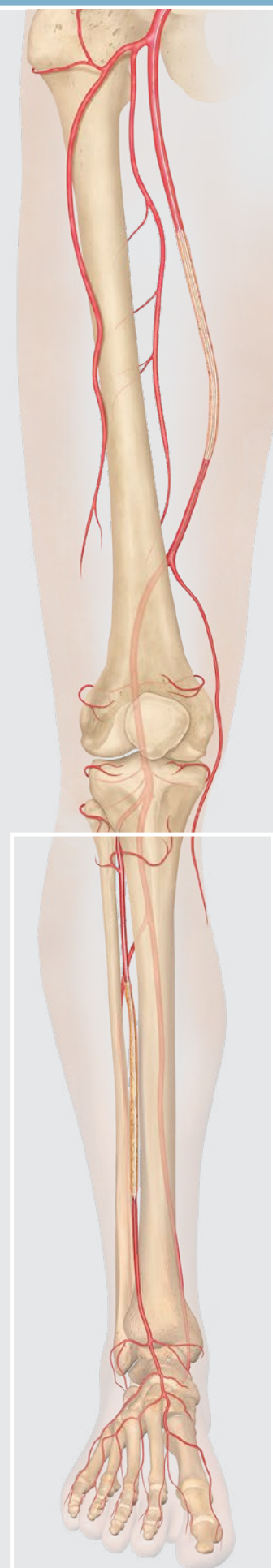

Advance Serenity® 18

HYDROPHILIC PTA BALLOON DILATATION CATHETER

El catéter balón de dilatación hidrofílico para ATP Advance Serenity 18 se utiliza para la dilatación por angioplastia transluminal percutánea (ATP) de estenosis vasculares periféricas en las arterias ilíaca, femoral, poplítea, infrapoplítea y renal, así como en el tratamiento de lesiones relacionadas con la obstrucción de fístulas arteriovenosas para diálisis, ya sean naturales o sintéticas.

Advance Serenity 18: Región femoropoplítea

Plataforma del catéter	Sobre guía (OTW)
Guía recomendada	0,018 inch
Compatibilidad con vainas	4 y 5 Fr
Longitud de trabajo del catéter	90 cm y 135 cm (todos los tamaños)
Diámetros de los balones	5-10 mm
Longitudes de los balones	20-150 mm
Presión nominal	8 atm (todos los tamaños)
Presión máxima de hinchado (RBP)	10-16 atm

Advance Serenity 18: Región infrapoplítea

Plataforma del catéter	Sobre guía (OTW)
Guía recomendada	0,018 inch
Compatibilidad con vainas	4 Fr (todos los tamaños)
Longitud de trabajo del catéter	120 cm y 150 cm (todos los tamaños)
Diámetros de los balones	2-4 mm (incrementos de 0,5 mm)
Longitudes de los balones	20-220 mm
Presión nominal	8 atm (todos los tamaños)
Presión máxima de hinchado (RBP)	16 atm (todos los tamaños)

ADVANCE SERENITY 14 REGIÓN INFRAPOPLÍTEA

Referencia	Referencia de producto	Diámetro de la guía inch	Diámetro del balón hinchado mm	Longitud del balón cm	Introducción recomendado Fr	Diámetro exacto del catéter Fr	Presión nominal atm	Presión máxima de hinchado (RBP) atm
Guía de 0,014 inch de diámetro, portador “sobre guía” de 120 cm de largo								
G57848	SER14-120-20-20	0,014	2	2	4	3,9	6	16
G57850	SER14-120-20-40	0,014	2	4	4	3,9	6	16
G57849	SER14-120-20-60	0,014	2	6	4	3,9	6	16
G57851	SER14-120-20-80	0,014	2	8	4	3,9	6	16
G57852	SER14-120-20-100	0,014	2	10	4	3,9	6	16
G57853	SER14-120-20-150	0,014	2	15	4	3,9	6	16
G57854	SER14-120-20-220	0,014	2	22	4	3,9	6	16
G57855	SER14-120-25-20	0,014	2,5	2	4	3,9	6	16
G57856	SER14-120-25-40	0,014	2,5	4	4	3,9	6	16
G57857	SER14-120-25-60	0,014	2,5	6	4	3,9	6	16
G57858	SER14-120-25-80	0,014	2,5	8	4	3,9	6	16
G57859	SER14-120-25-100	0,014	2,5	10	4	3,9	6	16
G57860	SER14-120-25-150	0,014	2,5	15	4	3,9	6	16
G57861	SER14-120-25-220	0,014	2,5	22	4	3,9	6	16
G57862	SER14-120-30-20	0,014	3	2	4	3,9	6	16
G57863	SER14-120-30-40	0,014	3	4	4	3,9	6	16
G57864	SER14-120-30-60	0,014	3	6	4	3,9	6	16
G57865	SER14-120-30-80	0,014	3	8	4	3,9	6	16
G57866	SER14-120-30-100	0,014	3	10	4	3,9	6	16
G57867	SER14-120-30-150	0,014	3	15	4	3,9	6	16
G57868	SER14-120-30-220	0,014	3	22	4	3,9	6	16
G57869	SER14-120-35-20	0,014	3,5	2	4	3,9	6	16
G57870	SER14-120-35-40	0,014	3,5	4	4	3,9	6	16
G57871	SER14-120-35-60	0,014	3,5	6	4	3,9	6	16
G57872	SER14-120-35-80	0,014	3,5	8	4	3,9	6	16
G57873	SER14-120-35-100	0,014	3,5	10	4	3,9	6	16
G57874	SER14-120-35-150	0,014	3,5	15	4	3,9	6	16
G57875	SER14-120-35-220	0,014	3,5	22	4	3,9	6	16
G57876	SER14-120-40-20	0,014	4	2	4	3,9	6	16
G57877	SER14-120-40-40	0,014	4	4	4	3,9	6	16
G57878	SER14-120-40-60	0,014	4	6	4	3,9	6	16
G57879	SER14-120-40-80	0,014	4	8	4	3,9	6	16
G57880	SER14-120-40-100	0,014	4	10	4	3,9	6	16
G57881	SER14-120-40-150	0,014	4	15	4	3,9	6	16
G57882	SER14-120-40-220	0,014	4	22	4	3,9	6	16

Algunos productos o referencias de producto pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o con Atención al cliente y distribución de Cook para obtener más información. Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

ADVANCE SERENITY 14 REGIÓN INFRAPOPLÍTEA

Referencia	Referencia de producto	Diámetro de la guía inch	Diámetro del balón hinchado mm	Longitud del balón cm	Introducción recomendado Fr	Diámetro exacto del catéter Fr	Presión nominal atm	Presión máxima de hinchado (RBP) atm
Guía de 0,014 inch de diámetro, portador “sobre guía” de 150 cm de largo								
G57883	SER14-150-20-20	0,014	2	2	4	3,9	6	16
G57884	SER14-150-20-40	0,014	2	4	4	3,9	6	16
G57885	SER14-150-20-60	0,014	2	6	4	3,9	6	16
G57886	SER14-150-20-80	0,014	2	8	4	3,9	6	16
G57887	SER14-150-20-100	0,014	2	10	4	3,9	6	16
G57888	SER14-150-20-150	0,014	2	15	4	3,9	6	16
G57889	SER14-150-20-220	0,014	2	22	4	3,9	6	16
G57890	SER14-150-25-20	0,014	2,5	2	4	3,9	6	16
G57891	SER14-150-25-40	0,014	2,5	4	4	3,9	6	16
G57892	SER14-150-25-60	0,014	2,5	6	4	3,9	6	16
G57893	SER14-150-25-80	0,014	2,5	8	4	3,9	6	16
G57894	SER14-150-25-100	0,014	2,5	10	4	3,9	6	16
G57895	SER14-150-25-150	0,014	2,5	15	4	3,9	6	16
G57896	SER14-150-25-220	0,014	2,5	22	4	3,9	6	16
G57897	SER14-150-30-20	0,014	3	2	4	3,9	6	16
G57898	SER14-150-30-40	0,014	3	4	4	3,9	6	16
G57899	SER14-150-30-60	0,014	3	6	4	3,9	6	16
G57900	SER14-150-30-80	0,014	3	8	4	3,9	6	16
G57901	SER14-150-30-100	0,014	3	10	4	3,9	6	16
G57902	SER14-150-30-150	0,014	3	15	4	3,9	6	16
G57903	SER14-150-30-220	0,014	3	22	4	3,9	6	16
G57904	SER14-150-35-20	0,014	3,5	2	4	3,9	6	16
G57905	SER14-150-35-40	0,014	3,5	4	4	3,9	6	16
G57906	SER14-150-35-60	0,014	3,5	6	4	3,9	6	16
G57907	SER14-150-35-80	0,014	3,5	8	4	3,9	6	16
G57908	SER14-150-35-100	0,014	3,5	10	4	3,9	6	16
G57909	SER14-150-35-150	0,014	3,5	15	4	3,9	6	16
G57910	SER14-150-35-220	0,014	3,5	22	4	3,9	6	16
G57911	SER14-150-40-20	0,014	4	2	4	3,9	6	16
G57912	SER14-150-40-40	0,014	4	4	4	3,9	6	16
G57913	SER14-150-40-60	0,014	4	6	4	3,9	6	16
G57914	SER14-150-40-80	0,014	4	8	4	3,9	6	16
G57915	SER14-150-40-100	0,014	4	10	4	3,9	6	16
G57916	SER14-150-40-150	0,014	4	15	4	3,9	6	16
G57917	SER14-150-40-220	0,014	4	22	4	3,9	6	16

Algunos productos o referencias de producto pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o con Atención al cliente y distribución de Cook para obtener más información. Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

ADVANCE SERENITY 18 REGIÓN INFRAPOPLÍTEA

Referencia	Referencia de producto	Diámetro de la guía inch	Diámetro del balón hinchado mm	Longitud del balón cm	Introducción recomendado Fr	Diámetro exacto del catéter Fr	Presión nominal atm	Presión máxima de hinchado (RBP) atm
Guía de 0,018 inch, portador "sobre guía" de 120 cm								
G58934	SER18-120-20-20	0,018	2	2	4	3,6	8	16
G58935	SER18-120-20-40	0,018	2	4	4	3,6	8	16
G58936	SER18-120-20-60	0,018	2	6	4	3,6	8	16
G58937	SER18-120-20-80	0,018	2	8	4	3,6	8	16
G58938	SER18-120-20-100	0,018	2	10	4	3,6	8	16
G58969	SER18-120-20-150	0,018	2	15	4	3,6	8	16
G58940	SER18-120-20-220	0,018	2	22	4	3,6	8	16
G58941	SER18-120-25-20	0,018	2,5	2	4	3,6	8	16
G58942	SER18-120-25-40	0,018	2,5	4	4	3,6	8	16
G58943	SER18-120-25-60	0,018	2,5	6	4	3,6	8	16
G58944	SER18-120-25-80	0,018	2,5	8	4	3,6	8	16
G58945	SER18-120-25-100	0,018	2,5	10	4	3,6	8	16
G58946	SER18-120-25-150	0,018	2,5	15	4	3,6	8	16
G58947	SER18-120-25-220	0,018	2,5	22	4	3,6	8	16
G58939	SER18-120-30-20	0,018	3	2	4	3,6	8	16
G58948	SER18-120-30-40	0,018	3	4	4	3,6	8	16
G58949	SER18-120-30-60	0,018	3	6	4	3,6	8	16
G58950	SER18-120-30-80	0,018	3	8	4	3,6	8	16
G58951	SER18-120-30-100	0,018	3	10	4	3,6	8	16
G58952	SER18-120-30-150	0,018	3	15	4	3,6	8	16
G58953	SER18-120-30-220	0,018	3	22	4	3,6	8	16
G58954	SER18-120-35-20	0,018	3,5	2	4	3,6	8	16
G58955	SER18-120-35-40	0,018	3,5	4	4	3,6	8	16
G58956	SER18-120-35-60	0,018	3,5	6	4	3,6	8	16
G58957	SER18-120-35-80	0,018	3,5	8	4	3,6	8	16
G58958	SER18-120-35-100	0,018	3,5	10	4	3,6	8	16
G58959	SER18-120-35-150	0,018	3,5	15	4	3,6	8	16
G58960	SER18-120-35-220	0,018	3,5	22	4	3,6	8	16
G58961	SER18-120-40-20	0,018	4	2	4	3,6	8	16
G58962	SER18-120-40-40	0,018	4	4	4	3,6	8	16
G58963	SER18-120-40-60	0,018	4	6	4	3,6	8	16
G58964	SER18-120-40-80	0,018	4	8	4	3,6	8	16
G58965	SER18-120-40-100	0,018	4	10	4	3,6	8	16
G58966	SER18-120-40-150	0,018	4	15	4	3,6	8	16
G58967	SER18-120-40-220	0,018	4	22	4	3,6	8	16

Algunos productos o referencias de producto pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o con Atención al cliente y distribución de Cook para obtener más información. Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

ADVANCE SERENITY 18 REGIÓN INFRAPOPLÍTEA

Referencia	Referencia de producto	Diámetro de la guía inch	Diámetro del balón hinchado mm	Longitud del balón cm	Introducción recomendado Fr	Diámetro exacto del catéter Fr	Presión nominal atm	Presión máxima de hinchado (RBP) atm
Guía de 0,018 inch, portador "sobre guía" de 150 cm								
G57918	SER18-150-20-20	0,018	2	2	4	3,6	8	16
G57919	SER18-150-20-40	0,018	2	4	4	3,6	8	16
G57920	SER18-150-20-60	0,018	2	6	4	3,6	8	16
G57921	SER18-150-20-80	0,018	2	8	4	3,6	8	16
G57922	SER18-150-20-100	0,018	2	10	4	3,6	8	16
G57923	SER18-150-20-150	0,018	2	15	4	3,6	8	16
G57924	SER18-150-20-220	0,018	2	22	4	3,6	8	16
G57945	SER18-150-25-20	0,018	2,5	2	4	3,6	8	16
G57946	SER18-150-25-40	0,018	2,5	4	4	3,6	8	16
G57947	SER18-150-25-60	0,018	2,5	6	4	3,6	8	16
G57948	SER18-150-25-80	0,018	2,5	8	4	3,6	8	16
G57949	SER18-150-25-100	0,018	2,5	10	4	3,6	8	16
G57950	SER18-150-25-150	0,018	2,5	15	4	3,6	8	16
G57951	SER18-150-25-220	0,018	2,5	22	4	3,6	8	16
G57925	SER18-150-30-20	0,018	3	2	4	3,6	8	16
G57926	SER18-150-30-40	0,018	3	4	4	3,6	8	16
G57927	SER18-150-30-60	0,018	3	6	4	3,6	8	16
G57928	SER18-150-30-80	0,018	3	8	4	3,6	8	16
G57929	SER18-150-30-100	0,018	3	10	4	3,6	8	16
G57952	SER18-150-30-150	0,018	3	15	4	3,6	8	16
G57930	SER18-150-30-220	0,018	3	22	4	3,6	8	16
G57931	SER18-150-35-20	0,018	3,5	2	4	3,6	8	16
G57932	SER18-150-35-40	0,018	3,5	4	4	3,6	8	16
G57933	SER18-150-35-60	0,018	3,5	6	4	3,6	8	16
G57934	SER18-150-35-80	0,018	3,5	8	4	3,6	8	16
G57935	SER18-150-35-100	0,018	3,5	10	4	3,6	8	16
G57936	SER18-150-35-150	0,018	3,5	15	4	3,6	8	16
G57937	SER18-150-35-220	0,018	3,5	22	4	3,6	8	16
G57938	SER18-150-40-20	0,018	4	2	4	3,6	8	16
G57939	SER18-150-40-40	0,018	4	4	4	3,6	8	16
G57944	SER18-150-40-60	0,018	4	6	4	3,6	8	16
G57940	SER18-150-40-80	0,018	4	8	4	3,6	8	16
G57941	SER18-150-40-100	0,018	4	10	4	3,6	8	16
G57942	SER18-150-40-150	0,018	4	15	4	3,6	8	16
G57943	SER18-150-40-220	0,018	4	22	4	3,6	8	16

Algunos productos o referencias de producto pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o con Atención al cliente y distribución de Cook para obtener más información. Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

ADVANCE SERENITY 18 REGIÓN FEMOROPOPLÍTEA

Referencia	Referencia de producto	Diámetro de la guía inch	Diámetro del balón hinchado mm	Longitud del balón cm	Introducción recomendado Fr	Diámetro exacto del catéter Fr	Presión nominal atm	Presión máxima de hinchado (RBP) atm
Guía de 0,018 inch de diámetro, portador "sobre guía" de 90 cm de largo								
G59753	SER18-90-50-20	0,018	5	2	4	3,6	8	16
G59754	SER18-90-50-40	0,018	5	4	4	3,6	8	16
G59755	SER18-90-50-60	0,018	5	6	4	3,6	8	16
G59756	SER18-90-50-80	0,018	5	8	4	3,6	8	16
G59757	SER18-90-50-100	0,018	5	10	4	3,6	8	16
G59758	SER18-90-50-120	0,018	5	12	4	3,6	8	16
G59759	SER18-90-50-150	0,018	5	15	4	3,6	8	16
G59760	SER18-90-60-20	0,018	6	2	4	3,6	8	16
G59761	SER18-90-60-40	0,018	6	4	4	3,6	8	16
G59762	SER18-90-60-60	0,018	6	6	4	3,6	8	16
G59763	SER18-90-60-80	0,018	6	8	4	3,6	8	16
G59764	SER18-90-60-100	0,018	6	10	4	3,6	8	16
G59765	SER18-90-60-120	0,018	6	12	4	3,6	8	16
G59766	SER18-90-60-150	0,018	6	15	4	3,6	8	16
G59767	SER18-90-70-20	0,018	7	2	4	3,6	8	14
G59768	SER18-90-70-40	0,018	7	4	4	3,6	8	14
G59769	SER18-90-70-60	0,018	7	6	4	3,6	8	14
G59770	SER18-90-70-80	0,018	7	8	5	4,6	8	14
G59771	SER18-90-70-100	0,018	7	10	5	4,6	8	14
G59772	SER18-90-70-120	0,018	7	12	5	4,6	8	14
G59773	SER18-90-70-150	0,018	7	15	5	4,6	8	14
G59774	SER18-90-80-20	0,018	8	2	5	3,6	8	12
G59775	SER18-90-80-40	0,018	8	4	5	3,6	8	12
G59776	SER18-90-80-60	0,018	8	6	5	3,6	8	12
G59777	SER18-90-80-80	0,018	8	8	5	4,6	8	12
G59778	SER18-90-90-20	0,018	9	2	5	4,6	8	10
G59779	SER18-90-90-40	0,018	9	4	5	4,6	8	10
G59780	SER18-90-90-60	0,018	9	6	5	4,6	8	10
G59781	SER18-90-90-80	0,018	9	8	5	4,6	8	10
G59782	SER18-90-10-20	0,018	10	2	5	4,6	8	10
G59783	SER18-90-10-40	0,018	10	4	5	4,6	8	10
G59784	SER18-90-10-60	0,018	10	6	5	4,6	8	10
G59785	SER18-90-10-80	0,018	10	8	5	4,6	8	10

Algunos productos o referencias de producto pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o con Atención al cliente y distribución de Cook para obtener más información. Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.


ADVANCE SERENITY 18 REGIÓN FEMOROPLOLÍTEA

Referencia	Referencia de producto	Diámetro de la guía inch	Diámetro del balón hinchado mm	Longitud del balón cm	Introducción recomendado Fr	Diámetro exacto del catéter Fr	Presión nominal atm	Presión máxima de hinchado (RBP) atm
Guía de 0,018 inch de diámetro, portador "sobre guía" de 135 cm de largo								
G59786	SER18-135-50-20	0,018	5	2	4	3,6	8	16
G59787	SER18-135-50-40	0,018	5	4	4	3,6	8	16
G59788	SER18-135-50-60	0,018	5	6	4	3,6	8	16
G59789	SER18-135-50-80	0,018	5	8	4	3,6	8	16
G59790	SER18-135-50-100	0,018	5	10	4	3,6	8	16
G59791	SER18-135-50-120	0,018	5	12	4	3,6	8	16
G59792	SER18-135-50-150	0,018	5	15	4	3,6	8	16
G59793	SER18-135-60-20	0,018	6	2	4	3,6	8	16
G59794	SER18-135-60-40	0,018	6	4	4	3,6	8	16
G59795	SER18-135-60-60	0,018	6	6	4	3,6	8	16
G59796	SER18-135-60-80	0,018	6	8	4	3,6	8	16
G59797	SER18-135-60-100	0,018	6	10	4	3,6	8	16
G59798	SER18-135-60-120	0,018	6	12	4	3,6	8	16
G59799	SER18-135-60-150	0,018	6	15	4	3,6	8	16
G59800	SER18-135-70-20	0,018	7	2	4	3,6	8	14
G59801	SER18-135-70-40	0,018	7	4	4	3,6	8	14
G59802	SER18-135-70-60	0,018	7	6	4	3,6	8	14
G59803	SER18-135-70-80	0,018	7	8	5	4,6	8	14
G59804	SER18-135-70-100	0,018	7	10	5	4,6	8	14
G59805	SER18-135-70-120	0,018	7	12	5	4,6	8	14
G59820	SER18-135-70-150	0,018	7	15	5	4,6	8	14
G59806	SER18-135-80-20	0,018	8	2	5	4,6	8	12
G59807	SER18-135-80-40	0,018	8	4	5	4,6	8	12
G59808	SER18-135-80-60	0,018	8	6	5	4,6	8	12
G59810	SER18-135-80-80	0,018	8	8	5	4,6	8	12
G59809	SER18-135-90-20	0,018	9	2	5	4,6	8	10
G59811	SER18-135-90-40	0,018	9	4	5	4,6	8	10
G59812	SER18-135-90-60	0,018	9	6	5	4,6	8	10
G59813	SER18-135-90-80	0,018	9	8	5	4,6	8	10
G59814	SER18-135-10-20	0,018	10	2	5	4,6	8	10
G59815	SER18-135-10-40	0,018	10	4	5	4,6	8	10
G59816	SER18-135-10-60	0,018	10	6	5	4,6	8	10
G59817	SER18-135-10-80	0,018	10	8	5	4,6	8	10


Algunos productos o referencias de producto pueden no estar disponibles en todos los mercados. Póngase en contacto con su representante local o con Atención al cliente y distribución de Cook para obtener más información. Puede encontrar información sobre los riesgos que comporta cada producto en las instrucciones de uso disponibles en cookmedical.eu.

Optimice sus intervenciones con nuestro equipo específico para miembros inferiores.

ACCEDER

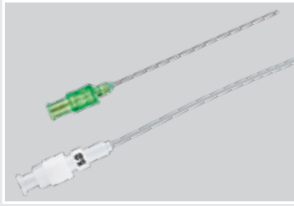


Equipo introductor
Microcannula®

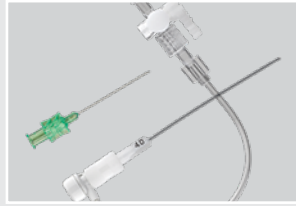

Equipo de acceso pedio
Microcannula®

DIRIGIR

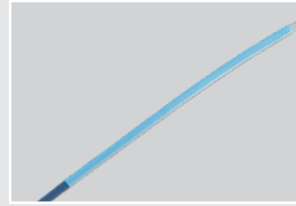

Vaina guía
Flexor® Shuttle®




Vaina guía
Flexor®


ATRAVESAR



Microguía
Approach® CTO

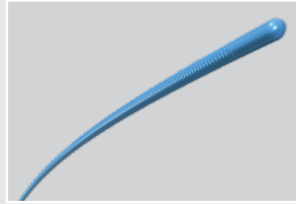


Microguía
Approach® Hydro ST

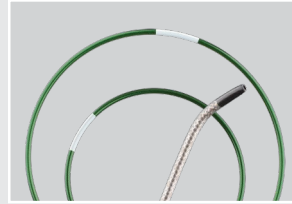


Catéter de soporte
CXI®


TRATAR

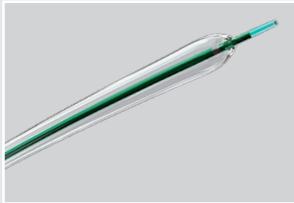


Catéter balón de dilatación
de perfil ultrabajo para ATP
Advance Micro® 14

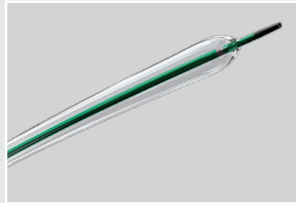


Catéter balón de dilatación
de perfil bajo para ATP
Advance® 14LP

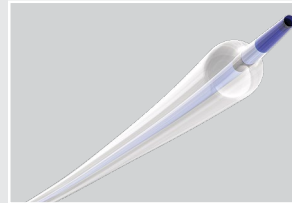

Catéter balón de dilatación
hidrofílico para PTA
Advance Serenity® 14 y 18

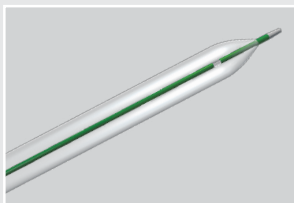

Catéter balón de dilatación
de perfil bajo para ATP
Advance® 35LP

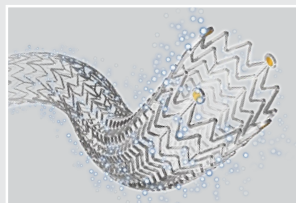

Stent periférico liberador
de fármaco
Zilver® PTX®

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4