



Zuverlässige Prävention von Lungenembolien mit Celect Platinum^{®1,2}

1,55%
wiederkehrende
Lungenembolie-
rate^{1,2}

Sehr effektiv bei der
Verhinderung von
Lungenembolien und
gleichzeitig sehr gut
entfernbar.¹

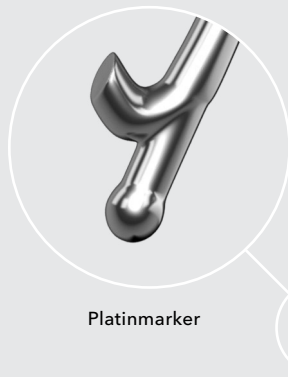

Platinmarker

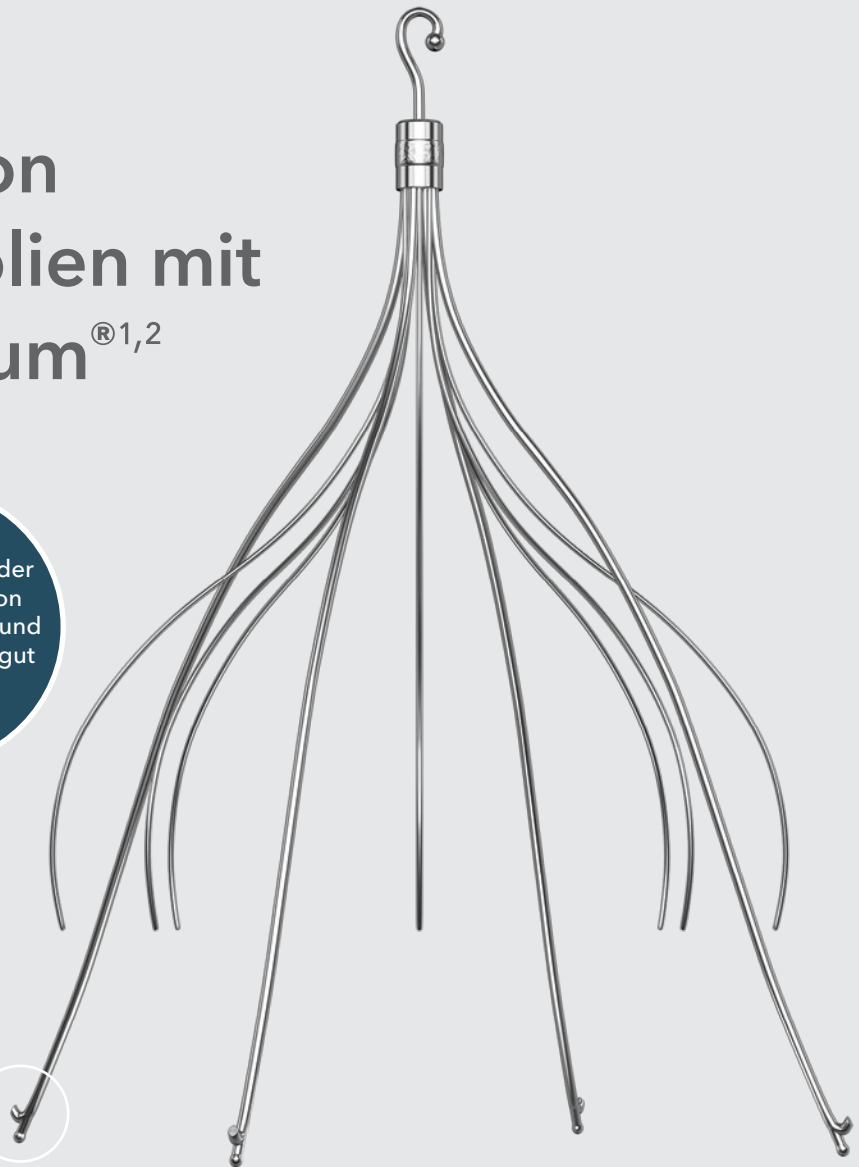

Celect Platinum[®]

VENA CAVA FILTER

Klinisch erfolgreiches Design

Mit den vier röntgendichten Platinmarkern kann die Genauigkeit der Platzierung überprüft werden.³ Anker und Platinmarker an den Beinchen des Filters ermöglichen eine sichere Kavalfixierung.⁴

Präzise, kontrollierte Platzierung

Das NavAlign™-Platzierungssystem ermöglicht, den Filter präzise einzusetzen und sorgt so für eine einfache Steuerung und genaue Platzierung.⁵

Hergestellt aus einzigartigem Material

Cook-Filter bestehen aus einer langlebigen Conichrome[®]-Legierung.^{1,6}

Celect Platinum®

VENA CAVA FILTER

Das Cook Celect Platinum Filter-Implantat ist zur Vorbeugung einer symptomatischen Lungenembolie (PE) durch das Auffangen von Blutgerinnseln, die sich in der infrarenalen unteren Hohlvene bewegen, in den folgenden klinischen Situationen indiziert:

- Patienten mit Anzeichen einer Lungenembolie oder einer tiefen Venenthrombose (TVT) in der unteren Hohlvene oder in den Venen der unteren Extremitäten und entweder einer absoluten oder relativen Kontraindikation einer Antikoagulation, einem Versagen der Antikoagulation oder einem hohen Risiko für Komplikationen durch die Antikoagulation
- Patienten im perioperativen Umfeld mit einer Vorgeschichte einer Lungenembolie oder TVT, bei denen die Antikoagulation unterbrochen werden muss
- Patienten mit hohem Risiko für eine TVT oder Lungenembolie, bei denen jedoch aufgrund eines hohen Komplikationsrisikos davon ausgegangen wird, dass sie keine Antikoagulation erhalten können

Der Cook Celect Platinum Filter kann bei klinischer Indikation wieder entfernt werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Optionale Filterentnahme“ der Gebrauchsanweisung.

Bestellnummer	Referenznummer	Schleusendurchmesser Fr	Max. indizierter Hohlvenendurchmesser für die Filterplatzierung mm	Länge des Filters mm	Arbeitslänge der Schleuse cm
Celect Platinum® Vena Cava Filter für den Femoralvenenzugang					
G34501	IGTCFS-65-2-FEM-CELECT-PT	7	30	49	65
Celect Platinum® Vena Cava Filter für den Jugularvenenzugang					
G34310	IGTCFS-65-2-JUG-CELECT-PT	7	30	49	65
Celect Platinum® Vena Cava Filter für den Femoral- und Jugularvenenzugang					
G34504	IGTCFS-65-2-UNI-CELECT-PT	7	30	49	65

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst und Vertrieb. Lesen Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung auf cookmedical.eu.

1. Lyon SM, Riojas GE, Uberoi R, et al. Short- and long-term retrievability of the Celect vena cava filter: results from a multi-institutional registry. *J Vasc Interv Radiol.* 2009;20(11):1441-1448.
2. Prospective study of the Cook Celect Filter, including permanent and retrievable use (Study Protocol #05-507) final study report; September 2009.
3. Demonstrated in simulated use tests: D00302649 and D00006045 (TR 4524).
4. Demonstrated in testing: D00006050 (TR 3789) and D00006018 (TR-3787).
5. Celect Platinum® Vena Cava Filter: View the Instructions for Use for a thorough examination of the procedural instructions, intended use, contraindications, warnings and precautions, and potential adverse events.
6. Lee BE, Van Allan RJ, Friedman ML, et al. Complications and retrieval characteristics of Celect Platinum inferior vena cava filters. *J Vasc Surg Venous Lymphat Disord.* 2018;6(2):163-172.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4