

Trasferire gli  
embrioni in tutta  
sicurezza.



EMBRYO TRANSFER

## Sommario

<b>Grafico di confronto delle caratteristiche</b> .....	4
---------------------------------------------------------	---

### **Guardia™**

Catetere per embryo transfer Guardia Access .....	7
Catetere per embryo transfer Guardia AccessET .....	8
Catetere per embryo transfer Guardia Access Nano .....	8
Catetere per embryo transfer Guardia Access con cannula di supporto interna.....	9
Otturatore modellabile Guardia Access.....	10
Otturatore Guardia.....	10

### **Soft-Pass™**

Set catetere per embryo transfer Soft-Pass .....	12
Otturatore modellabile Soft-Pass.....	13

## Qualunque siano le vostre necessità di trasferimento embrioni, Cook Medical sarà in grado di aiutarvi.

Il nostro portafoglio di prodotti comprende cateteri diritti e precurvati, cateteri e otturatori di prova e simulati, nonché cateteri di lavaggio e intratubali.

Oltre a offrire dispositivi in una vasta gamma di dimensioni e configurazioni, possiamo fornire caratteristiche e tecnologie esclusive, come la tecnologia EchoTip®.

Cercate il marchio EchoTip quando avete bisogno di una punta ecogenica con visualizzazione luminosa in ambito ecografico. I cateteri EchoTip migliorano la visualizzazione grazie a bande in acciaio inossidabile con rientranze che riflettono le onde a ultrasuoni.

## Formazione sulla simulazione



Migliorate le vostre capacità di embryo transfer con un simulatore di embryo transfer ASRM. Contattare il proprio rappresentante locale Cook Medical per chiedere informazioni sulle opportunità di formazione.



## Esplorate le caratteristiche dei prodotti






		Catetere guida in polimetilpentene	Catetere guida in polietilene	Catetere guida in PTFE	Tecnologia Microvol™	Cannula di supporto	Indicatori distali	Indicatori prossimali	EchoTip	Otturatore rigido disponibile	Otturatore modellabile disponibile	Punta a bulbo	Precurvato
	<b>Catetere per embryo transfer Guardia Access</b>												
	G34782 K-JETS-6019	•			•	•		•		•	•	•	•
	G34783 K-JETS-7019	•			•	•		•		•	•	•	•
	<b>Catetere per embryo transfer curvo Guardia AccessET</b>												
	G53247 K-JETS-6019-ET	•			•	•		•	•	•	•	•	•
	G53007-K-JETS-7019-ET	•			•	•		•	•	•	•	•	•
	<b>Catetere per embryo transfer Guardia Access con cannula di supporto interna</b>												
	G02346 K-JETS-7019-INT	•			•	•		•		•	•	•	•
	<b>Catetere per embryo transfer Guardia Access Nano</b>												
	G24216 K-JETS-551910-S	•			•	•	•	•			•	•	•

### Altri cateteri per embryo transfer

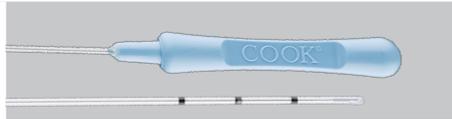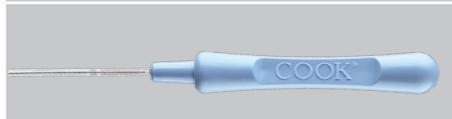	<b>Otturatore modellabile Guardia Access</b> G34784-K-JET-7002
	<b>Otturatore Guardia</b> G54189 J-UOB-2828 modellabile G54190 J-UOB-4028 modellabile G54191 J-UOB-4028-ST rigido
	<b>Otturatore modellabile Soft-Pass</b> G53744 J-SP-4420

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Rivolgersi al proprio rappresentante locale Cook o al team di Customer Support & Distribution per i dettagli.

## Esplorate le caratteristiche dei prodotti

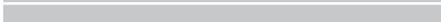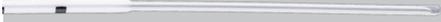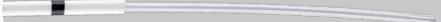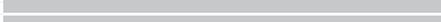		Catetere guida in polimetilpentene	Catetere guida in polietilene	Catetere guida in PTFE	Tecnologia Microvol	Cannula di supporto	Indicatori distali	Indicatori prossimali	EchoTip	Otturatore rigido disponibile	Otturatore modellabile disponibile	Punta a bulbo	Precurvato
	<b>Set catetere per embryo transfer Soft-Pass</b>												
	G17934 K-J-SPPE-681710 (con supporto)	•			•		•	•		•	•		
	G17932 K-J-SPPE-681200 (senza supporto)	•					•	•		•	•		
	G17933 K-J-SPPE-681700 (senza supporto)	•					•	•		•	•		
	<b>Set catetere per embryo transfer Soft-Pass con EchoTip</b>												
	G18954 K-J-SPPE-681210-ET (con supporto)	•			•		•	•	•	•	•		
	G18955 K-J-SPPE-681710-ET (con supporto)	•			•		•	•	•	•	•		
	G18657 K-J-SPPE-681200-ET (senza supporto)	•					•	•	•	•	•		
	G18658 K-J-SPPE-681700-ET (senza supporto)	•					•	•	•	•			
	<b>Set catetere per embryo transfer di prova Soft-Pass</b>												
G17678 J-SPPE-681200-MC	•					•	•		•	•			
	<b>Set catetere per embryo transfer di prova Soft-Pass con punta ecogenica</b>												
G30399 J-SPPE-681710-ET-MC	•			•		•	•	•	•	•			
	<b>Catetere per embryo transfer Soft-Pass</b>												
	G17931 K-J-SP-681710 (con supporto)		•		•		•	•		•	•		
	G17902 K-J-SP-681700 (senza supporto)		•				•	•		•	•		
	<b>Catetere per embryo transfer Soft-Pass con EchoTip</b>												
G27206 K-J-SP-681700-ET		•				•	•	•	•	•			

# Guardia™

EMBRYO TRANSFER CATHETERS

I cateteri per embryo transfer  
Guardia sono stati progettati  
per semplificare l'accesso.

La punta a bulbo arrotondata  
facilita il passaggio attraverso  
la cervice.


La punta precurvata  
presenta un angolo  
simile a quello della  
cervice.

Opzione EchoTip  
disponibile

La tecnologia Microvol  
riduce al minimo il volume  
dei mezzi richiesto.


Il fermo cervicale regolabile  
indica la profondità del  
catetere nella cervice.

## Catetere per embryo transfer Guardia Access

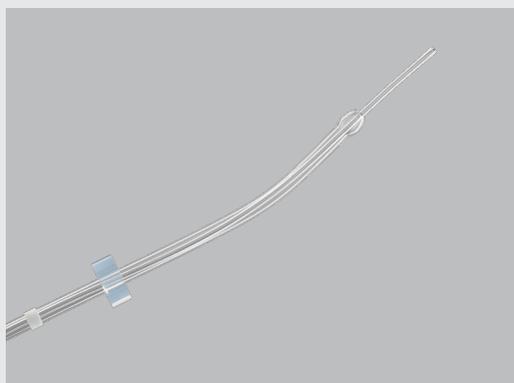

Utilizzato per posizionare gli embrioni fecondati in vitro (IVF) nella cavità uterina.

- Il catetere guida è curvo per facilitarne l'inserimento.
- La punta a bulbo arrotondata del catetere guida facilita il passaggio attraverso la cervice.
- Il catetere di trasferimento è morbido e flessibile.
- La tecnologia Microvol™ riduce al minimo il volume dei mezzi richiesti.
- Il fermo cervicale è impostato su 4 cm e può essere regolato su 5 cm.
- I cateteri sono confezionati in buste sterili separate.

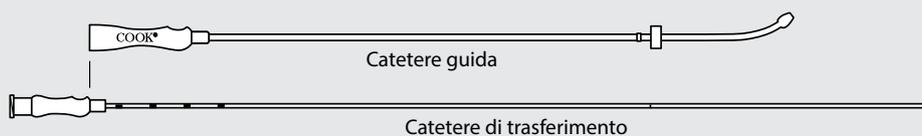


Codice di ordinazione	Codice prodotto	Catetere guida Fr	Lunghezza catetere guida cm	Catetere di trasferimento Fr	Lunghezza catetere di trasferimento cm	Tipo di connettore
G34782	K-JETS-6019	6,6	16,7	2,8	23	piccolo
G34783	K-JETS-7019	6,6	17,3	2,8	24	grande

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Rivolgersi al proprio rappresentante locale Cook o al team di Customer Support & Distribution per i dettagli.


I clienti dell'Unione europea devono consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle IFU all'indirizzo [www.cookmedical.eu](http://www.cookmedical.eu)

## Catetere per embryo transfer Guardia AccessET

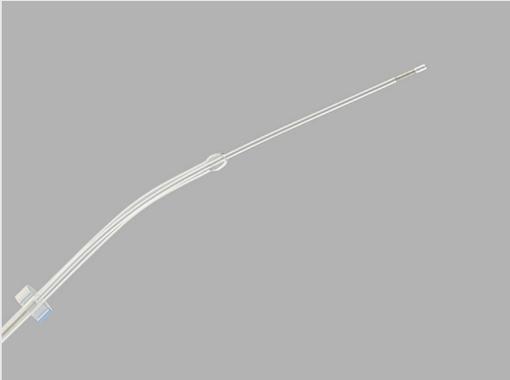

Utilizzato per posizionare gli embrioni fecondati in vitro (IVF) nella cavità uterina.


- La punta ecogenica del catetere di trasferimento migliora la visibilità in ambito ecografico.
- Il catetere guida è curvo per facilitarne l'inserimento.
- Il catetere guida è dotato di una punta a bulbo arrotondata per facilitare il passaggio attraverso la cervice.

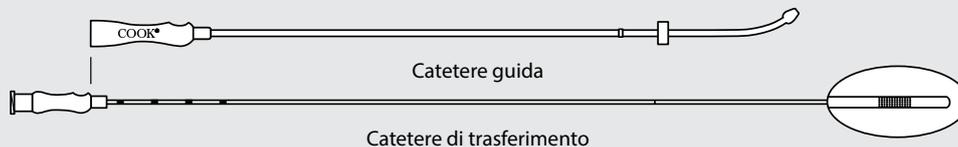

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Catetere guida Fr	Lunghezza catetere guida cm	Catetere di trasferimento Fr	Lunghezza catetere di trasferimento cm	Tipo di connettore
G53247	K-JETS-6019-ET	6,6	16,7	2,8	23	piccolo
G53007	K-JETS-7019-ET	6,6	17,3	2,8	24	grande


Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Rivolgersi al proprio rappresentante locale Cook o al team di Customer Support & Distribution per i dettagli.

## Catetere per embryo transfer Guardia Access Nano

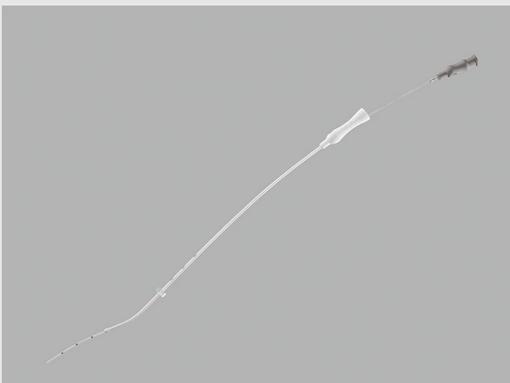

Utilizzato per posizionare gli embrioni fecondati in vitro (IVF) nella cavità uterina.


- Il diametro esterno della punta a bulbo del catetere guida è ridotto per un'anatomia più piccola.
- Il catetere di trasferimento è dotato di una cannula di supporto interna.

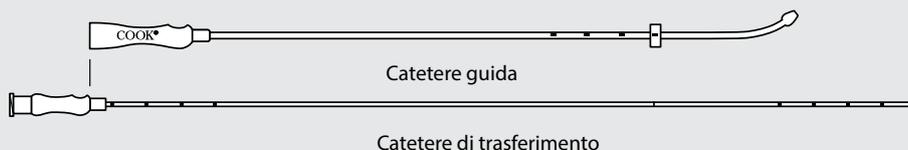

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Catetere guida Fr	Lunghezza catetere guida cm	Catetere di trasferimento Fr	Lunghezza catetere di trasferimento cm	Tipo di connettore
G24216	K-JETS-551910-S	5,5	17,3	2,8	24	grande


Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Rivolgersi al proprio rappresentante locale Cook o al team di Customer Support & Distribution per i dettagli.

## Catetere per embryo transfer Guardia Access con cannula di supporto interna

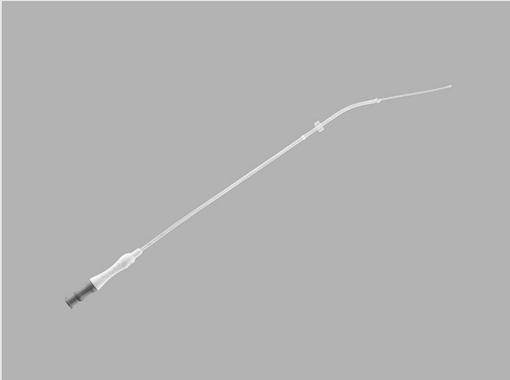

Utilizzato per posizionare gli embrioni fecondati in vitro (IVF) nella cavità uterina.


- La cannula di supporto integrata facilita il posizionamento del catetere di trasferimento.

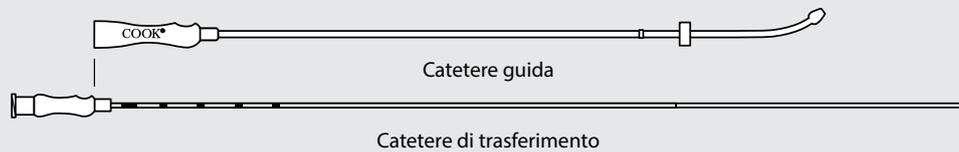

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Catetere guida Fr	Lunghezza catetere guida cm	Catetere di trasferimento Fr	Lunghezza catetere di trasferimento cm	Tipo di connettore
G02346	K-JETS-7019-INT	6,6	17,3	2,8	25	grande

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Rivolgersi al proprio rappresentante locale Cook o al team di Customer Support & Distribution per i dettagli.

## Otturatore modellabile Guardia Access

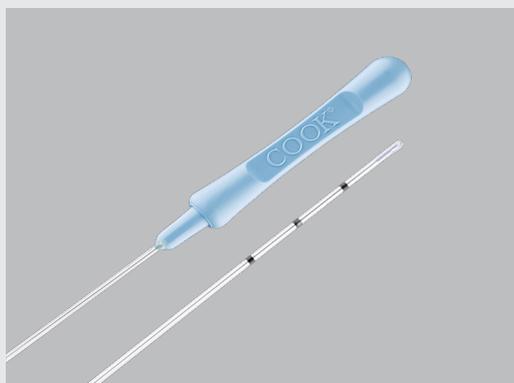

Utilizzato per integrare e assistere l'accesso uterino di un dispositivo per embryo transfer autorizzato e dimensionalmente compatibile per il posizionamento di embrioni fecondati in vitro (IVF) nella cavità uterina.

- Realizzato per adattarsi al catetere per embryo transfer Guardia Access standard.
- Modellabile per ottimizzarne la manovrabilità.



Codice di ordinazione	Codice prodotto	Fr	Lunghezza cm
G34784	K-JET-7002	4,0	19,9

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Rivolgersi al proprio rappresentante locale Cook o al team di Customer Support & Distribution per i dettagli.

## Otturatore Guardia



Utilizzato per integrare e assistere l'accesso uterino di un dispositivo per embryo transfer autorizzato e dimensionalmente compatibile per il posizionamento di embrioni fecondati in vitro (IVF) nella cavità uterina.

- La lunghezza regolabile è adatta per una vasta gamma di cateteri per embryo transfer Cook Medical e di altri produttori.
- Il connettore si blocca in posizione.



Codice di ordinazione	Codice prodotto	Fr	Lunghezza cm
<b>Modellabile</b>			
G54189	J-UOB-2828	2,8	28
G54190	J-UOB-4028	4,0	28
<b>Rigido</b>			
G54191	J-UOB-4028-ST	4,0	28

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Rivolgersi al proprio rappresentante locale Cook o al team di Customer Support & Distribution per i dettagli.


# Soft-Pass™

EMBRYO TRANSFER CATHETER SET

I cateteri per embryo transfer Soft-Pass sono morbidi e flessibili per facilitarne il posizionamento.

Opzione EchoTip disponibile

Indicatori di profondità distali sul catetere guida

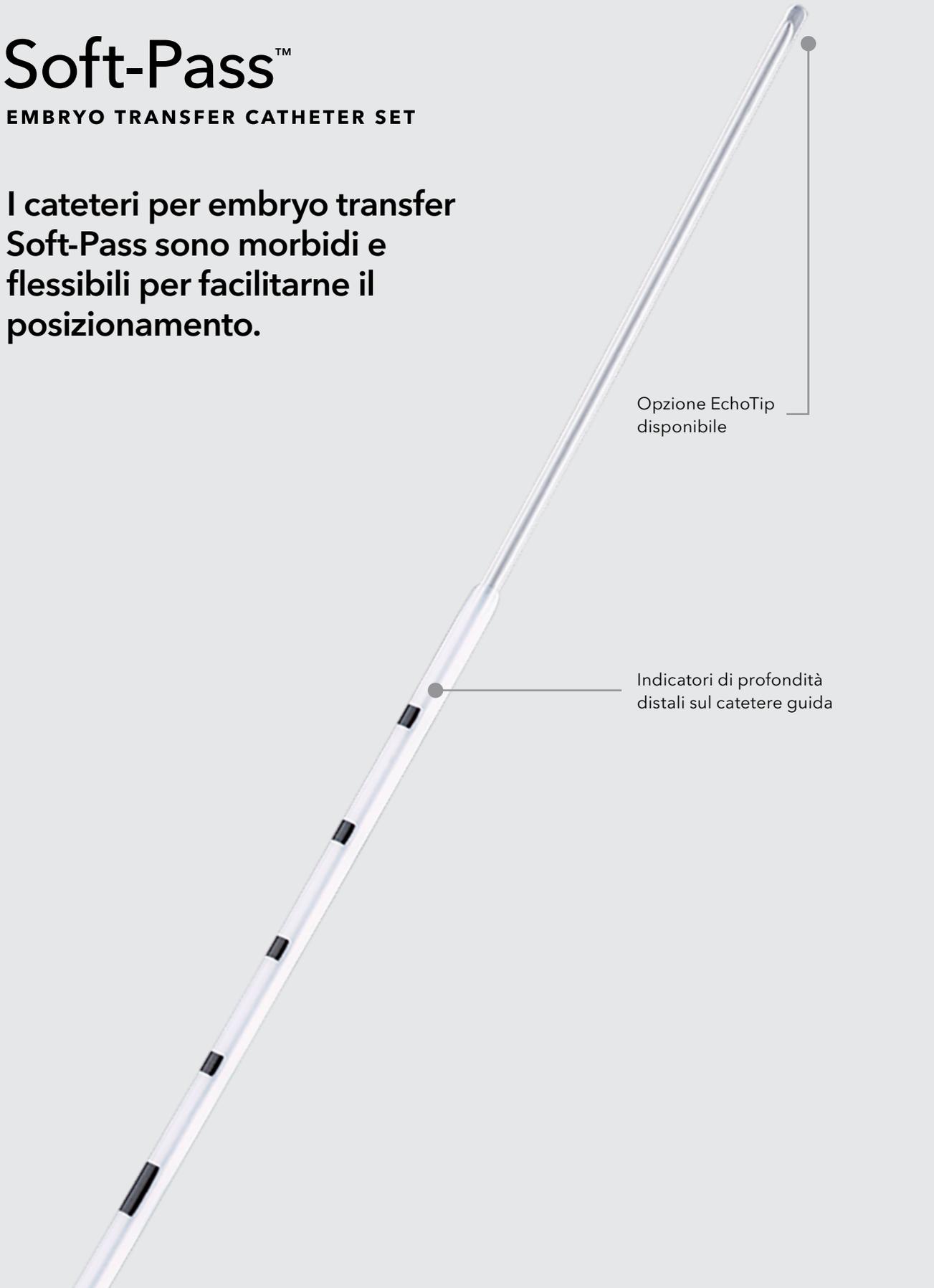


## Set catetere per embryo transfer Soft-Pass



Utilizzato per posizionare gli embrioni fecondati in vitro (IVF) nella cavità uterina.


- Il catetere guida morbido e flessibile è stato progettato per facilitare il posizionamento del set.
- I set sono disponibili con cateteri di trasferimento dotati di una cannula di supporto in acciaio inossidabile integrata per facilitare il posizionamento del catetere.

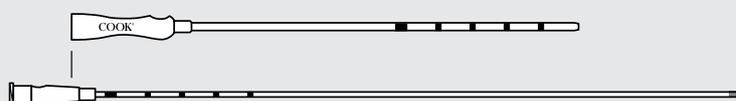


Codice di ordinazione	Codice prodotto	Catetere guida Fr	Lunghezza catetere guida cm	Catetere di trasferimento Fr	Lunghezza catetere di trasferimento cm
<b>Set standard</b>					
Con cannula di supporto; catetere guida in polietilene					
G17934	K-J-SPPE-681710	6,8	17	4,4	24,7
Con cannula di supporto; catetere guida in PTFE					
G17931	K-J-SP-681710	6,8	17	4,4	24,7
Senza cannula di supporto; catetere guida in polietilene					
G17932	K-J-SPPE-681200	6,8	12	4,4	19,7
G17933	K-J-SPPE-681700	6,8	17	4,4	24,7
Senza cannula di supporto; catetere guida in PTFE					
G17902	K-J-SP-681700	6,8	17	4,4	24,7
<b>Set ecogenici</b>					
Con cannula di supporto					
G18954	K-J-SPPE-681210-ET	6,8	12	4,4	19,7
G18955	K-J-SPPE-681710-ET	6,8	17	4,4	24,7
Senza cannula di supporto					
G18657	K-J-SPPE-681200-ET	6,8	12	4,4	19,7
G18658	K-J-SPPE-681700-ET	6,8	17	4,4	24,7

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Rivolgersi al proprio rappresentante locale Cook o al team di Customer Support & Distribution per i dettagli.

## Otturatore modellabile Soft-Pass

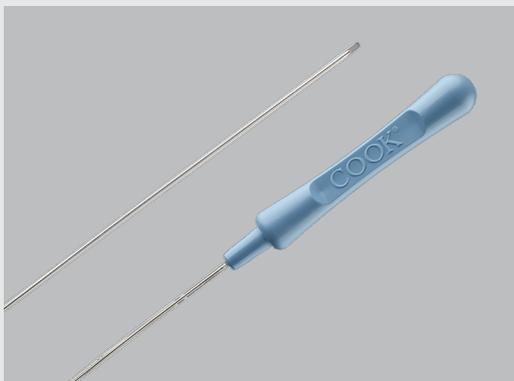

Utilizzato per integrare e assistere l'accesso uterino di un dispositivo per embryo transfer autorizzato e dimensionalmente compatibile per il posizionamento di embrioni fecondati in vitro (IVF) nella cavità uterina.

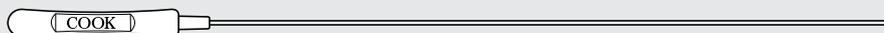

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>Codice prodotto</b>	Fr	Lunghezza cm
G53744	J-SP-4420	4,4	20,1

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Rivolgersi al proprio rappresentante locale Cook o al team di Customer Support & Distribution per i dettagli.

## Customer Service

EU Website: [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu)  
EDI: [cookmedical.eu/edi](http://cookmedical.eu/edi)  
Distributors: +353 61239240, [ssc.distributors@cookmedical.com](mailto:ssc.distributors@cookmedical.com)  
Austria: +43 179567121, [oe.orders@cookmedical.com](mailto:oe.orders@cookmedical.com)  
Belgium: +32 27001702, [be.orders@cookmedical.com](mailto:be.orders@cookmedical.com)  
Denmark: +45 38487607, [da.orders@cookmedical.com](mailto:da.orders@cookmedical.com)  
Finland: +358 972519996, [fi.orders@cookmedical.com](mailto:fi.orders@cookmedical.com)  
France: +33 171230269, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
Germany: +49 6950072804, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
Hungary: +36 17779199, [hu.orders@cookmedical.com](mailto:hu.orders@cookmedical.com)  
Iceland: +354 800 7615, [is.orders@cookmedical.com](mailto:is.orders@cookmedical.com)  
Ireland: +353 61239252, [ie.orders@cookmedical.com](mailto:ie.orders@cookmedical.com)  
Italy: +39 0269682853, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
Netherlands: +31 202013367, [nl.orders@cookmedical.com](mailto:nl.orders@cookmedical.com)  
Norway: +47 23162968, [no.orders@cookmedical.com](mailto:no.orders@cookmedical.com)  
Spain: +34 912702691, [es.orders@cookmedical.com](mailto:es.orders@cookmedical.com)  
Sweden: +46 858769468, [se.orders@cookmedical.com](mailto:se.orders@cookmedical.com)  
Switzerland - French: +41 448009609, [fr.orders@cookmedical.com](mailto:fr.orders@cookmedical.com)  
Switzerland - Italian: +41 448009609, [it.orders@cookmedical.com](mailto:it.orders@cookmedical.com)  
Switzerland - German: +41 448009609, [de.orders@cookmedical.com](mailto:de.orders@cookmedical.com)  
United Kingdom: +44 2073654183, [uk.orders@cookmedical.com](mailto:uk.orders@cookmedical.com)

USA Website: [cookmedical.com](http://cookmedical.com)

EDI: [cookmedical.com/edi.do](http://cookmedical.com/edi.do)

### Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335  
E-mail: [customersupport@cookmedical.com](mailto:customersupport@cookmedical.com)

### Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283  
E-mail: [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4