


Sichere Navigation.

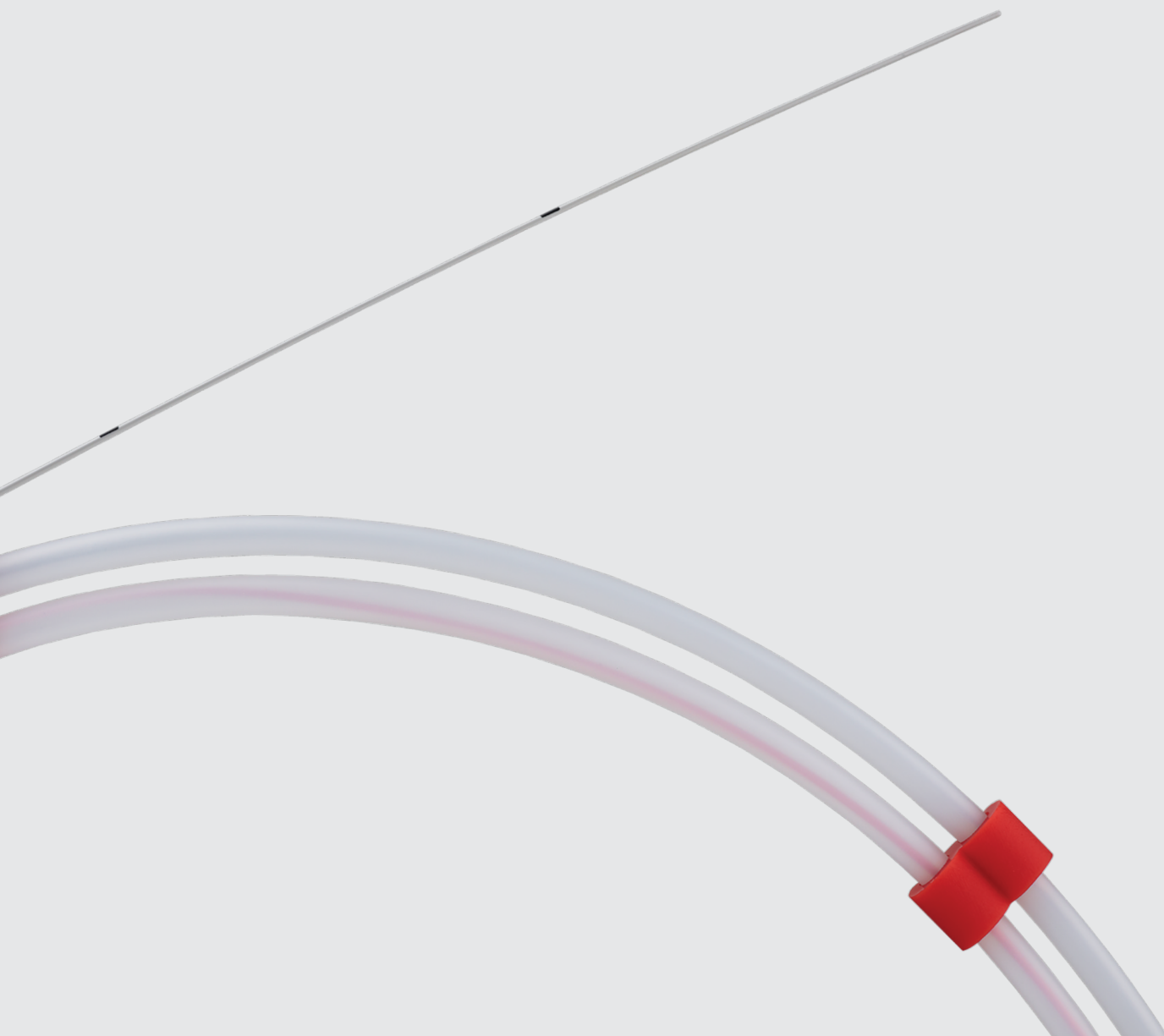

Roadrunner® PC
HYDROPHILIC WIRE GUIDE

Sichere Navigation.

Das Navigieren in der Anatomie des Patienten kann schwierig sein. Die Wahl des geeigneten Führungsdrahts kann Ihnen dies erleichtern. Der Roadrunner PC hydrophile Führungsdraht kann dazu verwendet werden, bei urologischen Eingriffen einen Zugang zum Ureter zu erlangen, einen Gang anzulegen und die Platzierung, den Wechsel und den Austausch von Medizinprodukten zu erleichtern. Eignet sich darüber hinaus zur Platzierung bzw. zum Austausch von Kathetern in stark gewundenen bzw. geknickten Uretern, zur Passage von Steinen auf dem Weg zur Niere sowie für Fälle, in denen eine erhöhte Steuerungsfähigkeit und deutliche Röntgensichtbarkeit erforderlich sind.


Merkmale und Vorteile

- Die hydrophile Beschichtung sorgt für eine geringere Reibung beim Vorschieben des Drahts
- Die Platinspitze gewährleistet eine gute Sichtbarkeit bei der Durchleuchtung
- Die Nitinolseele bietet Knickresistenz bei der Platzierung
- Durch die 1:1-Drehstabilität lässt sich der Draht bei der Platzierung präzise steuern

Optionen


- Körperkonfigurationen: Standard oder starr
- Spitzen: Angewinkelt, gerade oder doppeltflexibel
- Hydrophile Beschichtungen: AQ® oder Slip-Coat®
- Farbmarkierungen: Insgesamt 10 Farbmarkierungen, eine alle 5 cm, beginnend an der distalen Spitze (auf ausgewählten Führungsdrähten)

Der Roadrunner-Führungsdraht wird zusammen mit einem Olcott Torquer geliefert.

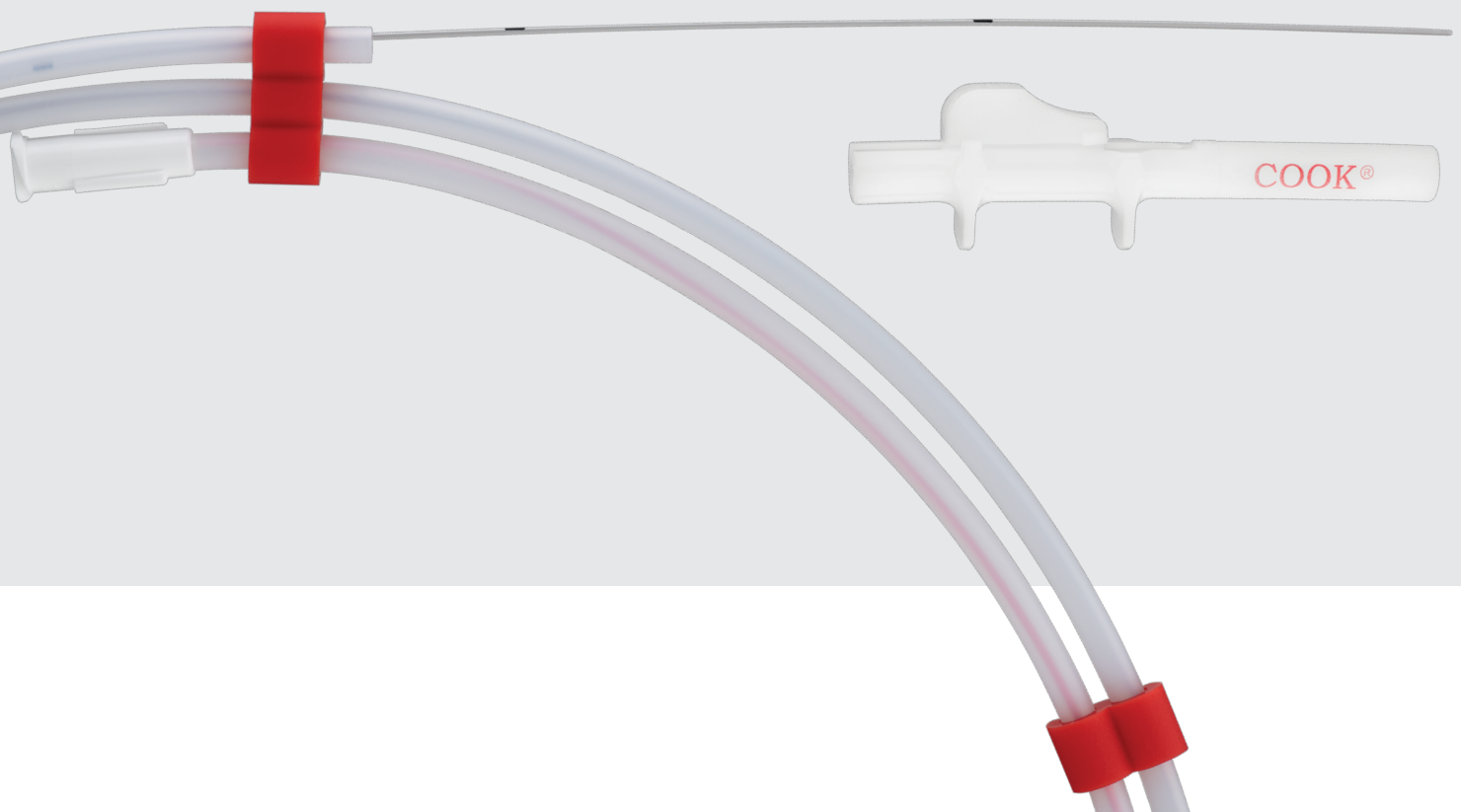

Roadrunner® PC

HYDROPHILIC WIRE GUIDE

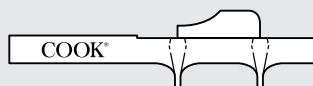

Bestellnummer	Referenznummer	Durchmesser Zoll	Länge cm	Konfiguration der Spitze	Beschichtung
Führungsdrähte mit Standardkörper					
G17540	RFSPC-035145	0,035	145	3 cm, angewinkelt	Slip-Coat
G17541	RFSPC-038145	0,038	145	3 cm, angewinkelt	Slip-Coat
G17542	RFSPC-035145-0	0,035	145	3 cm, gerade	Slip-Coat
G17539	RFSPC-038145-0	0,038	145	3 cm, gerade	Slip-Coat
Führungsdrähte mit Standardkörper und Farbmarkierungen					
G18629	RFSPC-035145-0-I-AQ	0,035	145	3 cm, gerade	AQ
Führungsdrähte mit starrem Körper*					
G34132	RPC-035145-5	0,035	145	8 cm, angewinkelt	
G34130	RPC-038145-5	0,038	145	8 cm, angewinkelt	Slip-Coat
G34131	RPC-035145-0-5	0,035	145	8 cm, gerade	Slip-Coat
G34129	RPC-038145-0-5	0,038	145	8 cm, gerade	Slip-Coat
Führungsdrähte mit starrem Körper – doppeltflexible Spitzen mit Farbmarkierungen					
G18792	RSPC-035145-DF-I-AQ	0,035	145	5 cm, doppeltflexibel	AQ
G18794	RSPC-038145-DF-I-AQ	0,038	145	5 cm, doppeltflexibel	AQ

* Verkauf in Kartons zu je 5 Stück

Slip-Coat ist eine eingetragene Marke der Angiotech Biocoatings Corp.

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst.

Bitte beachten Sie die Produktrisikohinweise in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335

E-mail: orders@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283

E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



1CC, URO-A4