


Trattamento laser più intelligente.

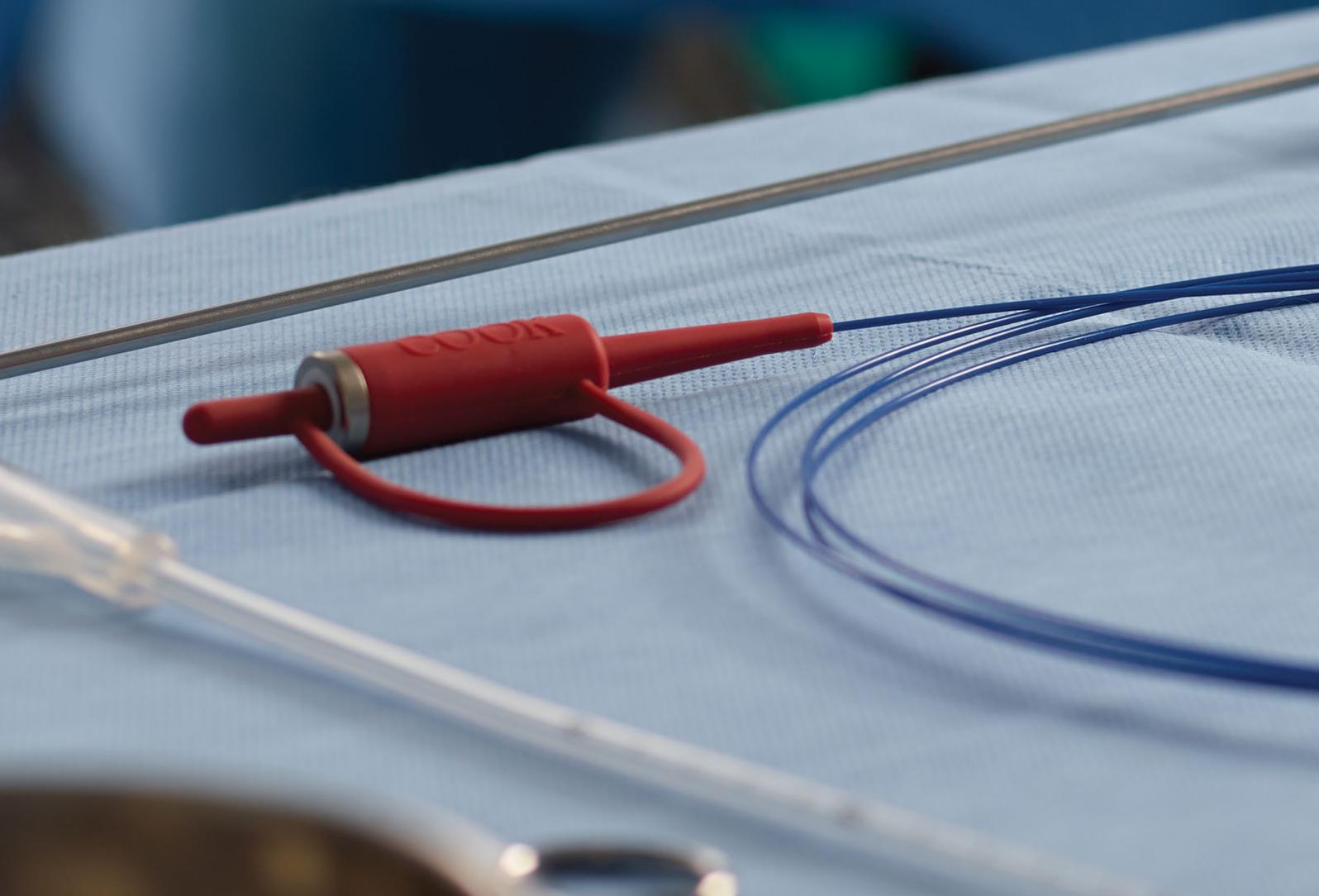



FIBRE LASER AD OLMIO

Le fibre laser ad olmio vi offrono la qualità Cook su una linea completa di fibre monouso. Sono le fibre esclusive per l'utilizzo con il sistema laser ad olmio Rhapsody H-30.

Specifiche della fibra laser ad olmio

Le fibre sono lunghe 3 m e presentano una punta di lavoro lunga 7 mm. Un materiale protettivo integrato (inserto in quarzo) nel connettore della fibra assorbe i raggi laser erranti e protegge il ponte ottico del sistema laser da eventuali danni. Questo materiale protettivo rende la lente di protezione una misura ridondante.¹

Un'impostazione a impulso lungo, come quella del sistema laser Rhapsody H-30 e di altri laser ad olmio, può ridurre significativamente la degradazione delle fibre laser e può diminuire i costi di trattamento.²

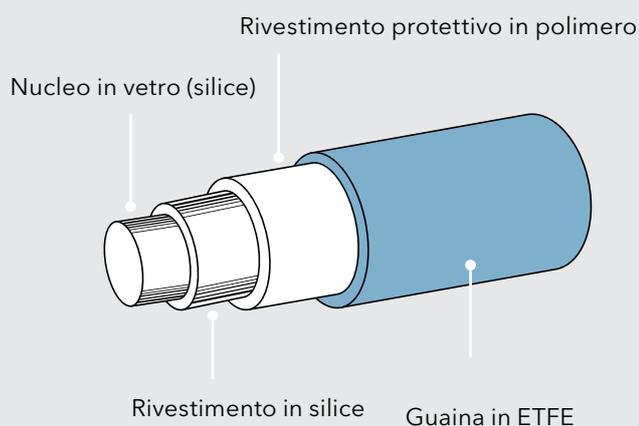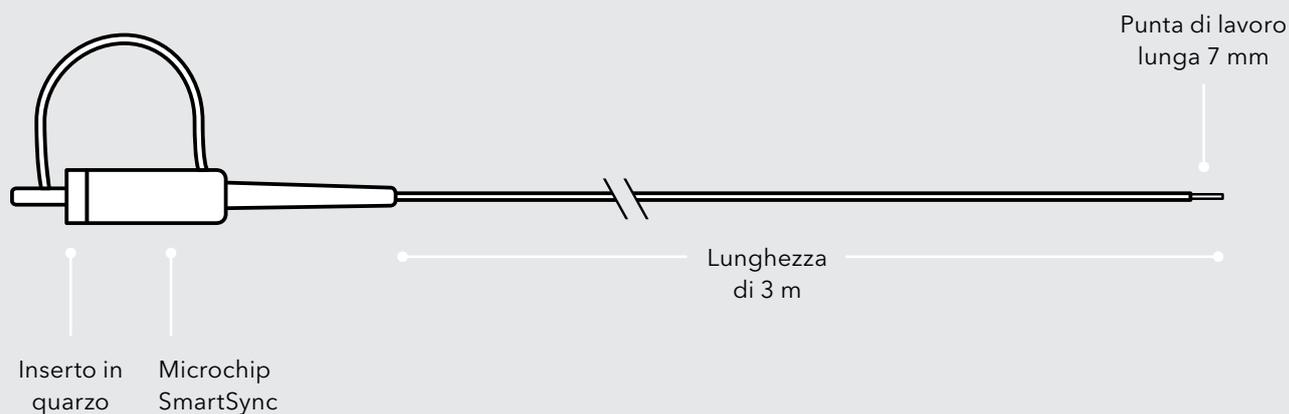

1. Disponibile solo su fibre con diametri inferiori a 550 µm.

2. Wollin DA, Ackerman A, Yang C, et al. Variable pulse duration from a new holmium:YAG laser: The effect on stone comminution, fiber tip degradation, and retropulsion in a dusting model. *Urology*. 2017;103:47-51.

La dimensione della fibra è determinata dal diametro del suo nucleo in vetro.

Diametro della fibra	Diametro del nucleo della fibra (+/-2%)		Diam. est. complessivo della fibra (+/-5%)	
	µm	Fr	µm	Fr
150	145	0,44	270	0,81
200	200	0,6	375	1,13
273	272	0,82	420	1,26
365	365	1,1	550	1,65
550	550	1,65	750	2,25
940	940	2,82	1400	4,2




Tecnologia SmartSync®

Le fibre laser ad olmio di Cook Medical con tecnologia SmartSync offrono un livello avanzato di funzionalità se utilizzate con il sistema laser ad olmio Rhapsody H-30. Il microchip SmartSync all'interno della fibra comunica con il laser Rhapsody H-30 per identificare le dimensioni della fibra collegata, limitare l'energia laser alla massima potenza di uscita consentita della fibra e registrare le informazioni sul laser per facilitare la risoluzione dei problemi. Tuttavia, i dati riservati dei pazienti non vengono raccolti.

Clip per fibra

Una clip per fibra adesiva è confezionata con ciascuna fibra e può essere utilizzata per tenere la fibra in posizione e lontano dal pavimento della sala operatoria durante la procedura.

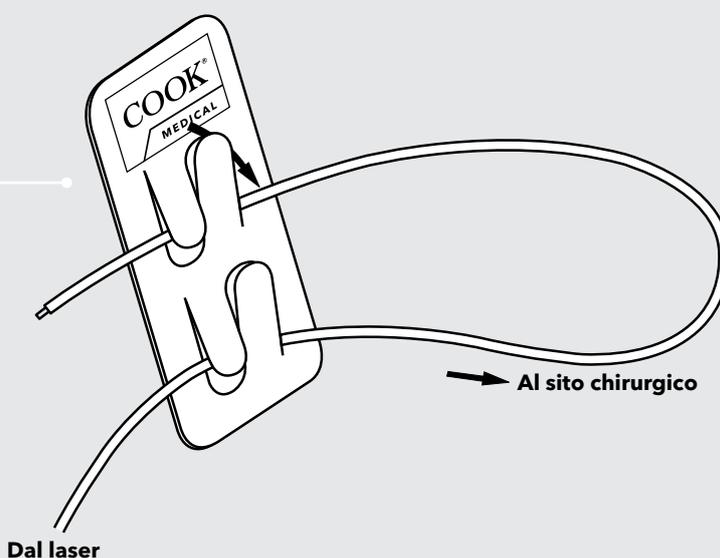

Per l'uso con Rhapsody H-30

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Diametro della fibra µm	Colore del connettore
Fibra laser ad olmio monouso			
Venduta in scatole da 3 pezzi			
G23553	HLF-S273-H30	273	rosso
G23552	HLF-S365-H30	365	rosso
G23734	HLF-S550-H30	550	rosso
G23735	HLF-S940-H30	940	rosso

Per l'uso con i sistemi laser Rhapsody H-30 e con connettore SMA-905

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Diametro della fibra µm	Colore del connettore
Fibra laser ad olmio monouso			
Venduta in scatole da 3 pezzi			
G25292	HLF-S150-HSMA	150	rosso
G25293	HLF-S200-HSMA	200	rosso
G25294	HLF-S273-HSMA	273	rosso
G25295	HLF-S365-HSMA	365	rosso
G25296	HLF-S550-HSMA	550	rosso
G25297	HLF-S940-HSMA	940	rosso

Alcuni prodotti o codici prodotto potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Delivery per maggiori informazioni. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle IFU all'indirizzo cookmedical.eu.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
 EDI: cookmedical.com/edi
Americas:
 Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: orders@cookmedical.com
Australia:
 Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com

CC, URO-A4

