


Zur Steinextraktion selbst unter schwierigsten Bedingungen

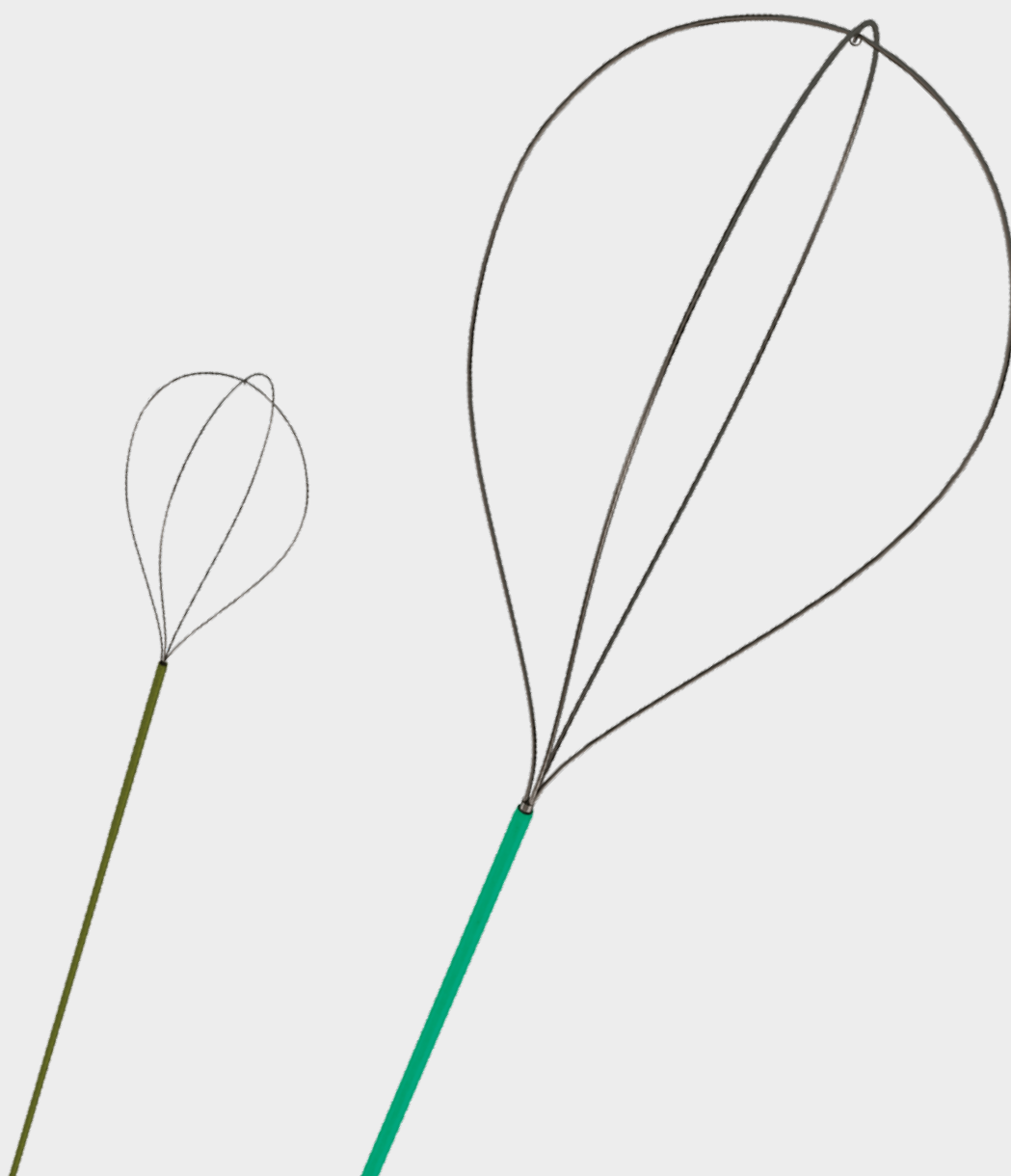

NCircle®

NITINOL TIPLESS STONE EXTRACTOR

NCircle®

NITINOL TIPLESS STONE EXTRACTOR

Die Steinextraktion mit minimalen Traumata kann zur Herausforderung werden, besonders wenn Sie das Sichtfeld ständig anpassen oder um einen Nierenkelchstein manövrieren müssen. Der NCircle Nitinol-Steinextraktor ohne Spitze unterstützt Sie bei der Bewältigung derartiger Herausforderungen.

Körbchen ohne Spitze

Die einzigartige Konstruktion ohne Spitze erleichtert die Erfassung von Steinen im Nierenkelch, indem das Körbchen an der Kelchbasis entfaltet werden und den Stein umfassen kann. Zudem wird die Wahrscheinlichkeit einer Mukosaverletzung oder -perforation verringert.

Optimierte Kontrolle

Der NCircle Extraktor ist so konzipiert, dass Stein und Körbchen im Brennweitenbereich des Ureteroskops gehalten werden.

Nitinol-Konstruktion

Durch den Memory Nitinoldraht behält das Körbchen selbst nach extremer Torsion seine Form.

Flexibilität

Während der Steinmanipulation erlaubt die flexible Schleuse die kontinuierliche Auslenkung eines flexiblen Ureteroskops.

Delta Wire® Technologie

Der NCircle Extraktor ist in einer Delta Wire Konfiguration erhältlich. Das Körbchen ist aus Delta Wire Nitinoldraht geformt. Der dreieckige Querschnitt des Delta Wire ergibt ein Vierdraht-Körbchen mit der größtmöglichen Drahtmasse. Die größere Masse und das Formgedächtnis der Nitinollegierung ergeben zusammen eine gesteigerte Radialkraft, die im Ureter eine größere zirkuläre Dilatation zulässt.



Runder Draht

Das Körbchen eines herkömmlichen helikalen Steinextraktors besteht aus rundem Edelstahldraht. Die maximale Stärke der Runddrähte ist vom Schleusendurchmesser abhängig. Auf dieser Abbildung ist ein Querschnitt eines Vierdraht-Körbchens aus Runddraht in einer Schleuse zu sehen.




Delta Wire

Auf dieser Abbildung ist ein Querschnitt eines Delta Wire Vierdraht-Körbchens in einer Schleuse zu sehen. Der dreieckige Querschnitt des Drahts ermöglicht eine größere Drahtmasse bei gleichem Schleusendurchmesser. Diese Konstruktion trägt zur gesteigerten Radialkraft bei, die im Ureter eine größere zirkuläre Dilatation erlaubt.



Zur Steinmanipulation und -entfernung im Harntrakt über den Arbeitskanal eines Endoskops mithilfe eines Körbchens aus Nitinoldraht im Rahmen zystoskopischer oder ureterskopischer Verfahren.

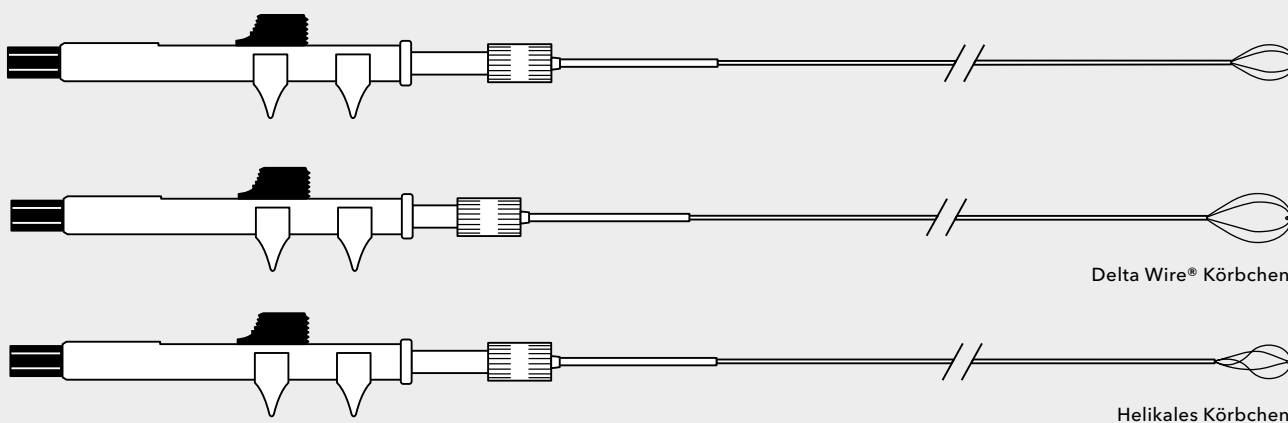

Bestellnummer	Referenznummer	Fr	Länge cm	Durchmesser des Körbchens cm
Nitinol-Steinextraktor ohne Spitze				
G46206	NTSE-015115	1,5	115	1
G18778	NTSE-022115-UDH	2,2	115	1
G17627	NTSE-030115-UDH	3,0	115	1
G17520	NTSE-045065-UDH	4,5	65	1,8
Mit modifiziertem Körbchen				
G18777	NTSE-022115-UDH-MB	2,2	115	1,8
G17872	NTSE-030115-UDH-MB	3,0	115	1,8
Mit Delta Wire® Körbchen				
G19110	NTSED-024115-UDH	2,4	115	1
Mit modifiziertem Delta Wire® Körbchen				
G19111	NTSED-024115-UDH-MB	2,4	115	1,8
Helikaler Nitinol-Steinextraktor ohne Spitze				
G18191	NTHSES-030115-UDH	3,0	115	1
G18193	NTHSE-045065-UDH	4,5	65	1,5

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Cook Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Kundendienst. Beachten Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 21612723770, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
Email: cau.custserv@cookmedical.com



CC, URO-A4