


Eltávolítja még a legnehezebben eltávolítható köveket is.

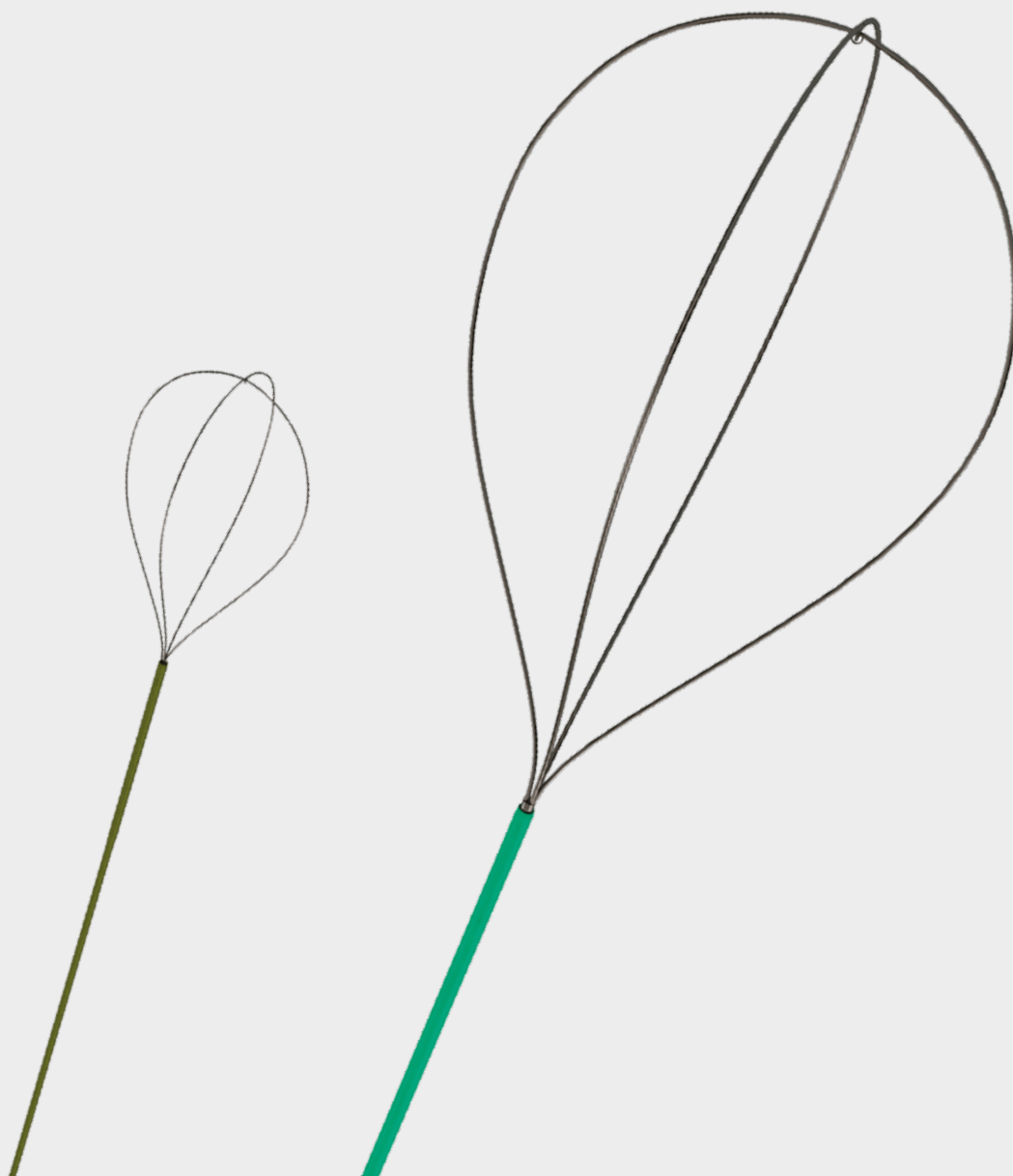

NCircle®

NITINOL TIPLESS STONE EXTRACTOR

NCircle®

NITINOL TIPLESS STONE EXTRACTOR

A minél kisebb traumával járó kőeltávolítás rendkívül nehéz lehet, különösen olyankor, ha folyamatosan szabályozni kell a látómezőt, vagy egy kehelykő körül kell manőverezni. Az NCircle nitinol anyagú, csúcs nélküli kőeltávolító segíthet a kihívások leküzdésében.

Csúcs nélküli kosár

Az egyedi, csúcs nélküli kialakítás segíti a kehelykő megfogását azáltal, hogy lehetővé teszi a kosár kinyitását a kehely alapjánál és a kő körbefogását, miközben csökkenti a nyálkahártya-sérülés és a perforáció kockázatát.

Optimalizált irányítás

Az NCircle kőeltávolítót úgy tervezték, hogy a követ és a kosarat az ureteroszkóp fókuszterületén belül tartsa.

Nitinol konstrukció

A nitinol memóriadrót lehetővé teszi, hogy a kosár még erős torzió után is megőrizze az alakját.

Hajlékonyság

A rugalmas hüvely lehetővé teszi a flexibilis ureteroszkóp folyamatos elhajlítását a kő manipulálása során.

Delta Wire® technológia

Az NCircle kőeltávolító Delta Wire konfigurációban is elérhető. A kosár nitinol Delta Wire-ből készült. A Delta Wire háromszög alakja négydrótos kosarat hoz létre a lehető legnagyobb drótanyagtömeggel. A nagyobb tömeg és a nitinol ötvözet természetes memóriatulajdonságai együttesen fokozott radiális erőt eredményeznek, ami nagyobb radiális tágitást tesz lehetővé az ureterben.



Kör keresztmetszetű drót

Egy szokványos spirális kőeltávolító kosara kör keresztmetszetű, rozsdamentes acéldrótokból készül. A hüvely átmérője határozza meg, hogy milyen vastagok lehetnek a drótok. Ezen az ábrán kör keresztmetszetű drótokból készült, négydrótos kosár keresztmetszete látható a hüvelyben.




Háromszög keresztmetszetű drót (Delta wire)

Ezen az ábrán háromszög keresztmetszetű, Delta Wire drótokból készült, négydrótos kosár keresztmetszete látható a hüvelyben. A drót háromszög keresztmetszete nagyobb drótanyagtömeget tesz lehetővé azonos hüvelyátmérő mellett. Ez a kialakítás hozzájárul a fokozott radiális erőhöz, ami nagyobb radiális tágitást tesz lehetővé az ureterben.



Húgyúti kövek manipulálására és eltávolítására szolgál egy endoszkóp munkacsatornáján keresztül cisztoszkópos vagy ureteroszkópos eljárások során, nitinoldrótos kosár működtetésével.

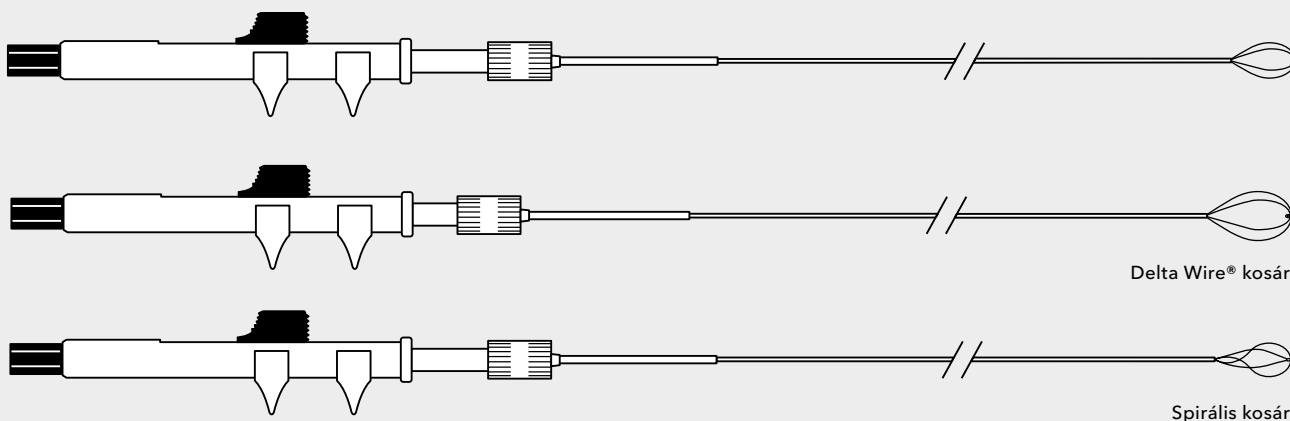

Rendelési szám	Termékkód	Fr	Hossz cm	Kosár átmérője cm
Csúcs nélküli nitinol kőeltávolító				
G46206	NTSE-015115	1,5	115	1
G18778	NTSE-022115-UDH	2,2	115	1
G17627	NTSE-030115-UDH	3,0	115	1
G17520	NTSE-045065-UDH	4,5	65	1,8
Módosított kosárral				
G18777	NTSE-022115-UDH-MB	2,2	115	1,8
G17872	NTSE-030115-UDH-MB	3,0	115	1,8
Delta Wire® kosárral				
G19110	NTSED-024115-UDH	2,4	115	1
Módosított Delta Wire® kosárral				
G19111	NTSED-024115-UDH-MB	2,4	115	1,8
Spirális, csúcs nélküli nitinol kőeltávolító				
G18191	NTHSES-030115-UDH	3,0	115	1
G18193	NTHSE-045065-UDH	4,5	65	1,5

Előfordulhat, hogy egyes termékek, illetve egyes termékkódú termékek nem minden piacon kaphatók. A részletekkel kapcsolatban forduljon a Cook helyi képviselőjéhez vagy az ügyfélszolgálati és értékesítési osztályhoz. A termék kockázataira vonatkozó tájékoztatást lásd a cookmedical.eu honlapon elérhető használati utasításban.

Customer Service

EU website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, emea.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 21612723770, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 8007615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
Email: customersupport@cookmedical.com

Australia:
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
Email: cau.custserv@cookmedical.com



CC, URO-A4