

Bírja a nyomást.



Ultraxx™
NEPHROSTOMY BALLOON

Ultraxx™

NEPHROSTOMY BALLOON

Az Ultraxx nephrostomiás ballon névleges szétrepedési nyomása 20 atm, hasznos táguló szakasza pedig 15 cm hosszú. Ezzel a magas nyomásértékkel és ballonghosszal kiválóan alkalmas nephrostomiás traktus kialakítására.



Átlátszó hüvely

A készlet tartalma: egy Ultraxx ballonkatéter, egy hozzáférési hüvely, valamint a Cook feltöltőeszköz.

Jellemzők


Fogantyú a nyílásnál A fogantyúval az eszköz könnyebben irányítható, és egyszerűbb az eszközzel való munka a feltöltési eljárás során.

Hüvelyzár A zár a helyén tartja a hüvelyt, hogy az ne legyen útban a tágítás közben.

Kettős feltöltő/leeresztő nyílások A nyílások egyenletes nyomást biztosítanak feltöltés közben. A ballon leeresztésekor a nyílások folyadékürítésre szolgálnak az eltávolítási eljáráshoz.

Platinacsík A sáv röntgenárnyékot ad, hogy segítse a ballontágítás pozicionálását.

Elkeskenyedő vég A vég segíti a bevezetést, és lehetővé teszi a katéter 0,038 inch átmérőjű vezetődróra történő ráhúzását.

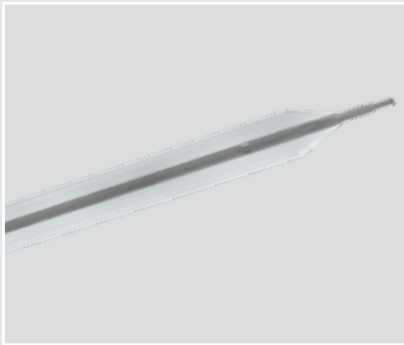

Ultraxx™

NEPHROSTOMY BALLOON

Az Ultraxx nephrostomiás ballon a musculofascia, a capsula fibrosa és parenchyma tágítására szolgál annak érdekében, hogy percutan nephrostomiás traktust lehessen kialakítani és fenntartani. A készlet standard PTFE hozzáférési hüvellyel vagy átlátszó vinilből készült hozzáférési hüvellyel rendelhető a vizualizáció érdekében.

Rendelési szám	Referencia-cikkszám	Feltöltött ballon átmérője (mm)	Ballon hossza (cm)
Készlet			
Átlátszó vinil hüvellyel			
G46037	UNBS-6-15-CS	6	15
G46038	UNBS-8-15-CS	8	15
G30357	UNBS-10-15-CS	10	15
PTFE hüvellyel			
G46036	UNBS-6-15	6	15
G46024	UNBS-8-15	8	15
G30365	UNBS-10-15	10	15

Rendelési szám	Referencia-cikkszám	Feltöltött ballon átmérője (mm)	Ballon hossza (cm)
Csak a ballonkatéter			
Átlátszó vinil hüvellyel			
G30358	UNB-10-15-CS	10	15
PTFE hüvellyel			
G30364	UNB-10-15	10	15

Előfordulhat, hogy egyes termékek, illetve egyes cikkszámú termékek nem minden piacon kaphatók. A részletekkel kapcsolatban forduljon a Cook helyi képviselőjéhez vagy az ügyfélszolgálatához.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001633, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Poland: +48 223060159, pl.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
E-mail: orders@cookmedical.com
Australia:
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



CC, URO-A4